Dale®

Držák nasogastrické sondy


Pokyny k použití




1. Po zavedení NG sondy zajistěte, aby nos i NG trubice byly čisté a suché. Doporučujeme čištění podle nemocničního protokolu.
2. Odloupněte držák NG sondy z ochranné fólie od horní části nosní plochy. **(A)**



3. Vyrovnejte a aplikujte nosní plochu na nos v mírném úhlu k nosní dírce, do které je NG sonda zavedena. **(B)**
4. Vyberte chlopeň nejblíže sondě a začněte ji spirálovitě omotávat, aby většina NG sondy byla ve středu příslušné nosní dírky. **(C)**

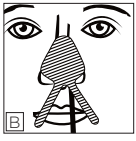

5. Stejně spirálovitě omotejte i druhou chlopeň. **(C)**
6. Držák sondy vyměňujte po třech dnech, případně dříve, je-li to nutné.

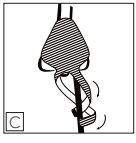

Odstranění

Držák NG sondy odstraníte jednoduše zatažením za nepřilnavé konce obou chlopní, které odmotáte ze sondy.

Následně opatrným tahem směrem nahoru odstraníte držák sondy z pacientova nosu.


K použití pouze u jednoho pacienta. Na jedno použití.


Video s ukázkou aplikace najdete na webu www.dalemed.com


Medicínské produkty Dale jsou dostupné od vašeho dodavatele nemocničních/medicínských produktů.


Vyrobeno bez použití přírodního latexu.


Dale® je registrovaná ochranná známka společnosti Dale Medical Products, Inc. v USA a EU.

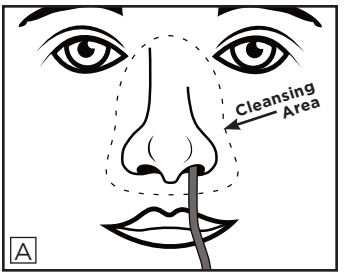

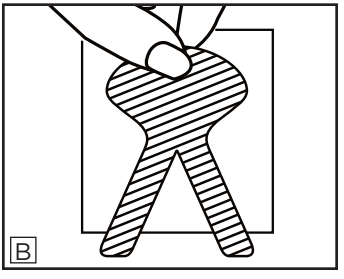

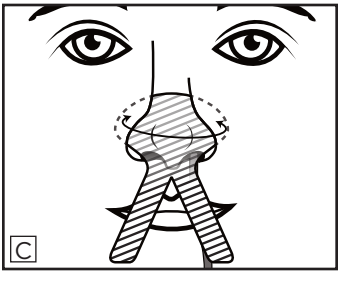

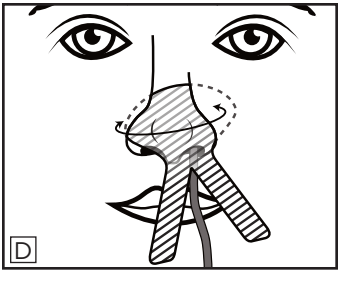

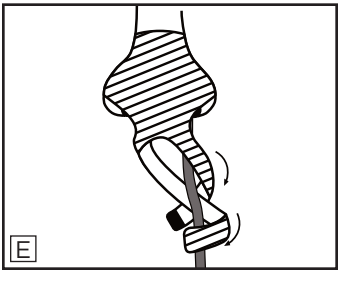

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298
T: 508-695-9316

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Německo

CE

942160 REV G

©Copyright 2021