Dale
Medical Products

# Holder Til Ventrikelsonde

## Brugsanvisning

**1.** Når ventrikelsonden er anlagt: Sørg for, at både næsen og ventrikelsonden er ren og tør.

**2.** Rens næsen og området rundt om med en ren vaskeklud, der er fugtet med varmt, rent vand fra hanen (*ingen sæbe*). Tør området straks efter rensning med et rent, tørt håndklæde. (*Kom ikke sprit på det område, hvor sonden skal anbringes.*) Sprit udtørrer vævet og kan forårsage mikrorevner i huden. **(A)**

**3.** Vi anbefaler også at rense ventrikelsonden udvendigt på området under næseboret for at fjerne eventuelle rester af smøregelen, inden ventrikelsondeholderen vikles om sonden.

**4.** Træk ventrikelsondeholderen af papiret. Start i toppen af næsestykket. **(B)**

**5.** Anbring TOPPEN (^) af næsestykket en smule skråt mod det næsebor, ventrikelsonden er anlagt i, på patientens næse, ca. 6 til 12 mm under næsetippen. Dette hjælper, så sonden kan hænge frit. **(C)**

**6.** Vælg den flig, der er tættest på sonden, og vikl den i en spiral rundt om sonden. Lad der være et lille mellemrum mellem hver omvikling, så cm-mærkerne på ventrikelsonden er synlige. **(D)**

**7.** Vikl den anden flig rundt om sonden på samme måde i en spiral. **(E)**

**8.** Du kan skrive den dato, ventrikelsondeholderen påsættes, med en giftfri kuglepen eller tusch.

**9.** Skift ventrikelsondeholderen efter 3 dage, eller oftere efter behov.

## Aftagning

Når ventrikelsondeholderen skal tages af patienten, skal man blot trække i de ikke-klæbende spidser i enden af hver flig, så de kan vikles af sonden.

Fortsæt med at trække sondeholderen forsigtigt opad for at tage den af patientens næse.

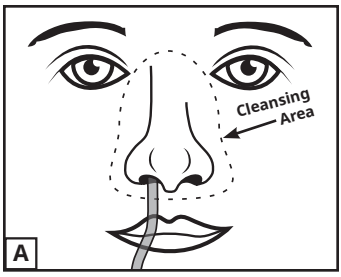
Til brug til en enkelt patient. Til engangsbrug.

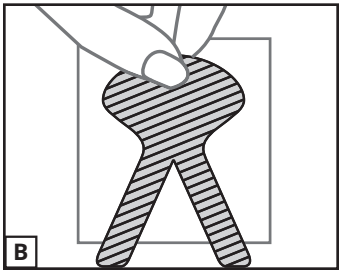
Der ligger en video, der viser anbringelsen, på www.dalemed.com

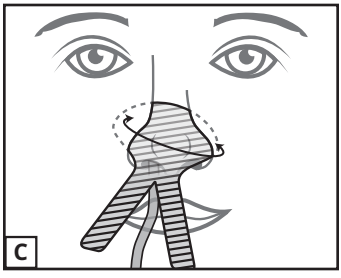
Medicinske produkter fra Dale kan fås hos forhandlere af hospitalsudstyr/medicinsk udstyr.

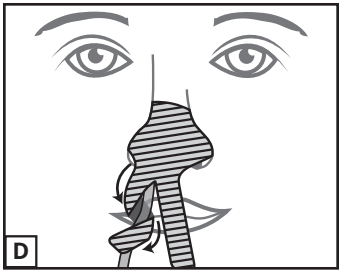
Fremstillet uden naturgummilatex.

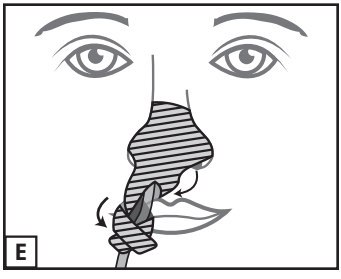
Dale er et registreret varemærke tilhørende Dale Medical Products, Inc. i USA, EU og Storbritannien.




**Dale Medical Products, Inc.**
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942160 REV H

©Copyright 2024