Dale®

Nasogasztrikus tubusrögzítő


Alkalmazási utasítások




1. Miután a nasogasztrikus (NG-) tubus a helyére került, tisztítsa meg és törölje szárazra az orrot és az NG-tubust. Javasoljuk, hogy a tisztítást a klinikai protokollnak megfelelően végezze.



2. Válassza le az NG-tubusrögzítőt a védőszalagról az orrpárna tetejénél kezdve. **(A)**
3. Helyezze fel az orrpárnát az orra enyhén afelé az orrlyuk felé döntve, amelybe az NG-tubus be lett helyezve. **(B)**

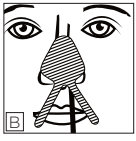

4. Válassza ki a tubushoz közelebbi fület, és spirál alakban tekerje az NG-tubus köré úgy, hogy az NG-tubus a kiválasztott orrlyuk közepén helyezkedjen el. **(C)**
5. A másik fület ugyanígy tekerje spirál alakban a tubus köré. **(C)**

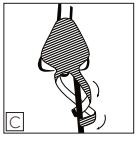

6. Három nap múltán – illetve szükség szerint gyakrabban – cserélje ki a tubusrögzítőt.

Eltávolítás

Az NG-tubusrögzítő eltávolításához húzza a fülek nem tapadó végét azok a tubusról való leválasztásához.

Ezután óvatosan, felfelé húzva távolítsa el a tubusrögzítőt a beteg orráról.


Egyetlen betegen való alkalmazásra. Eldobható.


Az alkalmazást bemutató videóért látogasson el a www.dalemed.com webhelyre.


A Dale gyógyászati termékek elérhetők a kedvelt kórházi-/gyógyászatieszköz-forgalmazójától.


Nem természetes latex gumiból készült.


A Dale® a Dale Medical Products, Inc. bejegyzett védjegye az USA-ban és az EU-ban.

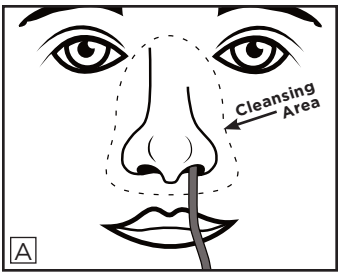

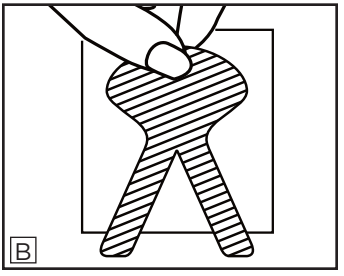

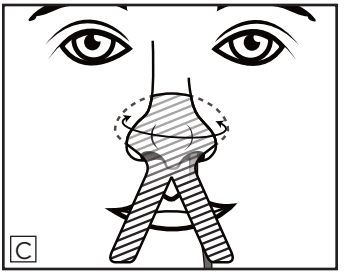

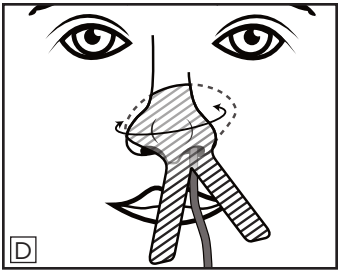

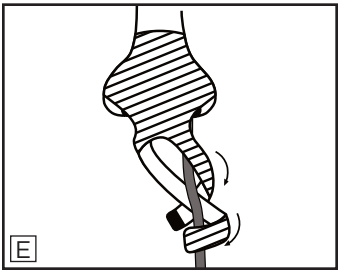

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298
T: 508-695-9316

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Németország

CE

942160 REV G

©Copyright 2021