Dale
Medical Products

経鼻胃管 (NG) チューブホルダー

使用方法

1. チューブ挿入後、鼻もNGチューブも清潔でぬれていない事ことを確かめます。

2. 温かくきれいな水道水（*せっけん無し*）で湿らせた清潔な洗面タオルで、鼻とその周りを清拭します。清潔で乾いたタオルで清拭した後すぐに、鼻とその周りをタオルで乾かします。（*貼付部分にはアルコールを塗布しないこと*）アルコールを使用すると、皮膚組織が乾燥し、微小のひびが発生する可能性があります。**(A)**

3. NGチューブホルダーを巻く前に、残留潤滑剤を取り除くため、鼻孔下のNGチューブ外側をきれいにすることもお薦めします。

4. 鼻パッドの上部より、NGチューブホルダーを台紙からはがします。**(B)**

5. 患者のNGチューブが挿入された側の鼻孔に向けて少し角度をつけ鼻パッドを鼻の頭部分、鼻尖から約6 mm ～ 12 mm離れた位置に貼り付けます。こうすることで、チューブにゆとりができます。**(C)**

6. チューブに近い方のタブを選び、らせん状に巻きつけます。NGチューブのcmマーキングが見えるよう、巻き始めは少し空けておきます。**(D)**

7. 2つ目の残りのタブを同様にらせん状に巻きつけてください。**(E)**

8. 無害のペンやマーカーでNGチューブホルダーを装着した日付を記入することもできます。

9. NGチューブホルダーは3日後、あるいは必要に応じてそれより早めに取り換えてください。

取り外し

患者からNGチューブホルダーを取り外すには、各タブ先端の被粘着性の部分を引いてチューブから取り外します。

続けてチューブホルダーをそっと上向きに引き、患者の鼻から外してください。


一人の患者のみに使用。使い捨て用。


取扱説明ビデオは、www.dalemed.comでご覧になれます。


Dale医療用品は優先病院・医療用品ディーラーよりお求めください。


天然ゴムラテックスは含まれていません。


DaleはDale Medical Products, Inc.の米国、EU、英国における登録商標です。

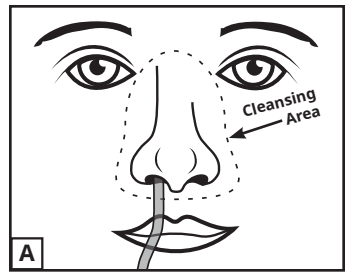

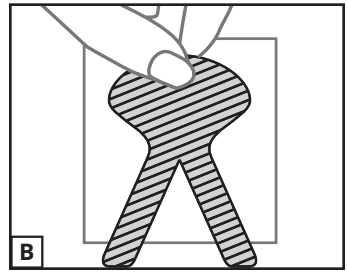

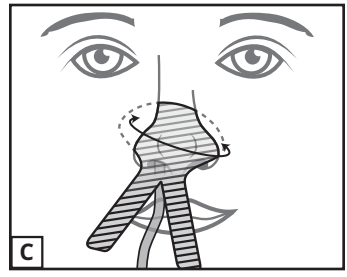

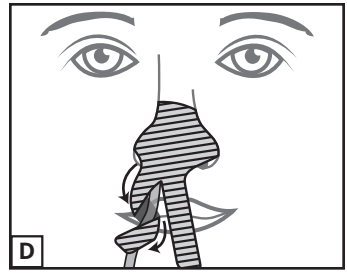

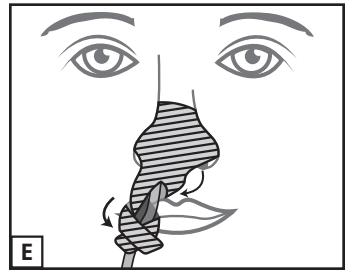

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle・Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942160 REV H

©Copyright 2024