Dale
Medical Products

Holder for Nasogastrisk Sonde

Påsettingsanvisninger

1. Etter at sonden er plassert, skal du påse at både nesen og den nasogastriske sonden er ren og tørr.
2. Rens nesen og området rundt med en ren vaskeklut som er fuktet med varmt vann fra kranen (*ikke såpe*). Tørk området med et rent, tørt håndkle umiddelbart etter rensing. (*Bruk ikke sprit i påsettingsområdet.*) Sprit vil tørke ut vevet og kan forårsake mikroskopiske sprekker i huden **(A)**.
3. Det anbefales også å rense utsiden av den nasogastriske sonden nedenfor neseborområdet for å fjerne eventuelle rester av smøregel før holderen for den nasogastriske sonden vikles rundt.
4. Fjern holderen for den nasogastriske sonden fra beskyttelsespapiret ved å begynne å dra øverst på nesepuben **(B)**.
5. Posisjoner nesepuben SPISS (^) i svak vinkel mot neseborene mens du holder den nasogastriske sonden på pasientens nese, cirka 6 til 12 mm nedenfor nesetippen. Dette gjør at sonden kan henge fritt **(C)**.
6. Velg fliken som er nærmest sonden, og begynn å vikle den i spiralmønster. Forsøk å lage et lite vindu i begynnelsen av viklingen slik at cm-merket på den nasogastriske slangen er synlig **(D)**.
7. Vikle den andre fliken med samme spiralteknikk **(E)**.
8. Du kan notere datoen da holderen for den nasogastriske sonden ble satt på, med en giftfri penn eller tusj.
9. Bytt holderen for den nasogastriske sonden etter 3 dager eller tidligere ved behov.

Fjerning

Fjern holderen for den nasogastriske sonden fra pasienten ved å dra i de klebefrie endene på hver av flikene for å vikle dem av sonden.

Fortsett å dra sondeholderen forsiktig oppover for å fjerne den fra pasientens nese.


Bare til bruk på én pasient. Til engangsbruk


Du finner en video om påsetting på www.dalemed.com


Medisinske produkter fra Dale fås hos forhandlere av sykehusutstyr / medisinske produkter.


Produsert uten lateks av naturgummi.


Dale er et registrert varemerke for Dale Medical Products, Inc. i USA, EU og Storbritannia.

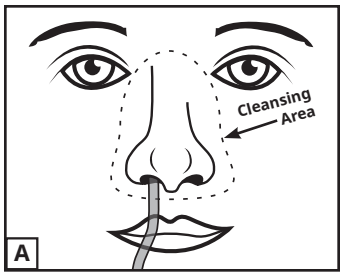

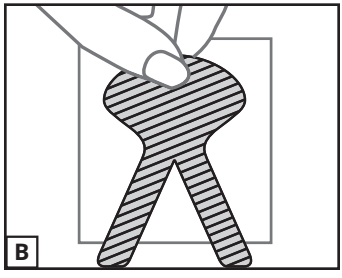

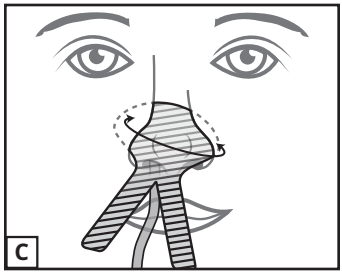

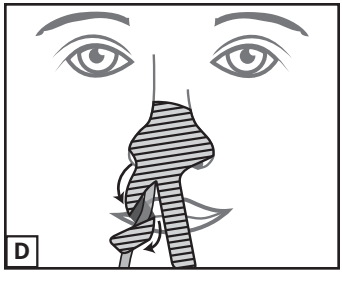

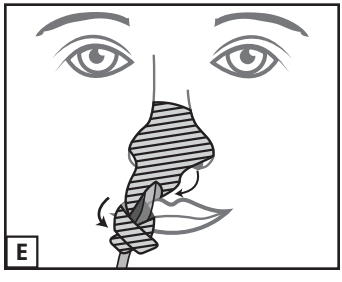

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942160 REV H

©Copyright 2024