
Soporte para Sonda Nasogástrica



Los soportes para sondas nasogástricas Dale son ideales para sujetar sondas de alimentación y aspiración nasogástricas como: Sondas Salem Sump™, sondas gástricas Levin, sondas de alimentación nasoentérica y sondas intestinales nasogástricas.

El soporte supone una mejora con respecto a la cinta adhesiva y otros tipos de soportes con reverso adhesivo, ya que incorpora un adhesivo respetuoso con la piel que se adhiere a la piel de la nariz de forma rápida y cómoda. El soporte puede permanecer en su sitio hasta 72 horas. El soporte centra la sonda que sale de la fosa nasal izquierda o derecha, lo que permite que la sonda "cuelgue" de la nariz en una posición más natural.

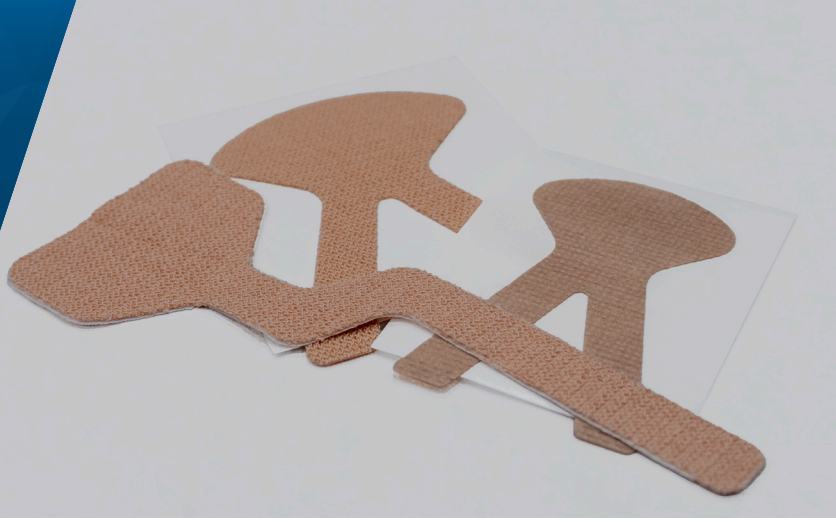

160/161 Soporte para Sonda Nasogástrica



163 UltraGrip Soporte para Sonda Nasogástrica

Características principales

- Fácil de utilizar
- Sujeta con seguridad todas las sondas nasogástricas en su sitio
- Previene la irritación, erosión o necrosis nasal
- Ayuda a evitar la dislocación o extracción involuntaria de la sonda
- Proporciona la máxima seguridad a la sonda
- La almohadilla nasal se estira y se adapta a distintas formas de nariz
- Las puntas no adherentes permiten retirar fácilmente el soporte sin que se pegue a los guantes de examen
- No está fabricado con látex de caucho natural
- Todos los soportes para sonda nasogástrica Dale también pueden sujetar sondas de manometría y de pH independiente

Número de producto	Description	Cantidad
160	**Soporte para Sonda Nasogástrica** Grande/Adulto, Doble pestaña	50 por caja
161	**Soporte para Sonda Nasogástrica** Pequeño/Joven Adulto/Pediátrico/Geriátrico, Doble pestaña	50 por caja
163	**UltraGrip™ Soporte para Sonda Nasogástrica** Grande/Adulto, Pestaña única	50 por caja

Patentes dalemed.com/patents

Dale® Medical Products

EMPLOYEE OWNED 100% AND OPERATED

508.695.9316
dalemed.com



Soporte para Sonda Nasogástrica

Características	Ventajas clínicas
Adhesivo respetuoso con la piel	▪ Proporciona la máxima seguridad a la sonda ▪ Sujeta con seguridad las sondas de alimentación y/o aspiración ▪ Suave con la piel delicada ▪ Resiste el aire humidificado de la mascarilla de oxígeno ▪ No deja residuos pegajosos en la sonda ni en la nariz después de retirarla
Tejido	▪ El material transpirable puede dejarse colocado hasta 3 días ▪ El material se estira para adaptarse a cualquier forma de nariz ▪ Más cómodo que el esparadrapo tradicional
Pestañas dobles (sólo 160/161)	▪ Máxima seguridad de la sonda ▪ Reduce la dislocación o extracción involuntaria de la sonda nasogástrica ▪ El menor movimiento de la sonda nasogástrica reduce la irritación nasal ▪ Centraliza la sonda nasogástrica en la fosa nasal gracias a la acción de tracción de las lengüetas de envoltura superior e inferior. ▪ Puede alojar una sonda nasogástrica ▪ Más seguro que la cinta adhesiva
Ficha larga única (sólo 163)	▪ Máxima seguridad de la sonda ▪ Reduce la dislocación o extracción involuntaria de la sonda nasogástrica ▪ El menor movimiento de la sonda nasogástrica reduce la irritación nasal ▪ Una lengüeta centraliza la sonda en la fosa nasal ▪ Una pata de sujeción simplifica la aplicación
Puntas no adherentes	▪ La lengüeta de plástico “Starter” permite una fácil aplicación y retirada del tubo ▪ No es necesario cortar, por lo que no hay que temer cortar el tubo accidentalmente ▪ Fácil de usar con guantes
Almohadilla de espuma para puente (sólo 163)	▪ Incorpora una exclusiva almohadilla de espuma no adhesiva para el puente que se apoya en la punta de la nariz, proporcionando un cojín para distribuir uniformemente la sonda nasogástrica y ayudar a prevenir las lesiones por presión adquiridas con el dispositivo médico. ▪ Aumenta la comodidad del paciente, a la vez que minimiza el contacto localizado con los tejidos para ayudar a prevenir las úlceras cutáneas
Cómodo y práctico	▪ Permite a la enfermera cambiar el soporte de forma independiente sin tener que esperar al personal adicional
No fabricado con látex de caucho natural	▪ Elimina las reacciones al látex de pacientes y cuidadores

Más información

Dale Medical Products

EMPLOYEE OWNED 100% AND OPERATED

Dale es una marca registrada de Dale Medical Products, Inc. en EE.UU., la UE y el Reino Unido.
UltraGrip es una marca comercial de Dale Medical Products, Inc.
Salem Sump es una marca comercial de Cardinal Health
©2025 Dale Medical Products, Inc., Todos los derechos reservados
PS-160 REV J