
Dale
Medical Products

Houders voor Tracheostomiecanules

Instructies voor het Aanbrengen

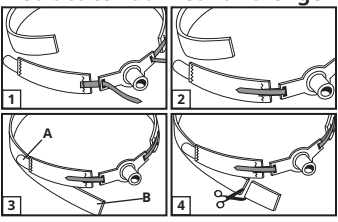

1. Rijg de lange, smalle bevestigingslipjes door de flenzen van het schildje.
2. Breng de lipjes terug over de flens en kleef ze aan de halsband.
3. Maak het bevestigingslipje van het korte gedeelte **(A)** vast aan het lange halsbandgedeelte **(B)**. Stel de band af op de gewenste lengte of druk.
4. Knip het overtollige materiaal **(B alleen)** op de juiste lengte af.

Let op

Alleen onder toezicht gebruiken. Waak erover dat het geheel niet per ongeluk losraakt. De bevestigingslipjes niet bijknippen.

De houder dagelijks of zo nodig vaker vervangen. Vervangen na het wassen van de patiënt.

Voor gebruik bij één patiënt. Disposable.

Een video over het gebruik van het product is te vinden op www.dalemed.com

De medische producten van Dale zijn verkrijgbaar bij uw voorkeursleverancier van ziekenhuis-/medische benodigdheden.

Niet vervaardigd met natuurrubberlatex.

Octrooi www.dalemed.com/patents

Dale is een gedeponeerd handelsmerk van Dale Medical Products, Inc. in de VS, EU en VK.

PHT NON-DEHP DEHP

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942182 REV F

©Copyright 2024