
Dale
Medical Products

Klevende Basis

Instructies voor het Aanbrengen

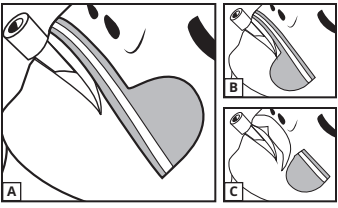

1. Gebruik een huidbeschermingsdoekje om bescherming op de huid aan te brengen.
2. Verwijder de steunlaag en breng de klevende basis op de gewenste plaats aan **(A-C)**. Zo nodig bijknippen.

Verwissel de basis na 3 dagen of zo nodig sneller.

Voer dagelijks of vaker een controle uit.

Verwijderen

De klevende basis moet voorzichtig worden verwijderd om beschadiging van de huid te voorkomen.

Om verzwering of scheuren van de huid te voorkomen, dient u de huid en de medische gesteldheid van de patiënt te beoordelen alvorens het product aan te brengen.

Voor gebruik bij één patiënt. Disposable.

Een video over het gebruik van het product is te vinden op www.dalemed.com

De medische producten van Dale zijn verkrijgbaar bij uw voorkeursleverancier van ziekenhuis-/medische benodigdheden.

Niet vervaardigd met natuurrubberlatex.

Dale is een gedeponeerd handelsmerk van Dale Medical Products, Inc. in de VS, EU en VK.

PHT NON-DEHP DEHP

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942143 REV E

©Copyright 2024