
Dale
Medical Products

Base Adhesiva

Instrucciones de Aplicación

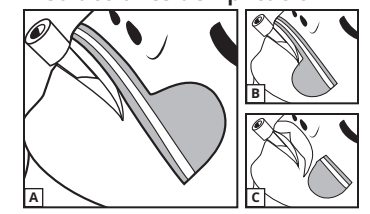

1. Aplique el producto de preparación de la piel.

2. Quite el revestimiento y coloque la base adhesiva en el lugar deseado **(A-C)**. Recórtela según sea necesario.

Cambie la base al cabo de 3 días o antes si fuera necesario.

Inspeccione por lo menos una vez por día.

Cómo Retirar

Despegue el producto adhesivo cuidadosamente para no lesionar la piel.

Para prevenir úlceras o laceraciones cutáneas, evalúe la piel y las afecciones médicas del paciente antes de aplicar el producto.

Para utilizar en una sola paciente. Desechable.

Para ver un vídeo sobre cómo utilizar el producto, visita www.dalemed.com

Los productos médicos Dale están disponibles con su distribuidor preferido de productos para hospitales o médicos.

Fabricado sin látex de goma natural.

Dale es una marca registrada de Dale Medical Products, Inc. en EE.UU., la UE y el Reino Unido.

PHT NON-DEHP DEHP

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942143 REV E

©Copyright 2024