REF 280

Dale® BreezeLock® Endotracheal Tube Holder



For Comfortable & Secure Stabilization

Dale® Medical Products

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

(Croatian, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish, Thai, Turkish)

Dale® Medical Products

BreezeLock® Držač Endotrahealne Kanile

za endotrahealne kanile veličine 7,0-10,0mm
Sadržaj: 1 od svakog - ovratnik; samoljepiva podloga 273

Upute za Primjenu

1. Očistite kanilu. Ostavite da se osuši.
2. Zalijepite samoljepljivu podlogu. **(A)** Slijedite upute na pakiranju samoljepljive podloge 273.
3. Utisnite ovratnik na gornji dio samoljepive podloge te pazite da je TRAKA centrirana iznad usta bolesnika. **(B)**
4. Otvorite trake za pričvršćivanje na oba kraja ovratnika te omotajte ovratnik oko glave bolesnika neposredno ispod ušiju. Stegnite trake za pričvršćivanje s vanjske strane ovratnika.
5. Podignite GORNJI SLOJ TRAKE. Postavite DRŽAČ KANILE preko endotrahealne kanile. Fiksirajte GORNJI SLOJ TRAKEu točan položaj preko TRAKE i ovratnika. Provjerite da traka dobro prianja na ovratnik, da je plava kopča trake potpuno prekrivena te da je plastični držač kanile okomito centriran.
6. Postupak lijepljenja kanile na DRŽAČ KANILE:
   - Kkad je kanila u slobodnom položaju ispod DRŽAČA KANILE, jednom omotajte dugu samoljepivu traku od 20-tak cm oko kanile. **(C)**
   - Utisnite DRŽAČ KANILE na kanilu.
   - Čvrsto omotajte ljepljivu traku spiralnim pokretom prema naprijed oko kanile i DRŽAČA KANILE na barem 2,5 cm od bolesnika **(D)**. Obavezno omotajte kanilu barem tri puta.
7. Dodatno fiksirajte ovratnik podešavanjem traka za pričvršćivanje prema potrebi.

- Prema potrebi mijenjajte ljepljivu traku na DRŽAČU KANILE
- Promijenite napravu nakon 72 sata ili ranije ako je potrebno.
- Procijenite stanje kože bolesnika i njegovo zdravstveno stanje prije primjene da se izbjegnu ulceracije ili pucanje kože. Provjerite stanje jednom dnevno ili češće.

Premještanje Kanile

Držeći zalijepljeni DRŽAČ KANILE jednom rukom odvojite GORNJI SLOJ TRAKE od same TRAKE. Pomaknite DRŽAČ KANILE i premjestite kanilu na željeno mjesto. Utisnite GORNJI SLOJ TRAKE natrag na TRAKU i ovratnik da biste fiksirali kanilu u željeni položaj. Provjerite da traka dobro prianja na ovratnik, da je plava kopča trake potpuno prekrivena te da je plastični držač kanile okomito centriran.

Uklanjanje

Napravu je potrebno oprezno ukloniti da se izbjegnu ozljede kože. Ponovo premažite kožu ako će se postavljati druga naprava.

Dale **preporuča čestu promjenu položaja endotrahealne kanile** s ciljem sprječavanja ozljeda usnica i potkožnog tkiva zbog konstantnog pritiska.

Dale **strogo preporuča korištenje potpore za cijev respiratora kako bi se smanjio** pritisak na lice bolesnika.

Za uporabu na samo jednom bolesniku. Jednokratno.

Video s uputama za primjenu nalazi se na www.dalemed.com.


Ne sadrži prirodni gumeni lateks.


Patent www.dalemed.com/patents


Napomena korisniku i/ili bolesniku: svaki ozbiljan incident koji se dogodi povezano s ovom napravom mora se prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj je korisnik i/ili bolesnik registriran ili rezident.


Dale & BreezeLock registrirani su zaštitni znaci tvrtke Dale Medical Products, Inc. u SAD-u, EU i UK-u.


PHT NON-DEHP DEHP

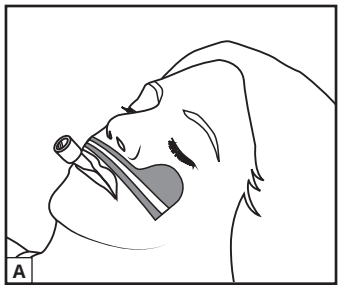

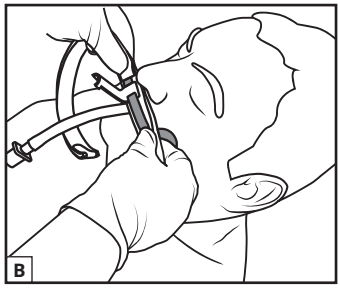

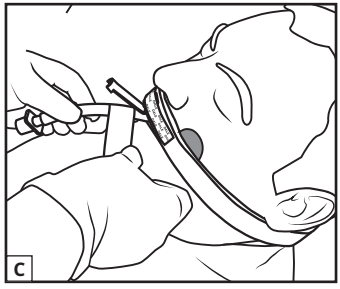

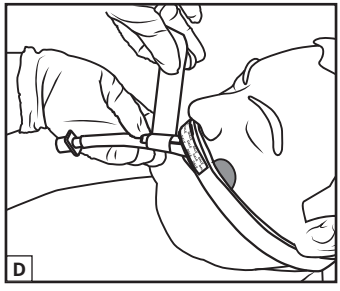

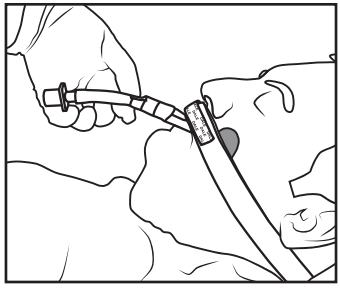

©Copyright 2025

942255 REV C

©Copyright 2025