REF 280

Dale® BreezeLock® Endotracheal Tube Holder



For Comfortable & Secure Stabilization

Dale®
Medical Products

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

(Croatian, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish, Thai, Turkish)

Dale®
Medical Products

BreezeLock®
Holder Til Endotrakealtube

passer til endotrakealtube str. 7,0-10,0 mm
Indhold: 1 af hver - halsrem; klæbebund 273

Brugsanvisning

1. Rens tuben. Lad den tørre.

2. Påfør klæbebunden. **(A)** Følg anvisningerne på emballagen til klæbebund 273.

3. Tryk halsremmen fast på den del af klæbebunden, hvor burrebåndet sidder og sørg for, at SPORET befinder sig midt over patientens mund. **(B)**

4. Åbn låsefligene i begge ender af halsremmen og læg remmen rundt om hovedet lige under ørerne. Fastgør låsefligene på ydersiden af halsremmen.

5. Løft OVERDÆKNINGEN. Anbring KANALEN over endotrakealtuben. Tryk OVERDÆKNINGEN hen over SPORET og halsremmen, og fastgør den i den rette position. Sørg for, at der er god kontakt med halsremmen, at det blå tubespor er helt dækket, og at plastikkanalen sidder lodret i midten.

6. Sådan tapes tuben fast til KANALEN:

- Med tuben hvilende frit under KANALEN, vikles et stykke på 20 cm kraftigt tape 1 x rundt om tuben. **(C)**
- Tryk TUBEKANALEN ned på tuben.
- Vikl tapen tæt rundt om tuben og KANALEN i en fremadgående cirkelbevægelse mindst 2,5 cm fra patienten **(D)**. Sørg for at vikle rundt om tuben mindst 3 gange.

7. Sørg for at halsremmen sidder ordentligt ved at justere låsefligene efter behov.

- Udskift tapen på KANALEN efter behov.
- Udskift klæbebunden efter 72 timer eller før, hvis det er nødvendigt.
- For at forhindre sår eller rifter på huden vurderes patientens hud og medicinske tilstand inden anbringelse. Efterses dagligt eller oftere.

Justering af Tubens Position

Løft OVERDÆKNINGEN af SPORET, mens du holder den tapede KANAL med den ene hånd. Skub KANALEN for at flytte tuben hen på den ønskede placering. Tryk OVERDÆKNINGEN tilbage på SPORET og halsremmen for at fastgøre tubens placering. Sørg for, at der er god kontakt med halsremmen, at det blå tubespor er helt dækket, og at plastikkanalen sidder lodret i midten.

Aftagning

Klæbebunden skal tages forsigtigt af for at undgå hudtraume. Kom skin-prep på igen, hvis der skal påsættes en ny klæbebund.

Dale **anbefaler at flytte på endotrakealtuben ofte** for at forhindre skade på læber og underliggende væv, der kan opstå pga. kontinuerligt tryk.

Dale **anbefaler også kraftigt at støtte ventilationsslangen** for at reducere trykket mod patientens ansigt.

Til brug til en enkelt patient. Til engangsbrug.

Der ligger en video, der viser anbringelsen, på www.dalemed.com


Ikke fremstillet med naturgummilatex.


Patent www.dalemed.com/patents


Bemærkning til brugeren og/eller patienten: Enhver alvorlig hændelse, der måtte opstå i forbindelse med dette udstyr, skal indberettes til fabrikanten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er bosiddende.


Dale & BreezeLock er registrerede varemærker tilhørende Dale Medical Products, Inc. i USA, EU og Storbritannien.


PHT NON-DEHP DEHP

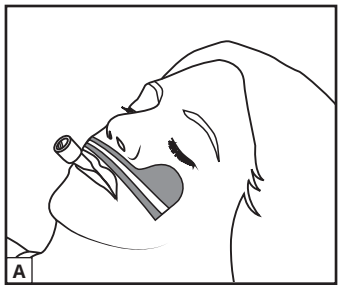

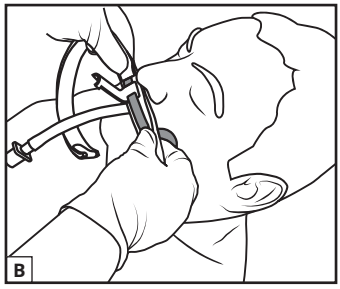

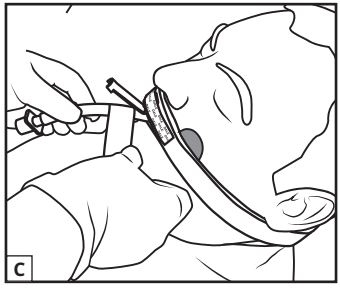

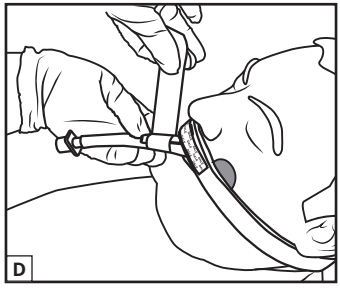

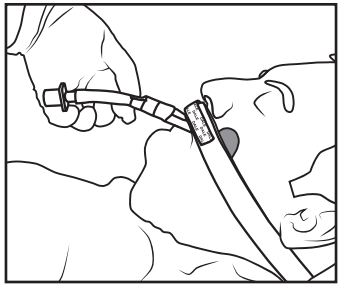

©Copyright 2025

942255 REV C

©Copyright 2025