REF 280

Dale® BreezeLock® Endotracheal Tube Holder



For Comfortable & Secure Stabilization

Dale®
Medical Products

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

(Croatian, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish, Thai, Turkish)

Dale®
Medical Products

BreezeLock®
Endotrachealtubushalter

passend für endotrachealtuben der größen 7,0–10,0mm
Inhalt: Je ein Nackenband, ein 273 Klebestreifen

Anwendung

1. Tubus säubern und trocknen lassen.
2. Klebestreifen aufbringen. **(A)** Anweisungen auf der Verpackung des 273 befolgen.
3. Nackenband so auf das Hakenteil am Klebestreifen drücken, dass die FÜHRUNGSSCHIENE über dem Mund des Patienten zentriert ist. **(B)**
4. Die an beiden Enden des Nackenbandes befindlichen Befestigungslaschen öffnen und das Nackenband unmittelbar unterhalb der Ohren um den Kopf legen. Befestigungslaschen an der Außenseite des Nackenbandes sichern
5. SCHUTZAUFLAGE anheben. KANAL über dem Endotrachealtubus positionieren. SCHUTZAUFLAGE über FÜHRUNGSSCHIENE und Nackenband drücken, um die Teile in Position zu fixieren. Sicherstellen, dass guter Kontakt zum Nackenband besteht, die blaue Tubusführungsschiene vollständig abgedeckt ist und der Kunststoffkanal vertikal zentriert ist.
6. Befestigung des Tubus am KANAL mittels Klebeband:
   - Tubus frei unter dem KANAL aufliegen lassen und einmal mit einem 20 cm langen Stück starkem Klebeband umwickeln. **(C)**
   - TUBUSKANAL nach unten auf den Tubus drücken.
   - Klebeband mindestens 2,5 cm vom Patienten entfernt spiralförmig vorwärts fest um den Tubus und KANAL wickeln **(D)**. Tubus mindestens dreimal umwickeln.
7. Der sichere Sitz des Nackenbandes wird durch bedarfsweises Anpassen der Befestigungslaschen sichergestellt.

- Klebeband am KANAL je nach Bedarf wechseln.
- Produkt nach 72 Stunden oder bei Bedarf früher wechseln.
- Zur Vermeidung von Hautulzerationen oder -rissen sind die Haut und der Gesundheitszustand des Patienten vor Anbringen dieses Produkts zu beurteilen. Täglich oder ggf. auch häufiger prüfen.

Neupositionierung des Tubus

Den mittels Klebeband befestigten KANAL mit einer Hand festhalten und die SCHUTZAUFLAGE von der FÜHRUNGSSCHIENE abheben. KANAL verschieben, um den Tubus an der gewünschten Stelle zu positionieren. SCHUTZAUFLAGE wieder auf die FÜHRUNGSSCHIENE und das Nackenband nach unten drücken, um den Tubus in Position zu fixieren. Sicherstellen, dass guter Kontakt zum Nackenband besteht, die blaue Tubusführungsschiene vollständig abgedeckt ist und der Kunststoffkanal vertikal zentriert ist.

Entfernen

Produkt vorsichtig abziehen, um Hautverletzungen zu vermeiden. Hautvorbereitungsmittel erneut auftragen, wenn ein weiteres Produkt angebracht werden soll.

Dale **empfiehlt eine häufige Neupositionierung des Endotrachealtubus**, um eine Verletzung der Lippen und des darunterliegenden Gewebes durch andauernden Druck zu vermeiden

Dale **empfiehlt ausdrücklich, den Beatmungstubus abzustützen**, um den Druck auf das Gesicht des Patienten zu reduzieren.

Nur für den Gebrauch an einem einzelnen Patienten bestimmt. Einwegartikel.

Ein Video der Anwendung finden Sie unter www.dalemed.com


Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt.


Patent www.dalemed.com/patents


Hinweis für den Anwender und/oder die Patientin: Jeder schwerwiegende Zwischenfall im Zusammenhang mit diesem Produkt ist dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder die Patientin ansässig ist, zu melden.


Dale und BreezeLock sind eingetragene Marken von Dale Medical Products, Inc. in den USA, der EU und Großbritannien.


PHT NON-DEHP DEHP

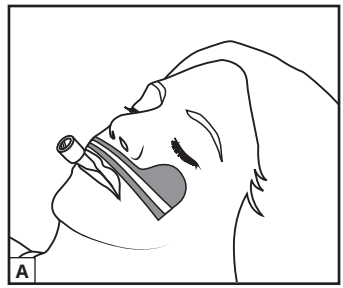

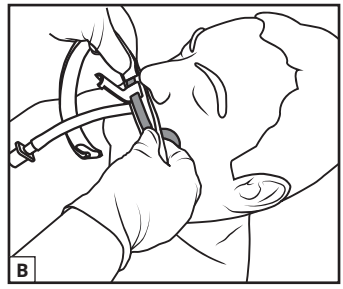

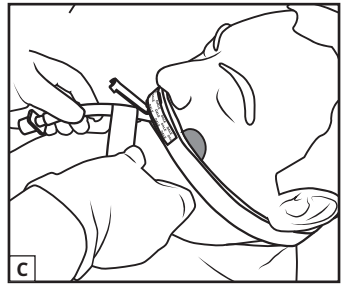

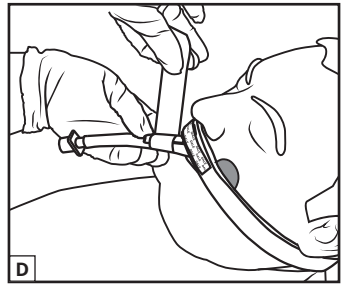

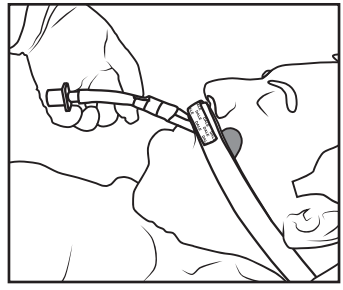

©Copyright 2025

942255 REV C

©Copyright 2025