REF 280

Dale® BreezeLock® Endotracheal Tube Holder



For Comfortable & Secure Stabilization

Dale® Medical Products

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

(Croatian, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish, Thai, Turkish)

Dale® Medical Products

BreezeLock®
Supporto per Tubo Endotracheale

per tubi endotracheali da 7,0 mm a 10,0 mm
Contenuto: 1 cad. - collare; base adesiva 273

Istruzioni per l'Applicazione

1. Pulire il tubo. Lasciarlo asciugare.

2. Applicare la base adesiva **(A)**. Attenersi alle istruzioni riportate sulla confezione 273.

3. Premere il collare contro la porzione a ganci della base adesiva, accertandosi che il BINARIO sia ben centrato sulla bocca del paziente. **(B)**

4. Aprire le linguette di aggancio ad ambo le estremità del collare e avvolgere la testa con il collare, immediatamente sotto le orecchie. Fissare le linguette di aggancio sul lato esterno del collare.

5. Sollevare la COPERTURA. Posizionare il CANALE sul tubo ET. Premere la COPERTURA lungo il BINARIO e il collare per fissarli in posizione. Accertarsi di ottenere un buon contatto con il collare, che il binario blu per tubo sia completamente coperto e che il canale in plastica sia centrato verticalmente.

6. Passi per nastrare il tubo sul CANALE:

- Con il tubo appoggiato appena sotto il CANALE, avvolgere una volta attorno al tubo uno spezzone da 20 cm di nastro adesivo forte. **(C)**
- Premere il CANALE DI TUBAZIONE sul tubo.
- Avvolgere il nastro ben steso attorno al tubo con moto a spirale in avanti e il CANALE ad almeno 2,5 cm di distanza dal paziente **(D)**. Accertarsi di avvolgere il nastro sul tubo completando almeno 3 giri.

7. Verificare la sicurezza del collare regolando le linguette di aggancio secondo le necessità.

- Se necessario, cambiare il nastro posto sul CANALE.
- Cambiare dispositivo dopo 72 ore o più spesso se necessario.
- Per prevenire le ulcerazioni o lacerazioni cutanee, valutare la pelle del paziente e le sue condizioni mediche prima di applicare questo dispositivo. Monitorare una volta al giorno o più spesso.

Riposizionamento del Tubo

Afferrando il CANALE nastrato con una mano, sollevare la COPERTURA. Far scorrere il CANALE per spostare il tubo nella posizione desiderata. Premere la COPERTURA sul BINARIO e sul collare per immobilizzare di nuovo il tubo. Verificare il buon contatto con il collare, la completa copertura del binario blu per tubo e la centratura in verticale del canale in plastica.

Rimozione

Il dispositivo va rimosso con cautela per evitare traumi cutanei. Applicare nuovamente la lozione per la pelle in preparazione dell'impiego di un nuovo dispositivo.

Dale **consiglia di riposizionare spesso il tubo endotracheale** per evitare di ledere le labbra e il tessuto sottostante a seguito della continua pressione.

Dale **consiglia vivamente di sorreggere il tubo del ventilatore meccanico** per ridurre la pressione sul viso del paziente.

Per uso singolo. Smaltibile.

Visitare www.dalemed.com per un video dimostrativo


Non prodotto con lattice di gomma naturale.


Brevetto www.dalemed.com/patents


Avviso per gli utenti e/o pazienti: qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione a questo dispositivo deve essere relazionato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro nel quale abbia sede detto utente e/o paziente.


Dale e BreezeLock sono marchi registrati di Dale Medical Products, Inc. negli USA, nell'UE e nel Regno Unito.


PHT NON-DEHP DEHP

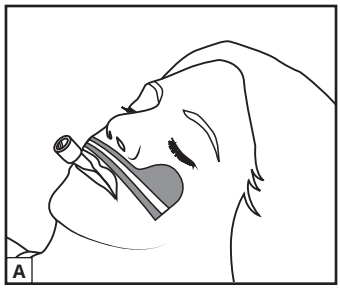

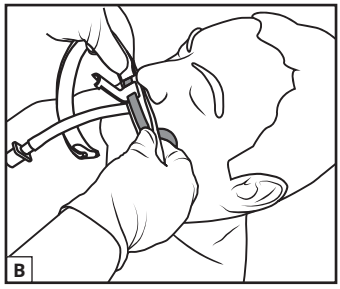

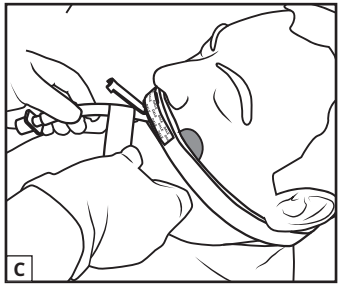

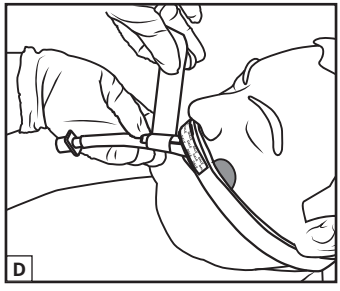

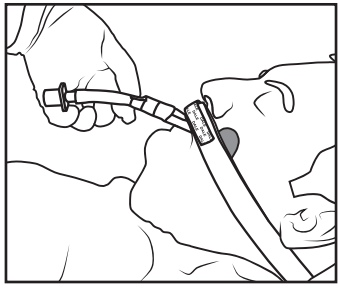

©Copyright 2025

942255 REV C

©Copyright 2025