REF 280

Dale® BreezeLock® Endotracheal Tube Holder



For Comfortable & Secure Stabilization

Dale® Medical Products

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

(Croatian, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish, Thai, Turkish)

Dale® Medical Products

BreezeLock® Holder for Trakealtube

passer til trakealtuber i størrelse 7,0–10,0 mm
Innhold: 1 stk. av hver: nakkerem, 273-klebeplate

Påsettingsanvisninger

1. Rengjør tuben. La tørke.

2. Sett på klebeplaten **(A)**. Følg anvisningene på 273-emballasjen.

3. Trykk nakkeremmen inn på den delen av klebeplaten som har festekroker, og påse at SKINNEN er midtstilt ovenfor pasientens munn. **(B)**

4. Åpne festeflikene i begge ender av nakkeremmen, og legg nakkeremmen rundt hodet, rett nedenfor ørene. Fest festeflikene til utsiden av nakkeremmen.

5. Løft OVERLEGGSPLATEN. Posisjoner KANALEN over trakealtuben. Trykk OVERLEGGSPLATEN over SKINNEN og nakkeremmen for å feste den i riktig posisjon. Påse at det er god kontakt med nakkeremmen, at den blå tubeskinnen er helt dekket og at plastkanalen er midtstilt vertikalt.

6. Fremgangsmåte for å teipe tuben til KANALEN:

- La tuben ligge fritt nedenfor KANALEN, og vikle 20 cm med kraftig teip én gang rundt tuben. **(C)**
- Trykk TUBEKANALEN ned og inn på tuben.
- Vikle teipen godt fast rundt tuben og KANALEN med spiralbevegelser forover, minst 2,5 cm unna pasienten **(D)**. Sørg for å vikle rundt tuben minst 3 ganger.

7. Påse at nakkeremmen sitter godt ved å justere festeflikene på nytt etter behov.

- Bytt teip på KANALEN etter behov.
- Bytt enhet etter 72 timer eller oftere ved behov.
- Forebygg sår og rifter i huden ved å evaluere pasientens hud og helsetilstand før påsetting. Overvåk daglig eller oftere.

Justere Tubens Posisjon

Hold den teipede KANALEN med den ene hånden, og løft OVERLEGGSPLATEN opp fra SKINNEN. Skyv KANALEN for å flytte tuben til ønsket sted. Trykk OVERLEGGSPLATEN ned på SKINNEN og nakkeremmen igjen for å feste tuben i riktig posisjon. Påse at det er god kontakt med nakkeremmen, at den blå tubeskinnen er helt dekket og at plastkanalen er midtstilt vertikalt.

Fjerne Enheten

Enheten skal fjernes forsiktig for å unngå hudtraume. Påfør hudprepareringsmiddel på nytt hvis en ny enhet skal settes på.

Dale **anbefaler å justere trakealtubens posisjon ofte** for å forebygge trykkskader på lepper og underliggende vev.

Dale **anbefaler på det sterkeste å støtte opp ventilasjonstuben** for å redusere trykket mot pasientens ansikt.

Til bruk på én pasient. Til engangsbruk.

Du finner en video om påsetting på www.dalemed.com


Produsert uten naturgummilateks.


Patent www.dalemed.com/patents


Merknad til brukeren og/eller pasienten: Alle alvorlige uønskede hendelser som har oppstått i forbindelse med dette utstyret, skal meldes til produsenten og den kompetente myndigheten i medlemslandet der brukeren og/eller pasienten er etablert.


Dale & BreezeLock er registrerte varemerker for Dale Medical Products, Inc. i USA, EU og Storbritannia.


PHT NON-DEHP DEHP

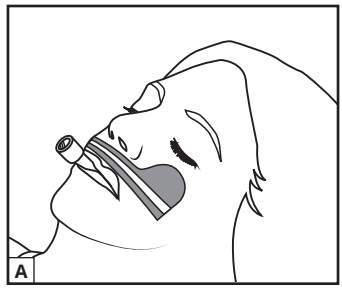

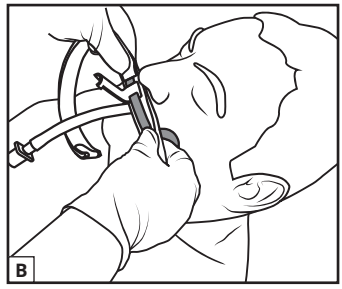

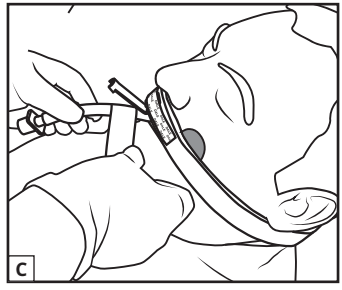

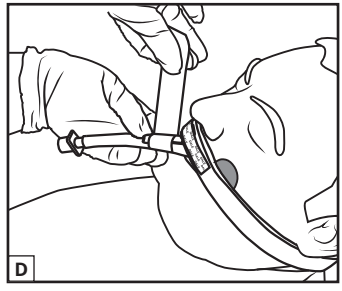

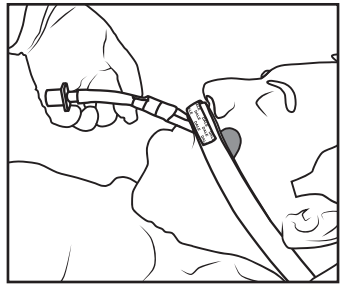

©Copyright 2025

942255 REV C

©Copyright 2025