REF 280

Dale® BreezeLock® Endotracheal Tube Holder



For Comfortable & Secure Stabilization

Dale®
Medical Products

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

(Croatian, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish, Thai, Turkish)

Dale®
Medical Products

BreezeLock®
Soporte de Tubo Endotraqueal

para tubos endotraqueales de 7,0-10,0 mm
Contenido: 1 de cada - banda para el cuello; 273 base adhesiva

Instrucciones de Aplicación

1. Limpie el tubo y déjelo secar.
2. Aplique la base adhesiva. **(A)** Siga las instrucciones del paquete del dispositivo 273.
3. Presione la correa para el cuello contra la porción de gancho de la base adhesiva asegurándose de que la GUÍA quede centrada sobre la boca del paciente. **(B)**
4. Abra las lengüetas de sujeción situadas a ambos extremos de la correa para el cuello y pase ésta alrededor de la cabeza, justo debajo de las orejas. Afiance las lengüetas de sujeción al exterior de la correa para el cuello.
5. Levante el RECUBRIMIENTO. Coloque el CANAL sobre el tubo ET. Presione el RECUBRIMIENTO sobe la GUÍA y la correa para el cuello para fijarlo en su posición. Verifique que el contacto con la banda para el cuello sea adecuado, que la guía azul del tubo esté totalmente cubierta, y que el canal de plástico esté centrado en sentido vertical.
6. Pasos para adherir el tubo al CANAL:
   - Con el tubo descansando libremente debajo del CANAL, pase alrededor del tubo una vuelta de una tira de 20 cm de cinta adhesiva fuerte. **(C)**
   - Presione el CANAL DEL TUBO sobre el tubo.
   - Con un movimiento en espiral hacia adelante, envuelva firmemente con cinta el tubo y el CANAL a al menos 2,5 cm de distancia del paciente **(D)**. Envuelva el tubo con al menos 3 vueltas de cinta.
7. Reajuste las lengüetas de sujeción para cerciorarse de que la correa para cuello esté bien firme.

- Cambie la cinta adhesiva del CANAL según sea necesario.
- Cambie el dispositivo al cabo de 72 horas o antes si fuera necesario.
- Para prevenir úlceras o laceraciones cutáneas, evalúe la piel y las afecciones médicas del paciente antes de aplicar el producto. Inspeccione por lo menos una vez por día.

Cambio de Posición del Tubo

Mientras sostiene el CANAL envuelto en cinta en una mano, levante el RECUBRIMIENTO de la GUÍA. Deslice el CANAL para mover el tubo a la posición deseada. Presione el RECUBRIMIENTO sobre la GUÍA y la correa para el cuello para afianzar el tubo en su lugar. Verifique que el contacto con la banda para el cuello sea adecuado, que la guía azul del tubo esté totalmente cubierta, y que el canal de plástico esté centrado en sentido vertical.

Cómo Retirar

El dispositivo debe retirarse con cuidado para no lesionar la piel. Vuelva a preparar la piel si va a colocar otro dispositivo.

Dale **recomienda cambiar de posición el tubo endotraqueal a menudo** para prevenir lesiones que la presión continua podría causar a los labios y al tejido subyacente.

Dale **recomienda encarecidamente utilizar un soporte para el tubo del respirador** a fin de reducir la presión sobre la cara del paciente.

Para utilizar en un solo paciente. Desechable.

Para ver un vídeo sobre cómo utilizar el producto, visita www.dalemed.com


Fabricado sin látex de goma natural.


Patente www.dalemed.com/patents


Aviso para la usuaria o paciente: todo incidente grave que ocurra con este producto debe reportarse al fabricante y a la autoridad competente del estado miembro de residencia de la usuaria o paciente.


Dale y BreezeLock son marcas registradas de Dale Medical Products, Inc. en los EE.UU., la UE y el RU.


PHT NON-DEHP DEHP

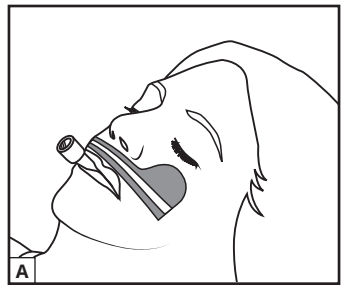

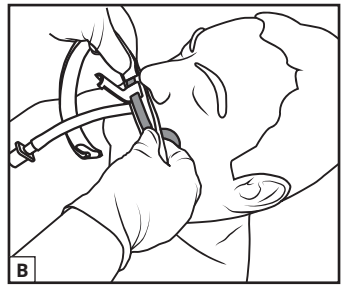

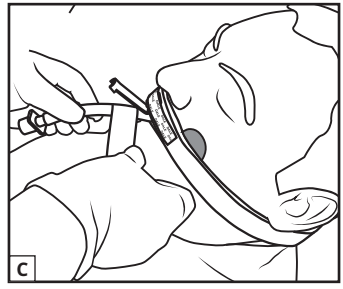

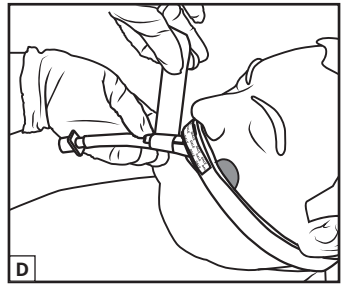

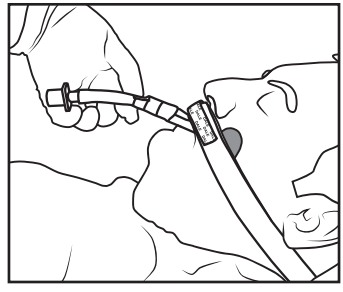

©Copyright 2025

942255 REV C

©Copyright 2025