REF 280

Dale® BreezeLock® Endotracheal Tube Holder



For Comfortable & Secure Stabilization

Dale®
Medical Products

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

(Croatian, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish, Thai, Turkish)

©Copyright 2025

Dale®
Medical Products

BreezeLock® Endotrakealtubhållare

passar till endotrakealtubstorlekar 7,0–10,0 mm
Innehåll: 1 st: nackband, 273 självhäftande bas

Appliceringsanvisningar

1. Rengör tuben. Låt den torka.

2. Applicera den självhäftande basen. **(A)** Följ anvisningarna på förpackningen till 273.

3. Tryck nackbandet mot den självhäftande basens kardborrematerial och se till att SPÅRET är centrerat ovanför patientens mun. **(B)**

4. Öppna fästflikarna vid nackbandets båda ändar och vira bandet runt huvudet omedelbart under öronen. Fäst fästflikarna på utsidan av nackbandet.

5. Lyft upp ÖVERLÄGGET. Positionera KANALEN över endotrakealtuben. Tryck fast ÖVERLÄGGET över SPÅRET och nackbandet så att det sitter säkert i rätt position. Säkerställ god kontakt med nackbandet, att det blå tubspåret är helt täckt och att plastkanalen är vertikalt centrerad.

6. Steg för att tejpa fast tuben i KANALEN:

- Med tuben vilande fritt under KANALEN, vira en 20 cm lång remsa av en stark tejp ett varv runt tuben. **(C)**
- Tryck ner TUBKANALEN på tuben.
- Vira tejpen stadigt runt tuben och KANALEN i en framåtriktad spiralrörelse, på minst 2,5 cm avstånd från patienten **(D)**. Se till att du virar den runt tuben minst 3 varv.

7. Säkerställ att nackbandet sitter säkert genom att justera fästflikarna efter behov.

- Byt ut tejpen på KANALEN efter behov.
- Byt ut produkten efter 72 timmar eller oftare om nödvändigt.
- Bedöm patientens hud och medicinska tillstånd före applicering, så att hudsår eller hudrifter undviks. Övervaka området en gång per dag eller oftare.

Omplacering av Tuben

Håll den tejpade KANALEN med ena handen och lyft upp ÖVERLÄGGET från SPÅRET. Dra KANALEN för att flytta tuben till önskad plats. Tryck ned ÖVERLÄGGET igen över SPÅRET och nackbandet så att tuben säkras i rätt position. Säkerställ god kontakt med nackbandet, att det blå tubspåret är helt täckt och att plastkanalen är vertikalt centrerad.

Borttagning

Produkten ska tas av försiktigt så att huden inte skadas. Applicera hudrengöringsmedel på nytt om en annan enhet ska appliceras.

Dale **rekommenderar att endotrakealtuben placeras om ofta** för att förhindra skada på läpparna och underliggande vävnader orsakad av det konstanta trycket.

Dale **rekommenderar starkt att ventilatorslangen stöttas** så att trycket på patientens ansikte minskas.

För användning till en enstaka patient. Engångsprodukt.

För att se en appliceringsvideo, gå till www.dalemed.com


Ej tillverkad med naturgummilatex.


Patent www.dalemed.com/patents


Meddelande till användaren och/eller patienten: Varje allvarlig incident som har inträffat i samband med denna produkt ska rapporteras till tillverkaren och till behörig myndighet i det medlemsland där användaren och/eller patienten är etablerad.


Dale & BreezeLock är registrerade varumärken som tillhör Dale Medical Products, Inc. i USA, EU och Storbritannien.


PHT NON-DEHP DEHP

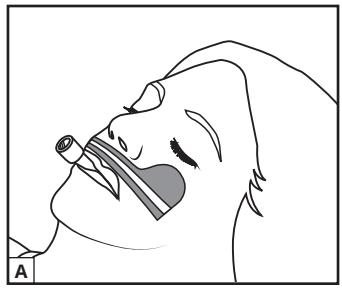

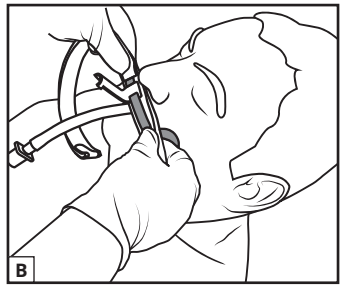

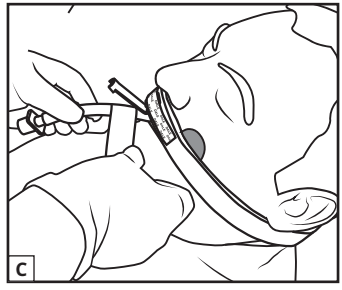

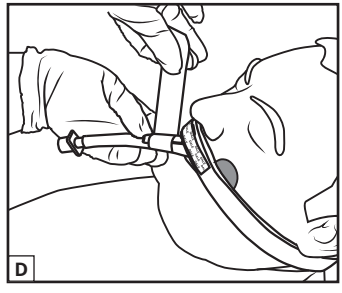

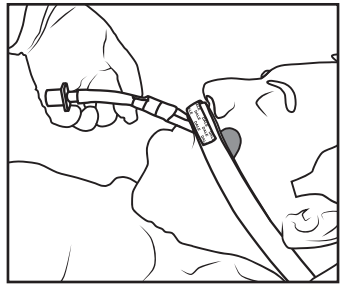

942255 REV C

©Copyright 2025