

Dale
Medical Products

Hold-n-Place®
Holder til Foley-kateterslange


Påsætning af Benbåndet

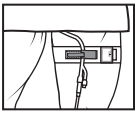


1. Placer benbåndet under og højt omkring patientens lår med Dale-produktmærket pegende mod indersiden af benet. Stræk benbåndet lige meget fra begge sider, og fastgør krogfanen. Korrekt kompression er opnået, når to fingre sidder tæt under båndet.

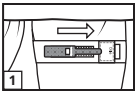


2. Læg Foley-kateteret over de hvide sting på den grønne strop. Sørg for, at der er en tilstrækkeligt stor løkke på kateteret for at undgå traktion af blæren. Kateteret kan også strammes mhp. traktion efter behov.

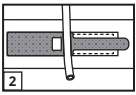


3. Når kateteret er i den ønskede position, føres den smalle, grønne strop over kateteret og gennem den firkantede åbning, så de grønne stropper lapper over hinanden.

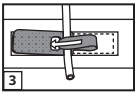

4. Lås kateteret fast ved at trække de grønne stropper i hver sin retning. Fastgør stropperne. Hvis kateteret skal omplaceres: Løft en af de grønne stropper, juster kateterets placering, og fastgør stroppen igen.

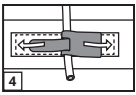

5. En anden måde at fastgøre kateteret på er at sætte Y-porten i kateterets proksimale ende fast i låsemekanismen.

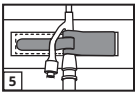

Påsætning af Taljebåndet

1. Læg taljebåndet rundt om maven, over såret, for at fastgøre kateteret. Barbering er ikke nødvendig. Den grønne kateterlåsestrop skal være centreret over drænstedet. Når båndet er anbragt korrekt, fastgøres låsestroppen på taljebåndet.
2. Læg kateteret over de hvide sting på den grønne strop.
3. Gentag trin 3, 4 og 5 ovenfor.

Ekstra Fordele

Benbåndet kan drejes i begge retninger for at undgå irritation af meatus. Patientkomforten kan også forbedres, hvis der skiftes ben jævnligt.

Til brug til en enkelt patient. Til engangsbrug.

Der ligger en video, der viser anbringelsen, på www.dalemed.com

Medicinske produkter fra Dale kan fås hos forhandlere af hospitalsudstyr/medicinsk udstyr.

Fremstillet uden naturgummilatex.

Dale & Hold-n-Place er registrerede varemærker tilhørende Dale Medical Products, Inc. i USA, EU og Storbritannien.

PHT NON-DEHP DEHP

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942171 REV D

©Copyright 2024