
Dale
Medical Products


Hold-n-Place®
Houder voor katheterbuis

Beenband Aanbrengen


1. Plaats de beenband onder en hoog om de dij van de patiënt met het label van Dale-product naar de binnenkant van het been gericht. Trek de band vanaf beide zijden gelijkmatig op zijn plaats en maak het haaklipje vast. De juiste compressie is bereikt wanneer twee vingers goed onder de band passen.

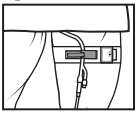


2. Plaats de Foley-katheter boven het witte stiksel van het groene lipje. Laat een ruime lus in de katheter boven de beenband om tractie op de blaas te vermijden of span de katheter aan als tractie vereist is.

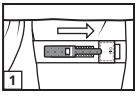


3. Als de katheter naar wens is geplaatst, brengt u het smalle groene lipje over de katheter heen en steekt u het door de vierkante opening zodat de groene lipjes elkaar overlappen.

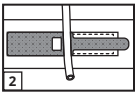


4. Zet de katheter vast door de groene lipjes in tegengestelde richting te trekken. Maak de lipjes vast. Om de katheter opnieuw te positioneren, brengt u een van de groene lipjes omhoog, stelt u de katheter bij en maakt u het lipje opnieuw vast.

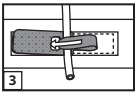

5. Een andere methode om de katheter vast te zetten bestaat erin de Y-poort van het proximale uiteinde van de katheter in het sluitsysteem te plaatsen.

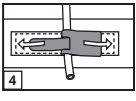

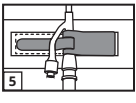

Tailleband Aanbrengen

1. Om de katheter vast te zetten, plaatst u de tailleband om de buik, boven de wondplaats. Scheren is niet nodig. Het groene sluitlipje voor de katheter moet boven het midden van de drainageplaats zijn geplaatst. Als de tailleband op zijn plaats zit, drukt u het sluitlipje op de tailleband.
2. Plaats de katheter boven het witte stiksel van het groene lipje.
3. Herhaal bovenstaande stappen 3, 4 en 5.

Aanvullende voordelen

Om irritatie van de meatus te helpen voorkomen, kan de beenband in beide richtingen worden gedraaid. Nu en dan van been wisselen zorgt ook voor meer comfort bij de patiënt.

Voor gebruik bij één patiënt. Disposable.

Een video over het gebruik van het product is te vinden op www.dalemed.com

De medische producten van Dale zijn verkrijgbaar bij uw voorkeursleverancier van ziekenhuis-/medische benodigdheden.

Niet vervaardigd met natuurrubberlatex.

Dale & Hold-n-Place zijn gedeponeerde handelsmerken van Dale Medical Products, Inc. in de VS, EU en VK.

PHT
NON-DEHP
DEHP

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942171 REV D

©Copyright 2024