
Dale®
Medical Products


Hold-n-Place®
Foley-katetrin Putken Pidike

Jalkahihnan Kiinnittäminen


1. Aseta jalkanauha potilaan reiden alle ja korkealle siten, että Dale-tuoteseloste osoittaa jalan sisäpuolelle. Venytä jalkanauha tasaisesti molemmilta puolilta paikalleen ja kiinnitä koukkuläppä. Oikea puristus on saavutettu, kun kaksi sormea mahtuu tiiviisti nauhan alle.

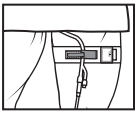


2. Aseta foley-katetri vihreän kielekkeen valkoisen sauman päälle. Jätä riittävä lenkki katetria jalkahihnan yläpuolelle, jotta katetri ei vedä rakkoa, tai venytä katetria tarvittaessa vedon saamiseksi.

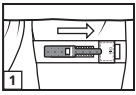


3. Kun katetri on halutulla paikalla, työnnä kapea vihreä kieleke katetrin yli ja neliskulmaisen aukon läpi niin, että vihreät kielekkeet tulevat päällekkäin.

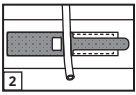


4. Lukitse katetri paikalleen vetämällä vihreistä kielekkeistä vastakkaisiin suuntiin. Kiinnitä kielekkeet paikoilleen. Katetrin siirtäminen: nosta jompaakumpaa vihreää kieleketä, säädä katetria ja kiinnitä kieleke uudelleen.

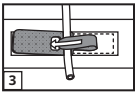

5. Kiinnitys voidaan tehdä myös asettamalla katetrin proksimaalipäässä oleva Y-portti lukitusvälineeseen..

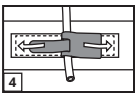

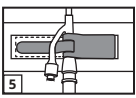

Vyötäröhihnan Kiinnittäminen

1. Kun haluat kiinnittää katetrin paikalleen, aseta vyötäröhihna alaruumiin ympäri haavakohdan yläpuolelle. Karvoitusta ei tarvitse poistaa. Katetrin vihreä lukituskieleke tulee keskittää dreneerauskohdan päälle. Kun vyötäröhihna on paikallaan, paina lukituskieleke hihnaan.
2. Aseta katetri vihreän kielekkeen valkoisen sauman päälle.
3. Toista yllä olevat vaiheet 3, 4 ja 5.

Lisäetuja

Ulkoaukon ärsytyksen estämiseksi jalkahihnaa voidaan kääntää kumpaan tahansa suuntaan. Myös kiinnitysjalan vaihtaminen ajoittain voi lisätä käyttömukavuutta.

Potilaskohtainen. Kertakäyttöinen.

Kiinnityksessä opastava video on katsottavissa osoitteessa www.dalemed.com.

Dalen lääketieteellisiä tuotteita on saatavana lääketieteellisten ja sairaalatarvikkeiden myyjiltä.

Ei ole valmistettu luonnonkumilateksista.

Dale & Hold-n-Place ovat Dale Medical Products, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa, EU:ssa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

PHT NON-DEHP DEHP

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942171 REV D
©Copyright 2024