
Dale®
Medical Products


Hold-n-Place®
Porte-tube pour Cathéter de Foley


Application de la Jambière

1. Positionner la bande de jambe sous et en hauteur autour de la cuisse du patient, l'étiquette du produit Dale étant orientée vers l'intérieur de la jambe. Etirer la bande de part et d'autre de la jambe et la mettre en place, puis attacher le crochet. La compression est correcte lorsque deux doigts s'insèrent parfaitement sous la bande.

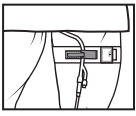


2. Placez le cathéter Foley sur la couture blanche de la languette verte. Laissez une boucle assez ample sur le cathéter au-dessus de la jambière pour éviter une traction de la vessie ; ou étirez le cathéter pour produire une traction le cas échéant.

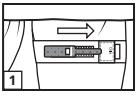


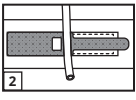


3. Avec le cathéter dans la position désirée, insérez la languette verte étroite sur le cathéter et à travers l'ouverture carrée, de façon à ce que les languettes vertes se chevauchent.

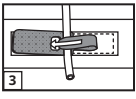

4. Bloquez le cathéter en position en tirant sur les languettes vertes dans des directions opposées. Assujettissez les languettes. Pour repositionner le cathéter, relevez l'une ou l'autre languette verte, repositionnez le cathéter et resserrez la languette.

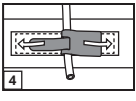

5. Une autre méthode de fixation consiste à placer le port en Y de l'extrémité proximale du cathéter dans le dispositif d'accrochage.

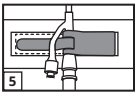

Application de la Ceinture

1. Pour maintenir le cathéter en place, positionnez la ceinture autour de l'abdomen, au-dessus du site de la blessure. Aucun rasage n'est nécessaire. La languette verte d'accrochage du cathéter doit être centrée au-dessus du site de drainage. Lorsque la bande a été positionnée, appuyez la languette d'accrochage contre la ceinture.
2. Placez le cathéter sur la couture blanche de la languette verte.
3. Répétez les étapes 3, 4 et 5 ci-dessus.

Avantages Supplémentaires

Pour réduire le risque d'irritation méatale, la jambière peut être pivotée dans n'importe quelle direction. Alterner périodiquement la jambe permettra également d'assurer plus de confort pour le patient.

Usage réservé à une seule patiente. Jetable après usage.

Pour une vidéo sur l'application, veuillez vous rendre sur le site www.dalemed.com

Les produits médicaux Dale sont disponibles auprès de votre négociant en fournitures hospitalières/médicales.

Ce produit n'est pas fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel.

Dale et Hold-n-Place sont des marques déposées de Dale Medical Products, Inc. aux États-Unis, dans l'Union européenne et au Royaume-Uni.

PHT NON-DEHP DEHP

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942171 REV D

©Copyright 2024