

Dale®
Medical Products

Hold-n-Place®
Halter für Foley-Katheter-Schlauch


Anwendung des Beinriemens

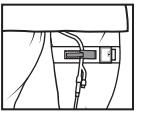


1. Legen Sie das Beinband unter und hoch um den Oberschenkel des Patienten, so dass das Dale-Produktetikett zur Innenseite des Beins zeigt. Ziehen Sie das Beinband von beiden Seiten gleichmäßig an und schließen Sie die Hakenlasche. Die richtige Kompression ist erreicht, wenn zwei Finger eng unter das Band passen.

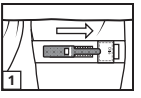


2. Foley-Katheter über die weiße Naht der grünen Lasche legen. Katheter über dem Beinriemen in eine Schlaufe legen, um eine Zugbelastung der Blase zu verhindern. Alternativ kann der Katheter bei Bedarf auch angezogen werden.

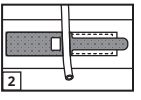


3. Wenn sich der Katheter in der gewünschten Position befindet, die schmale grüne Lasche über den Katheter durch die viereckige Öffnung schieben, sodass die grüne Lasche sich überlappt.

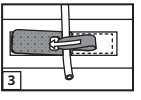

4. Katheter durch Ziehen der grünen Laschen in entgegengesetzte Richtung in Position sichern. Laschen andrücken. Zur Repositionierung des Katheters eine der grünen Laschen anheben, Katheter justieren und Lasche wieder anbringen.

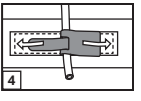

5. Der Y-Anschluss des proximalen Katheterendes kann zur Befestigung auch in die Sicherungsvorrichtung eingebracht werden.

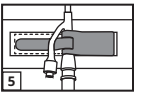

Anwendung des Hüftriemens

1. Hüftriemen über dem Situs um den Bauch legen, um den Katheter in Position zu bringen. Die Stelle muss nicht rasiert werden. Die grüne Kathetersicherungslasche sollte mittig über der Drainagestelle ausgerichtet werden. Wenn das Band in Position gebracht ist, die Sicherungslasche auf das Hüftband drücken.
2. Katheter über die weiße Naht der grünen Lasche legen.
3. Schritte 3, 4 und 5 oben wiederholen.

Zusätzliche Vorteile

Der Beinriemen kann in beide Richtungen gedreht werden, um eine Meatusreizung zu verhindern. Der Beinriemen kann abwechselnd an einem und dann wieder an dem anderen Bein angebracht werden, um den Tragekomfort zu erhöhen.

Nur für den Gebrauch an einem Patienten bestimmt. Einwegprodukt.

Ein Video der Anwendung finden Sie unter www.dalemed.com

Medizinische Produkte von Dale erhalten Sie von Ihrem bevorzugten Lieferanten für Krankenhausbedarf und medizinische Produkte.

Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt.

Dale und Hold-n-Place sind eingetragene Marken von Dale Medical Products, Inc. in den USA, der EU und Großbritannien.

PHT NON-DEHP DEHP

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942171 REV D

©Copyright 2024