

Dale
Medical Products

Hold-n-Place®
Σωλήνας καθετήρα Foley Holder


Εφαρμογή του ιμάντα ποδιού

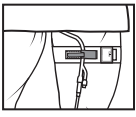


1. Τοποθετήστε τη ζώνη ποδιών κάτω και ψηλά γύρω από το μηρό του ασθενούς με την ετικέτα προϊόντος Dale προς το εσωτερικό του ποδιού. Τεντώστε τη ζώνη ποδιού εξίσου και από τις δύο πλευρές στη θέση της και στερεώστε το γάντζο. Η σωστή συμπίεση έχει επιτευχθεί όταν δύο δάχτυλα χωράνε άνετα κάτω από τη ζώνη.

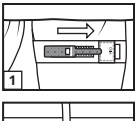


2. Τοποθετήστε τον καθετήρα Foley πάνω από τη λευκή ραφή της πράσινης ταινίας. Αφήστε αρκετά χαλαρό τον καθετήρα πάνω από τον ιμάντα ποδιού για να αποφευχθεί η έλξη στην κύστη ή τεντώστε τον καθετήρα όταν απαιτείται να ασκείται έλξη.

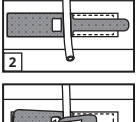


3. Με τον καθετήρα στην επιθυμητή θέση, περάστε τη στενή πράσινη ταινία πάνω από τον καθετήρα και μέσα από το τετράγωνο άνοιγμα, ώστε οι πράσινες ταινίες να αλληλοεπικαλύπτονται.

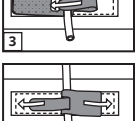

4. Στερεώστε τον καθετήρα στη θέση του τραβώντας τις πράσινες ταινίες προς αντίθετες κατευθύνσεις. Στερεώστε τις ταινίες στη θέση τους. Για να αλλάξετε τη θέση του καθετήρα: ανασηκώστε μία από τις πράσινες ταινίες, προσαρμόστε τη θέση του καθετήρα και ξανακλείστε την ταινία.

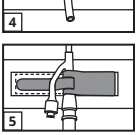

5. Μια άλλη μέθοδος στερέωσης είναι να τοποθετήσετε τη θύρα Y που βρίσκεται στο εγγύς άκρο του καθετήρα μέσα στη συσκευή ασφάλισης.

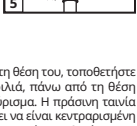

Εφαρμογή ζώνης μέσης

1. Για να στερεώσετε τον καθετήρα στη θέση του, τοποθετήστε τη ζώνη μέσης γύρω από την κοιλιά, πάνω από τη θέση του τραύματος. Δεν απαιτείται ξύρισμα. Η πράσινη ταινία στερέωσης του καθετήρα θα πρέπει να είναι κεντραρισμένη πάνω από τη θέση παροχέτευσης. Αφού τοποθετήσετε τη ζώνη, πιέστε την ταινία στερέωσης πάνω στη ζώνη μέσης.
2. Τοποθετήστε τον καθετήρα πάνω από τη λευκή ραφή της πράσινης ταινίας.
3. Επαναλάβατε τα παραπάνω βήματα 3, 4 και 5.

Πρόσθετα οφέλη

Για να αποφευχθεί ο ερεθισμός του στομίου, ο ιμάντας ποδιού μπορεί να περιστραφεί και προς τις δύο κατευθύνσεις. Η περιοδική τοποθέτηση του ιμάντα στο άλλο πόδι αυξάνει την άνεση του ασθενή.

Για χρήση σε έναν μόνο ασθενή. Αναλώσιμο

Βίντεο επίδειξης της τεχνικής εφαρμογής θα βρείτε στον ιστότοπο www.dalemed.com

Τα ιατρικά προϊόντα της Dale διατίθενται από τους αντιπροσώπους νοσοκομειακών/ιατρικών προϊόντων με τους οποίους συνεργάζεστε.

Δεν κατασκευάζεται από φυσικό λατέξ.

Τα Dale & Hold-n-Place είναι σήματα κατατεθέντα της Dale Medical Products, Inc. στις ΗΠΑ, την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

PHT NON-DEHP DEHP

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942171 REV D
©Copyright 2024