
Dale
Medical Products


Hold-n-Place®
Foley Katéter Csőtartó

Lábszalag Alkalmazása


1. Helyezze a lábszalagot a beteg combja alá és magasan köré úgy, hogy a Dale termékcímke a láb belső oldalára mutasson. Nyújtsa a lábszalagot mindkét oldalról egyformán a helyére, és rögzítse a kampós fület. A megfelelő kompresszió akkor érhető el, ha két ujj szorosan befér a pánt alá.

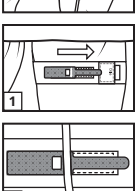


2. Helyezze a Foley-katétert a zöld fül fehér varrata fölé. Elegendő nagyságú hurkot hagyjon a katéterben a lábszalag fölött ahhoz, hogy elkerülje a hólyagra gyakorolt húzást, illetve ha húzásra van szükség, akkor feszítse meg a katétert.

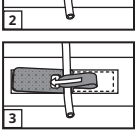


3. Amikor a katéter a kívánt helyzetben van, vezesse át a keskeny, zöld fület a katéter fölött a négyzet alakú nyíláson úgy, hogy a zöld fülek fedjék egymást.

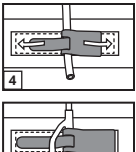


4. A zöld fülek egymással ellentétes irányba való húzásával rögzítse a helyén a katétert. Rögzítse a helyükre a füleket. A katéter újrapozicionálása: emelje fel valamelyik zöld fület, igazítsa meg a katétert, majd ismét rögzítse a fület.

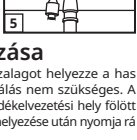

5. A rögzítés másik módja, hogy a katéter proximális végének Y-csatlakozását a zárószerkezetbe helyezi.

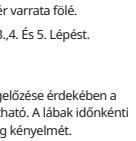

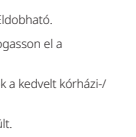

Övszalag Alkalmazása

1. A katéter rögzítéséhez az övszalagot helyezze a has köré, a sebhely fölött. Borotválás nem szükséges. A zöld katéterrögzítő fület a folyadékelvezetési hely fölött középre kell helyezni. A szalag elhelyezése után nyomja rá a rögzítőfület az övszalagra.
2. Helyezze a katétert a zöld fül fehér varrata fölé.
3. Ismételje meg a fentiekben leírt 3.,4. És 5. Lépést.

További Előnyök

A bevezetési pont irritációjának megelőzése érdekében a lábszalag mindkét irányban elforgatható. A lábak időnkénti változtatása szintén növelheti a beteg kényelmét.

Egyetlen betegen való alkalmazásra. Eldobható.

Az alkalmazást bemutató videóért látogasson el a www.dalemed.com webhelyre.

A Dale gyógyászati termékek elérhetők a kedvelt kórházi-/gyógyászatieszköz-forgalmazójától.

Nem természetes latex gumiból készült.

A Dale & Hold-n-Place a Dale Medical Products, Inc. bejegyzett védjegyei az USA-ban, az EU-ban és az Egyesült Királyságban.

PHT NON-DEHP DEHP

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942171 REV D

©Copyright 2024