
Dale
Medical Products


Hold-n-Place®
フォーリーカテーテルチューブホルダー


脚用バンドの装着方法

1. レッグバンドを患者の大腿部の下と高い位置に置き、デールの製品ラベルを脚の内側に向けます。レッグバンドを両側から均等に所定の位置に伸ばし、フックタブを留めます。指2本がレッグバンドの下にぴったりとはまると、適切な圧迫が達成されたことになります。

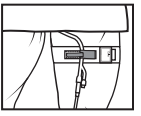


2. フォーリー　カテーテルを緑色タブの白い縫い目に合わせます。脚用バンドの上のカテーテルのループには十分ゆとりを持たせプラダーを引っ張らないようにします。引っ張る必要のある時はカテーテルを引き伸ばします。

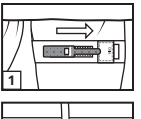


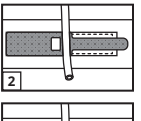


3. カテーテルが必要な位置に来たら、幅の狭い緑色タブをカテーテルの上に挿入し、四角い開口部を通して緑色タブが重なるようにします。

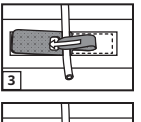

4. 両方の緑色タブを反対方向にひいてタブをしっかり留めます。カテーテルの位置を変えるには、緑色タブの一つを持ち上げ、カテーテルを調整してからタブを留め直します。

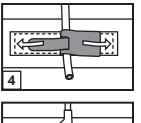

5. カテーテルの近接している方の端のYポートを固定装置に入れる固定方法もあります。

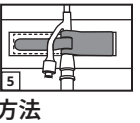

腰用ホルダーの装着方法

1. カテーテルを固定するには腰用バンドを傷害部より上の腹部に巻きます。体毛を剃る必要はありません。緑色カテーテル固定タブは排液部上中央に来るようにします。バンドの位置決め後、固定タブを腰用バンドに押し付けます。

2. カテーテルを緑色タブの白い縫い目に合わせます。

3. 上記の第 3、4、5 ステップを繰り返します。

その他の特長

開口部の炎症を避けるため、脚用バンドはどちらの方向にも回転させることができます。定期的にバンドを装着する脚を変えると患者さんも楽でしょう。

一人の患者のみに使用。使い捨て用。

取扱説明ビデオは、www.dalemed.comでご覧になれます。

Dale医療用品は優先病院・医療用品ディーラーよりお求めください。

天然ゴムラテックスは含まれていません。

DaleおよびHold-n-Placeは、米国、EUおよび英国におけるDale Medical Products, Inc.の登録商標です。

PHT NON-DEHP DEHP

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle・Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942171 REV D
©Copyright 2024