

Dale
Medical Products

Hold-n-Place®
폴리 카테터 튜브 홀더


다리 밴드 착용 방법

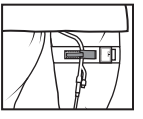


1. 다리 밴드가 환자의 허벅지 안쪽을 향하도록 하여 다리 안쪽을 향하도록 다리 밴드를 환자의 허벅지 안쪽과 높게 배치합니다. 다리 밴드를 양쪽에서 똑같이 늘려 제자리에 고정하고 후크 탭을 고정합니다. 두 손가락이 밴드 아래에 꼭 맞으면 적절한 압박이 이루어진 것입니다.

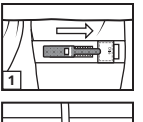


2. 폴리 카테터를 녹색 탭의 백색 바늘땀 줄 위에 두십시오. 방광 당김을 방지하기 위해, 또는 필요 시 카테터를 잡아 늘려서 당기기 위해 다리 밴드 위에 충분한 크기의 카테터 고리를 놓아두십시오.

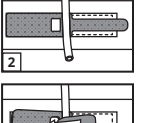


3. 카테터를 원하는 위치에 두고, 좁은 녹색 탭을 카테터 위로 사각 구멍을 통해 삽입하여 녹색 탭들이 겹쳐지게 하십시오.

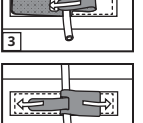

4. 녹색 탭들을 반대 방향으로 잡아당겨서 카테터가 제자리에 잡기게 하십시오. 탭들을 제자리에 고정시키십시오. 카테터 위치 조정법: 녹색 탭들 중 하나를 올려서, 카테터를 조절한 다음 탭을 다시 고정시키십시오.

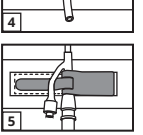

5. 또 하나의 고정 방법은 카테터의 근위단의 Y 포트를 잠금 장치 안에 두는 것입니다.

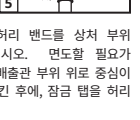

허리 밴드 착용 방법

1. 카테터를 제자리에 고정하려면, 허리 밴드를 상처 부위 위에서, 복부 둘레에 위치시키십시오. 면도할 필요가 없습니다. 녹색 카테터 잠금 탭은 배출관 부위 위로 중심이 맞추어져야 합니다. 밴드를 위치시킨 후에, 잠금 탭을 허리 밴드 쪽으로 누르십시오.

2. 카테터를 녹색 탭의 백색 바늘땀 줄 위에 두십시오.

3. 위의 3, 4 및 5단계를 반복하십시오.

추가 이점

관입구 자극을 방지하는 데 도움이 되도록, 다리 밴드는 어느 방향으로도 회전시킬 수 있습니다. 다리를 주기적으로 번갈아 바꾸어 주는 것도 환자를 더 편안하게 하는 데 보탬이 될 수 있습니다.

단일 환자용. 1회용

도포 시연 영상을 보시려면, www.dalemed.com을 방문하십시오.

Dale 의료 제품들은 이용하시는 병원/의료용품 공급상으로부터 구입하실 수 있습니다.

천연 고무 라텍스로 제조되지 않음.

Dale 및 Hold-n-Place는 미국, EU 및 영국에서 Dale Medical Products, Inc.의 등록 상표입니다.

PHT
NON-DEHP
DEHP

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, 미국
전화: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942171 REV D
©Copyright 2024