

Dale®
Medical Products

Hold-n-Place®
Holder for Foley-kateterslange


Sette på Benstroppen

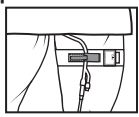


1. Plasser benbåndet under og høyt rundt pasientens lår med Dale-produktetiketten pekende mot innsiden av benet. Strekk benbåndet jevnt fra begge sider og fest haken. Riktig kompresjon er oppnådd når to fingre får plass under båndet.

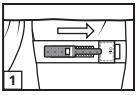


2. Plasser foleykateteret over den hvite sømmen på den grønne fliken. La det være en god sløyfe i kateteret ovenfor benstroppen for å unngå strekk i urinblæren, eller strekk kateteret hvis det er nødvendig.

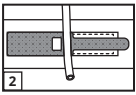


3. Når kateteret sitter i riktig posisjon, stikker du den smale, grønne fliken over kateteret og gjennom den firkantede åpningen, slik at den grønne fliken overlapper.

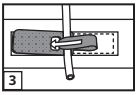

4. Lås kateteret på plass ved å dra de grønne flikene i hver sin retning. Fest flikene. Hvis du må omposisjonere kateteret, løfter du opp en av de grønne flikene, justerer kateteret og fester fliken igjen.

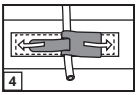

5. En annen metode å sikre kateteret på, er å plassere Y-porten i den proksimale enden av kateteret i låseenheten.

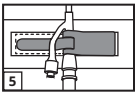

Sette på Magebåndet

1. Sikre kateteret ved å legge magebåndet rundt magen, ovenfor sårstedet. Det er ikke nødvendig å barbere. Den grønne låsefliken til kateteret skal være midtstilt over dreneringsstedet. Etter at magebåndet er satt på, skal du trykke låsefliken inn på magebåndet.
2. Plasser kateteret over den hvite sømmen på den grønne fliken.
3. Gjenta trinn 3, 4 og 5 ovenfor.

Flere Fordeler

Benstroppen kan vris i begge retninger, for å unngå meatusirritasjon. Det kan også være mer bekvemt for pasienten om bruken av høyre og venstre ben byttes på med jevne mellomrom.

Bare til bruk på én pasient. Til engangsbruk

Du finner en video om påsetting på www.dalemed.com

Medisinske produkter fra Dale fås hos forhandlere av sykehusutstyr / medisinske produkter.

Produsert uten lateks av naturgummi.

Dale & Hold-n-Place er registrerte varemerker for Dale Medical Products, Inc. i USA, EU og Storbritannia.

PHT NON-DEHP DEHP

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942171 REV D
©Copyright 2024