

Dale
Medical Products

Hold-n-Place®
Hållare för rör till Foley-kateter


Applicering av Benbandet

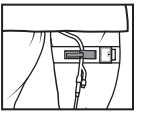


1. Placera benbandet under och högt runt patientens lår med Dale-produktmärkningen pekande mot insidan av benet. Sträck benbandet jämnt från båda sidor på plats och fäst hakfliken. Korrekt kompression har uppnåtts när två fingrar sitter tätt under bandet.

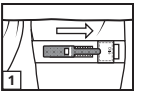


2. Placera Foleykatetern över den gröna flikens vita stickning. Placera katetern i en vid slynga ovanför benbandet så att den inte drar i blåsan, eller sträck katetern för dragning när så krävs.

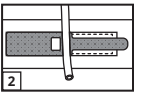

3. När katetern är i önskat läge, för in den smala, gröna fliken över katetern och genom den fyrkantiga öppningen så att de gröna flikarna överlappar.

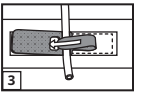


4. Lås katetern i läge genom att dra de gröna flikarna åt motsatta håll. Fäst flikarna stadigt på plats. För att flytta om katetern: dra upp en av de gröna flikarna, justera katetern och sätt fast fliken igen.

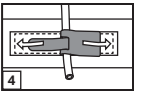

5. En annan fästmetod är att placera Y-porten i kateterns proximala ände i låsanordningen.

Applicering av Midjebandet

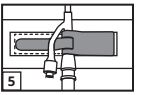

1. För att sätta fast katetern på plats, placera midjebandet runt magen, ovanför sårområdet. Rakning är inte nödvändigt. Den gröna kateterlåsningsfliken ska centreras över dräneringsstället. Tryck fast låsfliken på midjebandet efter att bandet placerats i läge.
2. Placera katetern över den gröna flikens vita stickning.
3. Upprepa stegen 3,4 och 5 ovan.

Ytterligare Fördelar

För att förhindra irritation av meatus kan benbandet vridas i valfri riktning. Patientens komfort kan också ökas genom att man regelbundet skiftar ben.

För användning till en enstaka patient. Engångsprodukt

För att se en appliceringsvideo, gå till www.dalemed.com

Dale medicinska produkter fås från er försäljare av sjukhus-/medicinska produkter.

Ej tillverkad med naturgummilatex.

Dale & Hold-n-Place är registrerade varumärken som tillhör Dale Medical Products, Inc. i USA, EU och Storbritannien

PHT
NON-DEHP
DEHP

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942171 REV D
©Copyright 2024