
Dale
Medical Products


Hold-n-Place®
ที่วางท่อ Foley Catheter

วิธีการใช้แถบรัดขา


1. วางสายรัดขาไว้ใต้และสูงรอบต้นขาของผู้ป่วยโดยให้ฉลากผลิตภัณฑ์เดลตี้ไปที่ด้านในของขา ยึดสายรัดขาทั้งสองข้างเท่าๆ กัน เข้าที่แล้วติดแถบตะขอ การบีบอัดอย่างเหมาะสมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสองนิ้วแนบชิดใต้สายรัดพอดี

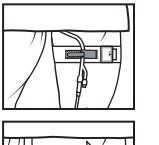


2. วางสายสวนปัสสาวะ Foley ทับบนรอยเย็บสีขาวของแถบล็อคสีเขียว ปล่อยให้สายสวนปัสสาวะมีวงความยาวเพียงพอเหนือแถบรัดขาเพื่อหลีกเลี่ยงการดึงกระเพาะปัสสาวะหรือดึงสายสวนปัสสาวะเมื่อต้องการ

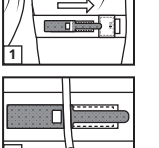


3. เมื่อสายสวนปัสสาวะอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการแล้ว ให้วางปลายแถบเล็กสีเขียวลงบนสายสวนปัสสาวะ แล้วเสียบเข้าไปในช่องว่างสี่เหลี่ยมจนแถบสีเขียวทับซ้อนกัน

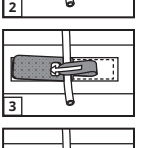


4. ล็อคสายสวนปัสสาวะให้เข้าที่โดยดึงปลายสีเขียวทั้งสองข้างไปคนละทาง ติดปลายให้เข้าที่ การจัดวางตำแหน่งสายสวนปัสสาวะใหม่: ดึงปลายสีเขียวข้างใดข้างหนึ่งขึ้น ขยับสายสวนปัสสาวะแล้วติดปลายสีเขียวให้เข้าที่ใหม่

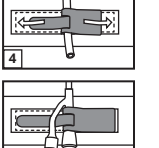

5. วิธีล็อคสายสวนปัสสาวะให้เข้าที่อีกวิธีหนึ่งคือ การวางปลายด้านในรูปตัว Y ให้ใกล้กับปลายของสายสวนปัสสาวะเข้าในอุปกรณ์การล็อค

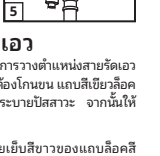

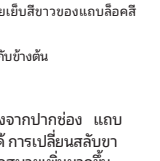

วิธีการใช้ชนิดแถบรัดเอว

1. จัดวางสายสวนปัสสาวะให้เข้าที่ โดยการวางตำแหน่งสายรัดเอวรอบ ๆ ท้องเหนือรอยแผล ไม่จำเป็นต้องโกนขน แถบสีเขียวล็อคสายสวนปัสสาวะควรอยู่เหนือบริเวณระบายปัสสาวะ จากนั้นให้ยึดแถบล็อคเข้ากับแถบรัดเอว
2. วางสายสวนปัสสาวะทับบริเวณรอยเย็บสีขาวของแถบล็อคสีเขียว
3. ทำขั้นตอนที่ 3,4 และ 5 ซ้ำให้เหมือนกับข้างต้น

ผลประโยชน์เพิ่มเติม

เพื่อช่วยป้องกันอาการระคายเคืองจากปากช่อง แถบรัดขาสามารถสับเปลี่ยนทิศทางได้ การเปลี่ยนสลับขาเป็นระยะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายเพิ่มมากขึ้น.

สำหรับผู้ป่วยใช้ครั้งเดียว ใช้แล้วทิ้ง

สำหรับวิดีโอแสดงวิธีการใช้ กรุณาไปที่ www.dalemed.com

ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของ Dale มีบริการจากโรงพยาบาล/ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ท่านชื่นชอบ

ไม่ได้ทำจากยางลาเท็กซ์ธรรมชาติ

Dale & Hold-n-Place เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Dale Medical Products, Inc. ในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร

PHT NON-DEHP DEHP

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
โทรศัพท์: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

©Copyright 2024