

Dale
Medical Products

Hold-n-Place®
Foley Kateter Tüp Tutucu


Bacak Bandı Uygulaması

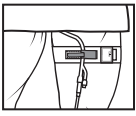


1. Bacak bandını, Dale ürün etiketi bacağın iç tarafını gösterecek şekilde hastanın uyluğunun altına ve üstüne yerleştirin. Bacak bandını her iki taraftan eşit şekilde gererek yerine oturtun ve kanca tırnağını sabitleyin. İki parmak bandın altına rahatça oturduğunda uygun sıkıştırma sağlanmıştır.

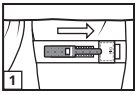


2. Foley kateteri yeşil şeridin beyaz dikişi üzerine yerleştirin. Mesanenin traksiyonunu önlemek için bacak bandı üzerinde kateterde bol bir halka bırakın; veya traksiyon gerektiğinde kateteri gerin.

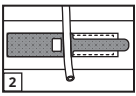


3. Kateter istenen konumdayken dar, yeşil şeridi yeşil şerit üst üste binecek şekilde kateterden ve kare şekilli delikten geçirin.

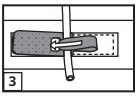

4. Yeşil şeritleri karşı yönlerde çekerek kateteri yerine kilitleyin. Şeritleri sabitleyin. Kateteri yeniden konumlandırmak için: yeşil şeritlerden birini kaldırın, kateteri ayarlayın ve şeridi yeniden tutturun.

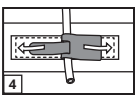

5. Bir diğer sabitleme yöntemi, kateterin proksimal ucunun Y portunu kilitleme cihazına yerleştirmektir.

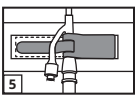

Bel Bandı Uygulaması

1. Kateteri yerine sabitlemek için bel bandını karın etrafında, yara bölgesinin üzerinde konumlandırın. Tıraş etmek gerekmez. Yeşil renkli kateter kilitleme şeridi, drenaj bölgesinin üzerinde ortalanmalıdır. Bant konumlandırıldıktan sonra kilitleme şeridini bel bandı üzerine bastırın..
2. Kateteri yeşil şeridin beyaz dikişi üzerine yerleştirin..
3. Yukarıdaki 3, 4 ve 5. adımları tekrarlayın.

Ek Faydalar

Bacak bandı meatus tahrişini önlemek üzere her iki yönde de döndürülebilir. Bacakların düzenli aralıklarla değiştirilmesi de hastanın rahatlığını artırabilir.

Tek hastada kullanılmak üzeredir. Tek kullanımlıktır

Uygulama videosu için lütfen www.dalemed.com web sitesine gidiniz.

Dale tıbbi ürünleri tercih ettiğiniz hastane/tıbbi malzeme tedarikçilerinden sağlanabilir.

Doğal kauçuk lateksten üretilmemiştir.

Dale & Hold-n-Place, Dale Medical Products, Inc. şirketinin ABD, AB ve İngiltere'deki tescilli ticari markalarıdır.

PHT NON-DEHP DEHP

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942171 REV D
©Copyright 2024