Abdominalni Steznik Dale
s Ekskluzivnim Rastezljivim Materijalom

Abdominalni steznik Dale pridržava trbušne mišiće, stimulira ponovno jačanja mišića i pritom ne ograničava pokretljivost.

Steznik je u potpunosti napravljen od Daleovog ekskluzivnog rastezljivog materijala koji se može pričvrstiti ljepljivom trakom na bilo kojem mjestu za preciznije postavljanje i veću ugodnost. Ravnomjerno raspoređen pritisak ne ometa kašljanje i omogućava duboko disanje. Bolesnici se mogu ugodnije kretati, čime se smanjuju komplikacije zbog slabe pokretljivosti poput atelektaze, upale pluća i flebitisa.

Upute za Uporabu

Abdominalni steznik Dale podržava mišiće i ugodan je za nošenje nakon zahvata kao što su:

- Carski rez
- Histerektomija
- Liposukcija
- Gastroplastika
- Abdominoplastika
- Porod
- Abdominalna ostomija / stoma

Najvažnija Svojstva

- **Ne sadrži prirodni gumeni lateks.** Eliminira moguće probleme zbog preosjetljivosti bolesnika ili pružatelja skrbi na lateks.
- **Inovativna prošivenost.** Prošivenost materijala bez ikakvih otvora bolesnicima osigurava ugodno nošenje steznika.
- **Ravnomjerno raspoređen pritisak.** Daleov ekskluzivni rastezljivi materijal ravnomjerno raspoređuje pritisak na tijelo i pritom se ne povlači prema gore, rubovi se ne savijaju i pretjerano ne stišće.
- **Trajanje proizvoda.** Proizvod se može više puta postavljati i skidati. Mogu se pojaviti mucice, no to zapravo odražava veću steznu snagu.
- **Pričvršćivanje ljepljivom trakom.** Steznik se jednostavno otvara i pričvršćuje kod pregleda zavoja ili rane. Precizno se postavlja pričvršćivanjem na bilo kojem mjestu njegova obujma.
- **Traka za lako pričvršćivanje EasyGrip.** Na mjestu drži do četiri drenažne vrećice s vanjske strane abdominalnog steznika.
- **Mogu se urezati rupice** za otvore nakon operacije kreiranja ostomije, kao i za drenažne cjevčice i cjevčice za hranjenje.

Podatci za Narudžbu

Abdominalni steznik Dale može se naručiti od dobavljača bolničkog/medicinskog materijala. Svako pakiranje sadrži jedan steznik.

Za točnu veličinu potrebno je izmjeriti raspon kukova kod žena te obujam struka kod muškaraca.

525	2 segmenta širine	6 inča (15 cm) s rasponom rastezljivosti 28-50 inča / 72-127 cm*****
410	3 segmenta širine	9 inča (23 cm) s rasponom rastezljivosti 30-45 inča / 76-114 cm
411	3 segmenta širine	9 inča (23 cm) s rasponom rastezljivosti 46-62 inča / 117-157 cm
418	3 segmenta širine	9 inča (23 cm) s rasponom rastezljivosti 60-75 inča / 152-191 cm
810	4 segmenta širine	12 inča (30 cm) s rasponom rastezljivosti 30-45 inča / 76-114 cm
811	4 segmenta širine	12 inča (30 cm) s rasponom rastezljivosti 46-62 inča / 117-157 cm
818	4 segmenta širine	12 inča (30 cm) s rasponom rastezljivosti 60-75 inča / 152-191 cm
820	4 segmenta širine	12 inča (30 cm) s rasponom rastezljivosti 72-94 inča / 183-239 cm
920	5 segmenta širine	15 inča (38 cm) s rasponom rastezljivosti 72-94 inča / 183-239 cm

*****može se koristiti i kao remen

Za uporabu na samo jednom bolesniku.

Dale®
Medical Products

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

Dale je registrirani zaštitni znak tvrtke Dale Medical Products, Inc. u SAD-u, EU i UK-u.
EasyGrip je žig tvrtke Dale Medical Products Inc.
Patent www.dalemed.com/patents
©2024 Dale Medical Products, Inc.
942155 REV G

S Trakom EasyGrip™


Dale® Abdominalni Steznik




s Ekskluzivnim Rastezljivim Materijalom

Postavljanje Abdominalnog Steznika Dale


Abdominalni steznici Dale dostupni su u raznim veličinama. Kod krupnijih bolesnika moguće je spojiti dva steznika.

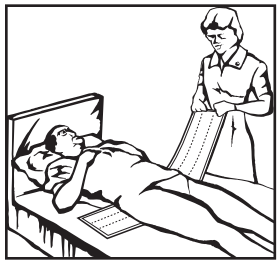


1. Postavite steznik ispod bolesnika s ljepljivom trakom okrenutom prema gore te vrhom prema dolje i razvucite jedan kraj. Odgovarajuće rastezanje osigurava potreban pritisak.

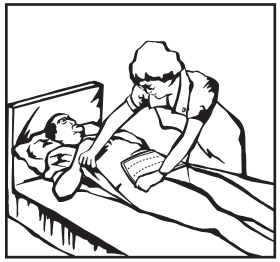

2. Rastegnite steznik preko trbuha bolesnika i držite ga jednom rukom. Steznik se može postaviti ravno ili pod kutom ako je potreban dodatni pritisak u gornjem ili donjem dijelu trbuha.

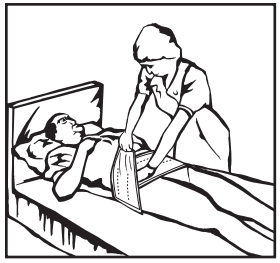

3. Rastegnite drugi kraj preko prvoga pod željenim kutom.

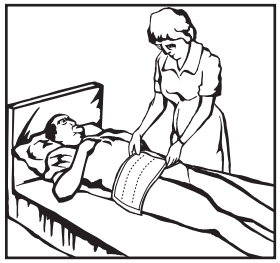



4. Čvrsto pritisnite ljepljivu traku uz rastezanje prema dolje da se zalijepi na steznik.


Steznik je potrebno dovoljno rastegnuti. Zapamtite da čvrsto postavljen steznik ne ometa disanje. Rastezanje i pritisak zapravo olakšavaju duboko disanje.

Pričvršćivanje Drenažnih Cjevčica, Cjevčica za Hranjenje i Otvora Ostomije


U abdominalnom stezniku Dale može se izrezati rupa za pričvršćivanje drenažnih cjevčica, cjevčica za hranjenje ili otvora nakon operacije kreiranja ostomije. Postavite steznik na bolesnika tako da se na mjestu cjevčica nalazi samo jedan sloj steznika. Mjesto na kojem je potrebno napraviti rupu označite s X, presavinite materijal i napravite eliptičan rez na proizvodu (vidjeti sliku). Nakon što se materijal rastegne, eliptičan rez raširit će se u okruglu rupu kroz koju se provlači cijev. Promjer rupe jednak je dužini reza. Na poleđini se nalaze upute za pričvršćivanje trake EasyGrip.

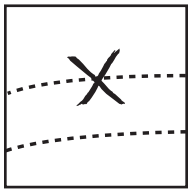

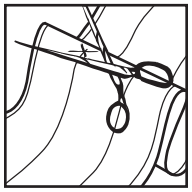

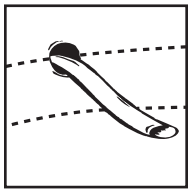


Samopričvršćivanje

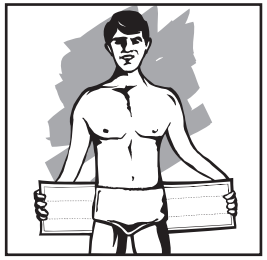

1. Postavite steznik s gornjim krajem odmah ispod pupka i vrhom okrenutim prema dolje. Razvucite steznik na obje strane.




2. Rastegnite steznik dok ga omatate oko sebe.

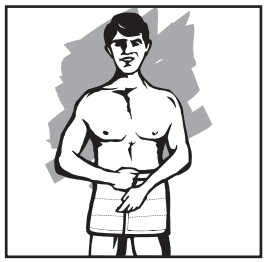

3. Pritisnite kako biste ga pričvrstili.

†Primjena trake EasyGrip

1. Odvojite traku EasyGrip sa steznika

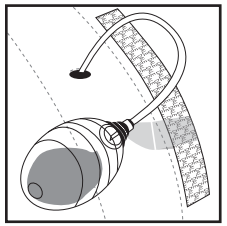

Za korištenje s drenažnom vrećicom provucite traku EasyGrip kroz omču drenažne vrećice, a zatim ponovo pričvrstite na steznik. Traku EasyGrip može se rezati za više mogućnosti pričvršćivanja drenažnih vrećica.

† Za drenažne materijale uvijek slijedite standarde najbolje prakse.

Čišćenje i Održavanje

Strojno pranje*


Ili ručno pranje

Ne izbjeljivati

Sušiti na zraku

Prati u stroju ili ručno s blagim deterdžentom.Prije pranja provjerite jesu li ljepljive trake dobro pričvršćene da ne dođe do nakupljanja komadića materijala, što može djelovati na vlakna i oslabiti njihovu sposobnost sigurnog pričvršćivanja. Izvjesiti da se osuši.

***(do 40-60 °C/104-140 °F)**

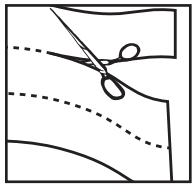

***** Ako je steznik previsok, prekomjerne segmente može se izrezati i ukloniti.