Dale-Abdominalbælte
med Eksklusivt Strækmateriale

Dale-abdominalbæltet støtter abdominalmusklerne, mens mobiliteten og genoptræningen af musklerne fremmes.

Bæltet er udelukkende fremstillet af Dales eksklusive strækmateriale, som muliggør burrebåndslukning uanset sted, hvilket giver en mere præcis og komfortabel tilpasning. Jævnt fordelt kompression fremmer hoste og dyb vejrtrækning. Patienterne kan gå mere behageligt, hvilket reducerer muligheden for sedentære komplikationer såsom atelektase, pneumoni og flebitis.

Anvendelse

Dale-abdominalbæltet yder støtte og komfort efter indgreb såsom:

- Kejsersnit
- Fedtsugning
- Abdominalplastik
- Abdominal stomi / stoma
- Hysterektomi
- Gastroplastik
- Fødsel

Vigtige Funktioner

- **Fremstillet uden naturgummilatex.** Eliminerer bekymringer om patientens eller omsorgspersonens overfølsomhed over for latex.
- **Innovativ sammenføjningssøm.** Syning uden mellemrum giver større patientkomfort.
- **Jævnt fordelt kompression.** Dales eksklusive strækmateriale fordeler kompression jævnt rundt om kroppen uden at skride, danne folder eller at være begrænsende.
- **Produktets levetid.** Produktet kan tages af og på mange gange. Produktet kan blive en smule fnulret, men dette forbedrer faktisk støtteevnen.
- **Burrebåndslukning.** Bæltet åbnes og lukkes hurtigt og nemt ved forbindings- og såreftersyn. Kan fastgøres til et hvilket som helst sted på bæltets omkreds for en præcis tilpasning.
- **EasyGrip-bånd.** Holder op til fire drænbolde på plads under abdominalbæltet.
- **Der kan klippes huller**, så der tages højde for stomioperation, dræn og ernæringssonder.

Bestilling

Dale-abdominalbælter fås hos forhandlere af hospitals-/medicinsk udstyr, pakket med 1 stk. i hver kasse.

For at finde størrelsen til kvinder måles hofterne; til mænd taljen.

525	2 panel	6"(15cm) bredt kan strækkes til størrelse 28-50" 72-127 cm*****
410	3 panel	9"(23cm) bredt kan strækkes til størrelse 30-45" 76-114 cm
411	3 panel	9"(23cm) bredt kan strækkes til størrelse 46-62" 117-157 cm
418	3 panel	9"(23cm) bredt kan strækkes til størrelse 60-75" 152-191 cm
810	4 panel	12"(30cm) bredt kan strækkes til størrelse 30-45" 76-114 cm
811	4 panel	12"(30cm) bredt kan strækkes til størrelse 46-62" 117-157 cm
818	4 panel	12"(30cm) bredt kan strækkes til størrelse 60-75" 152-191 cm
820	4 panel	12"(30cm) bredt kan strækkes til størrelse 72-94" 183-239 cm
920	5 panel	15"(38cm) bredt kan strækkes til størrelse 72-94" 183-239 cm

*****kan også bruges som ribbælte

Kun til brug på en enkelt patient.

Dale®
Medical Products

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

Dale er et registreret varemærke tilhørende Dale Medical Products, Inc. i USA, EU og Storbritannien.
EasyGrip er et varemærke, der tilhører Dale Medical Products Inc.
Patent www.dalemed.com/patents
©2024 Dale Medical Products, Inc.
942155 REV G



Med Easygrip™ Bånd


Dale®
Abdominalbælte




med Eksklusivt Strækmateriale

Anbringelse af Dale-Abdominalbælte


Dale-abdominalbælter fås i forskellige størrelser. To bælter kan sættes sammen, så de passer til en meget stor patient.

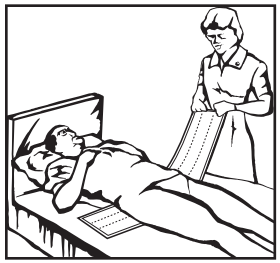


1. Anbring bæltet under patienten med burrebåndet opad og V-punktet nedad, og stræk den ene ende ud. Et korrekt stræk giver den nødvendige kompression.

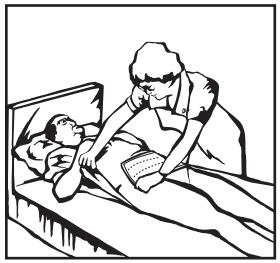

2. Stræk bæltet over patientens mave og hold i det med den ene hånd. Bæltet kan anbringes lige eller i en vinkel, hvis yderligere tryk er nødvendigt på øvre eller nedre abdomen.

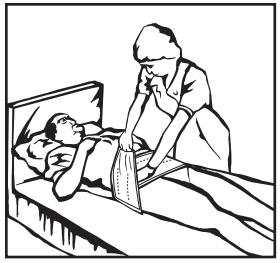

3. Stræk den anden ende hen over i den ønskede vinkel.

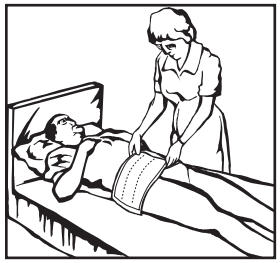



4. Tryk bæltet ind, så det lukker, mens du strækker det.


Sørg for at strække bæltet tilstrækkeligt. Husk, at en god tilpasning ikke begrænser vejrtrækningen; strækningen og kompressionen gør faktisk en dyb vejrtrækning nemmere.

Støtter Dræn, Ernæringssonder og Stomi


Der kan skæres et hul i Dale-abdominalbæltet til f.eks. drænslanger, ernæringssonder og åbninger forårsaget af stomioperation. Anbring bæltet på patienten, så der kun er et enkelt lag, der hvor slangen skal føres igennem. Skriv et X på stoffet, hvor hullet skal laves, fold stoffet, og klip et ellipseformet hul i materialet (se illustrationen). Når stoffet strækkes, vil det ellipseformede hul blive rundt, så det passer til slangen. Hullets diameter vil være lig med den klippede længde. Se bagsiden for anbringelse af EasyGrip-båndet.

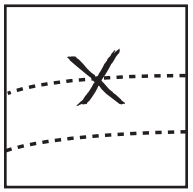

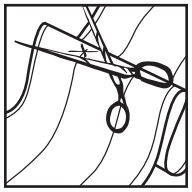

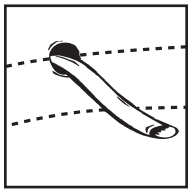


Påsættelse ved Egen Hjælp

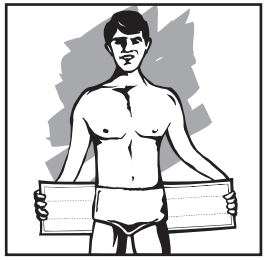

1. Anbring øverste kant lige under navlen med V-punktet vendt nedad. Stræk bæltet ud i hver side.




2. Svøb det om dig, mens du strækker bæltet.

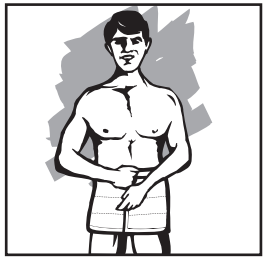

3. Tryk bæltet ind, så det lukker forsvarligt.

†Anbringelse af EasyGrip-Båndet

1. Tag EasyGrip-båndet af bæltet

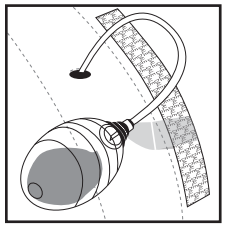

Ved anvendelse af drænbold føres EasyGrip-båndet ind gennem drænboldens strop; og det fastgøres på bæltet igen. EasyGrip-båndet kan klippes til, så der er flere muligheder for at fastgøre bolden.

† Følg altid bedste praksisstandarder til drænanordninger.

Vask og pleje

Maskinvaskes*****


Eller håndvaskes

Må ikke bleges

Tørres på snor

Maskin- eller håndvaskes* med mildt vaskemiddel. Før vask skal du sikre dig, at burrebåndsoverfladerne er forsvarligt fastgjort for at forhindre, at der samler sig fnug på dem, som kan interferere med burrebåndsfibrene og svække deres lukkeegenskaber. Hænges til tørre.

***(op til 40-60°C/104-140°F)**

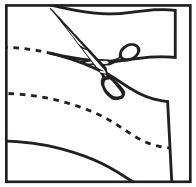

***** Hvis bæltet er for bredt, kan panelerne fjernes ved at klippe mellem dem.