Dale-Vatsatuki
Joustavasta Erikoismateriaalista

Dale-vatsatuki tukee vatsalihaksia ja edistää samalla liikkuvuutta ja lihasten kehitystä.

Tuki on tehty kokonaan Dalen joustavasta erikoismateriaalista, joka mahdollistaa tarranauhan kiinnittämisen mihin kohtaan tahansa oikean ja mukavan istuvuuden aikaansaamiseksi. Tasaisesti jakautunut puristus edistää yskimistä ja syvähengitystä. Potilaat voivat kävellä mukavammin, mikä vähentää paljosta istumisesta aiheutuvien komplikaatioiden, kuten atelektaasin, keuhkokuumeen ja laskimotulehduksen, mahdollisuutta.

Käyttöaiheet

Dale-vatsatukea käytetään tukena ja apuna seuraavien toimenpiteiden jälkeen:

- Keisarileikkaus
- Rasvaimu
- Abdominoplastia
- Vatsa-Avanne
- Kohdunpoisto
- Gastroplastia
- Synnytys

Tärkeimmät ominaisuudet

- **Valmistuksessa ei ole käytetty luonnonkumilateksia.** Poistaa huolen potilaan tai hoitajan yliherkkyydestä lateksille.
- **Innovatiivinen saumaommel.** Yhtenäinen sauma parantaa potilaan käyttömukavuutta.
- **Tasaisesti jakautuva puristus.** Dalen joustava erikoismateriaali jakaa puristuksen tasaisesti vartalon ympäri ilman, että materiaali nousee ylös, kiertyy rullalle tai kuristaa.
- **Käyttöikä.** Materiaali voidaan avata ja sulkea useita kertoja. Se voi nöyhtääntyä hieman, mutta tämä itse asiassa vain parantaa sen pitokykyä.
- **Tarranauhakiinnitys.** Tuki voidaan avata ja kiinnittää nopeasti ja helposti siteen vaihtoa ja haavan tarkastusta varten. Voidaan kiinnittää tuen mihin tahansa kohtaan vartalon ympärillä hyvän istuvuuden aikaansaamiseksi.
- **EasyGrip-nauha.** Mahdollistaa neljän dreenipallon asettamisen vatsatuen ulkopuolelle.
- **Reiät voidaan leikata siten**, että ne sopivat yhteen avannekirurgian tai dreeni- ja ruokintaletkujen aukkojen kanssa.

Tilaustiedot

Dale-vatsatukia saa lääkinnällisten ja sairaalatarvikkeiden myyjiltä yksittäispakkauksissa.

Oikea koko määritetään mittaamalla naisilta lantion ympärys ja miehiltä vyötärön ympärys.

525	2 paneelia leveys	15 cm(6”), venyy kokoon 72–127 cm (28”-50”)*****
410	3 paneelia leveys	23 cm(9”), venyy kokoon 76–114 cm (30”-45”)
411	3 paneelia leveys	23 cm(9”), venyy kokoon 117–157 cm (46”-62”)
418	3 paneelia leveys	23 cm(9”), venyy kokoon 152–191 cm (60”-75”)
810	4 paneelia leveys	30 cm(12”), venyy kokoon 76–114 cm (30”-45”)
811	4 paneelia leveys	30 cm (12”), venyy kokoon 117–157 cm (46”-62”)
818	4 paneelia leveys	30 cm (12”), venyy kokoon 152–191 cm (60”-75”)
820	4 paneelia leveys	30 cm (12”), venyy kokoon 183–239 cm (72”-94”)
920	5 paneelia leveys	38 cm (15”), venyy kokoon 183–239 cm (72”-94”)

*****voidaan käyttää myös kylkivyönä

Potilaskohtaiseen käyttöön.


Dale®
Medical Products

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

Dale on Dale Medical Products, Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa, EU:ssa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
EasyGrip on Dale Medical Products Inc. -yhtiön tavaramerkki.
Patentti www.dalemed.com/patents
©2024 Dale Medical Products, Inc.
942155 REV G

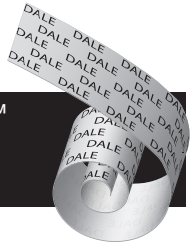

Varustettu EasyGrip™ -Nauhalla


Dale®
Vatsatuki




Joustavasta Erikoismateriaalista

Dale-Vatsatuen Käyttäminen


Dale-vatsatuki on saatavana useina eri kokoina. Kookkaalle potilaalle voidaan yhdistää kaksi tukea.

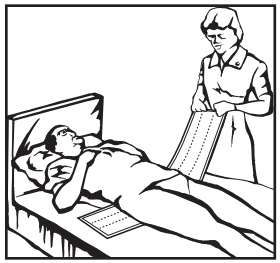


1. Aseta tuki potilaan alle niin, että tarranauhan koukkupuoli on ylöspäin ja V-piste alaspäin, ja venytä toista päätä ulospäin. Oikea venytys saa aikaan tarvittavan puristuksen.

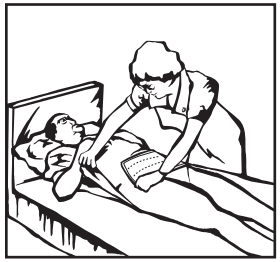

2. Venytä tuki potilaan vatsan yli ja pidä kiinni yhdellä kädellä. Voit asettaa tuen suoraan tai viistoon, jos lisäpuristus on tarpeen ylävatsan tai alavatsan alueella.

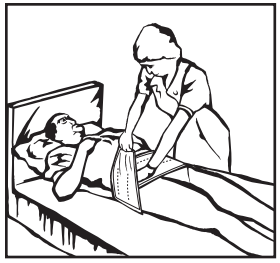

3. Venytä toinen pää potilaan yli haluttuun suuntaan.

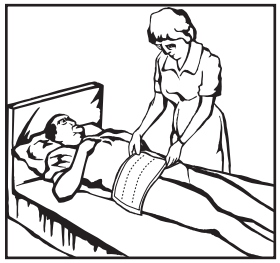



4. Venytä tukea ja paina tarranauha tukevasti kiinni.


Tukea on venytettävä riittävästi. Muista, että tukeva istuvuus ei estä hengitystä; venytys ja puristus itse asiassa helpottavat syvähengitystä.

Tukee dreeni- ja Ruokintaletkuja ja Avannekirurgiaa


Dale-vatsatukeen voidaan leikata reikä esim. dreeni- ja ruokintaletkuja tai avannekirurgiassa tehtyjä aukkoja varten. Aseta tuki potilaalle niin, että vain yksi kerros peittää letkun kohdan. Merkitse X siihen kohtaan kangasta, johon reikä tehdään, tee kankaaseen taite ja leikkaa materiaaliin soikea reikä (katso kuvaa). Kun kangasta venytetään, soikeasta reiästä tulee pyöreä ja siihen voi asettaa letkun. Reiän läpimitta on sama kuin leikkauksen pituus. Katso EasyGrip-nauhan käyttöä koskevat ohjeet takakannesta.

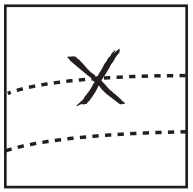

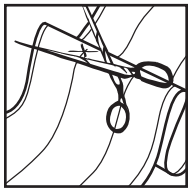

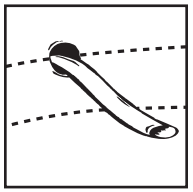


Itsekäyttö

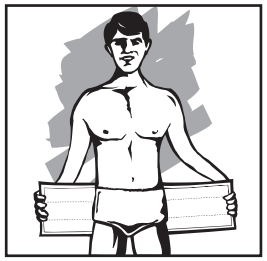

1. Aseta tuen yläreuna juuri navan alapuolelle ja V-piste alaspäin. Venytä tukea sivusuunnassa.




2. Venytä tukea, kun käärit sitä vartalon ympärille.

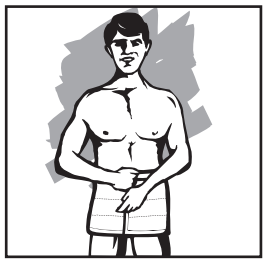

3. Kiinnitä tuki painamalla se kiinni.

†EasyGrip-nauhan kiinnittäminen

1. Nosta EasyGrip-nauha irti tuesta

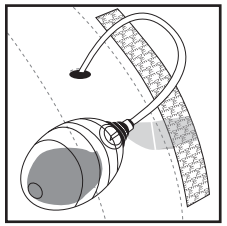

Dreenipalloja käytettäessä pujota EasyGrip-nauha dreenipallon kielekkeen läpi ja kiinnitä uudelleen tukeen. EasyGrip-nauha voidaan leikata pallojen kiinnitysvaihtoehtojen lisäämiseksi.

† Noudata aina dreneerauslaitteita koskevia parhaita käytäntöjä.

Pesu ja hoito

Konepesu*****


Tai käsinpesu

Ei valkaisuaineita

Kuivaus ripustettuna

Pese koneessa tai käsin* miedolla pesuaineella. Varmista ennen pesua, että tarranauhojen pinnat ovat kunnolla kiinni toisissaan, ettei niihin kerry nukkaa, sillä nukka voi heikentää tarranauhan kiinnittymistä. Ripusta kuivumaan.

***(enintään 40–60 °C)**

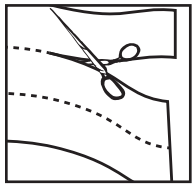

***** Jos tuki on liian leveä, paneeleja voidaan poistaa leikkaamalla niiden välistä.