Ceintures Abdominales Dale
avec Matériau Extensible Exclusif

La ceinture abdominale Dale supporte les muscles abdominaux tout en encourageant la mobilité et en favorisant le retour du développement musculaire.

La ceinture est faite entièrement de matériau extensible exclusif de Dale, permettant une fermeture auto-agrippante à n'importe quel endroit pour un ajustement plus précis et plus confortable. Distribuée de façon homogène, la compression favorise la toux et la respiration profonde. Les patients peuvent marcher plus confortablement, ce qui réduit la possibilité de complications liées à l'immobilité comme l'atélectasie, la pneumonie ou la phlébite.

Indications d'Utilisation

La ceinture abdominale Dale fournit support et confort après des interventions comme:

- Une césarienne
- Une liposuccion
- Une abdominoplastie
- Une stomie abdominale
- Une hystérectomie
- Une gastroplastie
- Un accouchement

Principales Caractéristiques

- **Ce produit n'est pas fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel**. Élimine les soucis liés à l'hypersensibilité au latex du patient ou de son soignant.
- **Modèle d'agrafage innovant**. Agrafage continu pour un meilleur confort du patient.
- **Distribution régulière de la compression**. Le matériau extensible exclusif de Dale répartit la compression uniformément autour du corps sans créer de fronces, de roulement ou de constriction.
- **Durée de vie du produit**. Le matériau peut s'engager et se désengager un certain nombre de fois. Il peut pelucher, mais cela ne fera que renforcer son maintien.
- **Fermeture auto-agrippante**. La ceinture s'ouvre et se ferme rapidement et facilement, permettant d'inspecter un pansement ou une blessure. Elle s'attache à n'importe quel endroit sur la circonférence de la ceinture pour un ajustement précis.
- **Bandelette EasyGrip**. Permet de maintenir en place jusqu'à quatre poches de drainage sur l'extérieur de la ceinture abdominale.
- **Des trous peuvent être découpés** pour permettre les ouvertures requises pour la chirurgie pour les stomies, le drainage et les sondes d'alimentation.

Pour Commander

Les ceintures abdominales Dale sont disponibles auprès de distributeurs de matériel hospitalier/médical. Une ceinture par boîte.

Pour trouver la bonne taille, mesurez le tour de hanches des femmes et le tour de taille des hommes.

525	2 panneaux	15 cm (6") de large, s'étire sur 72-127 cm (28"-50")*****
410	3 panneaux	23 (9") cm de large, s'étire sur 76-114 cm (30"-45")
411	3 panneaux	23 cm (9") de large, s'étire sur 117-157 cm (46"-62")
418	3 panneaux	23 cm (9") de large, s'étire sur 152-191 cm (60"-75")
810	4 panneaux	30 cm (12") de large, s'étire sur 76-114 cm (30"-45")
811	4 panneaux	30 cm (12") de large, s'étire sur 117-157 cm (46"-62")
818	4 panneaux	30 cm (12") de large, s'étire sur 152-191 cm (60"-75")
820	4 panneaux	30 cm (12") de large, s'étire sur 183-239 cm (72"-94")
920	5 panneaux	38 cm de large, s'étire sur 183-239 cm (72"-94")

*****peut également être utilisé comme ceinture de côtes

Usage réservé à un seul patient.

Dale® Medical Products

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

Dale est une marque déposée de Dale Medical Products, Inc. aux États-Unis, dans l'Union européenne et au Royaume-Uni.
EasyGrip est une marque de commerce de Dale Medical Products Inc.
Brevet www.dalemed.com/patents
©2024 Dale Medical Products, Inc.
942155 REV G



Avec Bandelette EasyGrip™

Dale® Ceinture Abdominale




avec Matériau Extensible Exclusif


French

Application de la Ceinture Abdominale Dale


Les ceintures abdominales Dale sont disponibles dans une gamme de tailles. Deux ceintures peuvent être assemblées pour les patients plus corpulents.

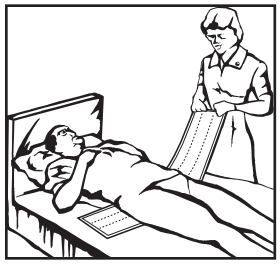


1. Placez la ceinture sous le patient avec le matériau d'accrochage orienté vers le haut et le point V orienté vers le bas, et tirez sur une extrémité pour l'étirer. L'extension correcte fournit la compression nécessaire.

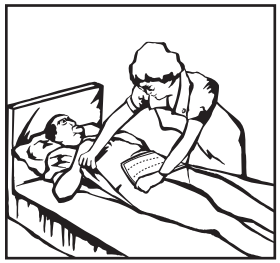

2. Étirez la ceinture sur le ventre du patient et maintenez-la avec une main. Vous pouvez placer la ceinture droite ou en diagonale si une pression supplémentaire est nécessaire sur le haut ou le bas de l'abdomen.

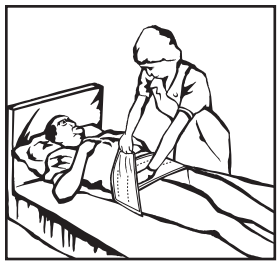

3. Étirez l'autre extrémité à l'angle désiré.

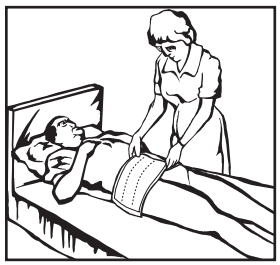



4. Appuyez sur la fermeture auto-agrippante de la ceinture pour bien la fermer tout en maintenant l'étirement.


Assurez-vous de bien étirer la ceinture. Rappelez-vous : un maintien solide n'empêche pas la respiration; bien au contraire, l'étirement et la compression facilitent une respiration profonde.

Utilisation avec des Drains, des Sondes d'Alimentation et des Stomies


Vous pouvez découper un trou dans la ceinture abdominale Dale pour y positionner des tubes pour le drainage, pour l'alimentation et pour les ouvertures causées par la chirurgie pour des stomies. Placez la ceinture sur le patient de façon à ce qu'une seule épaisseur recouvre le site du tube. Marquez le tissu avec un X à l'endroit où il faut découper le trou, pliez le tissu et faites une ouverture en ellipse dans le matériau (voir l'illustration). Lorsque le tissu est tendu, la découpe elliptique deviendra circulaire pour permettre le passage du tube. Le diamètre du trou sera égal à la longueur de la découpe. Voir la couverture arrière pour les applications de la bandelette EasyGrip.

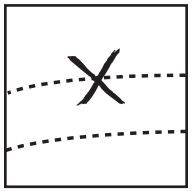

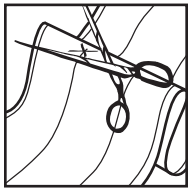

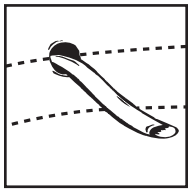


Mise en Place sur Soi-Même

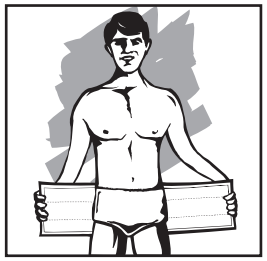

1. Positionnez la ceinture de façon que le bord du haut soit juste au-dessous du nombril avec le point V orienté vers le bas. Étirez la ceinture latéralement.




2. Étirez la ceinture pendant que vous l'enveloppez autour de vous.

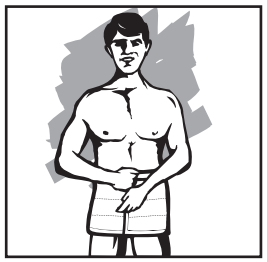

3. Appuyez pour fermer solidement.

†Application de la Bandelette EasyGrip

1. Soulevez la bandelette EasyGrip pour la dégager de la ceinture

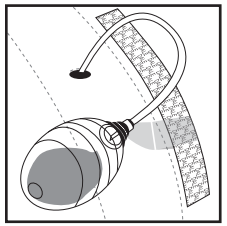

Pour l'utilisation avec une poche de drainage, faites passer la bandelette EasyGrip à travers la languette de la poche de drainage; puis rattachez-la à la ceinture. La bandelette EasyGrip peut être coupée afin de fournir plus d'options pour assujettir les poches de drainage.

† Respectez toujours les consignes d'usage des appareils de drainage.

Nettoyage et Entretien

Lavage en machine*


Ou lavage à la main

N'utilisez pas d'agent javellisant

Faites sécher sur un fil à linge

Lavez en machine ou à la main* avec un détergent doux. Avant de laver la ceinture, assurez-vous que les surfaces auto-agrippantes sont solidement attachées l'une à l'autre pour éviter l'accumulation de peluche, car elle pourrait interférer avec les fibres et dégrader leurs propriétés de fermeture. Faites sécher sur un fil à linge.

***(jusqu'à 40-60° C)**

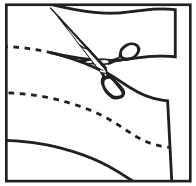

* Si la ceinture est trop large, des panneaux peuvent être retirés en coupant entre les panneaux.