# Dale-Abdominalbandage
## mit Exklusivem Stretchmaterial

Die Dale-Abdominalbandage stützt die Bauchmuskulatur und ermöglicht gleichzeitig gute Beweglichkeit, um die Muskelbildung anzuregen.

Die Bandage ist aus exklusivem Stretchmaterial von Dale hergestellt. Mit dem Klettverschluss kann die Bandage an jeder beliebigen Stelle geschlossen werden und gewährleistet somit eine bessere und bequemere Passform. Die gleichmäßige Druckverteilung erleichtert das Abhusten und die Tiefenatmung. Das Gehen fällt dem Patienten leichter. Komplikationen durch zu viel Sitzen, wie z. B. Lungenkollaps, Lungenentzündung und Phlebitis, lassen sich eher vermeiden.

## Indikationen

Die Dale-Abdominalbandage dient als Stütz- und Hilfsmechanismus im Anschluss an chirurgische Eingriffe wie:

- Kaiserschnitt
- Fettabsaugung (Liposuktion)
- Bauchstraffung (Abdominalplastik)
- Legen eines künstlichen Darmausgangs/Stomas
- Totaloperation (Hysterektomie)
- Gastroplastik
- Entbindung

## Vorteile

- **Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt**. Bedenken in Bezug auf Überempfindlichkeiten beim Patienten und Pflegepersonal gegenüber Latex entfallen.
- **Innovative Verbindungsnahttechnik**. Lückenfreie Naht erhöht den Tragekomfort.
- **Gleichmäßige Druckverteilung**. Das exklusive Stretchmaterial von Dale verteilt den Druck gleichmäßiger als andere Materialien. Es verschiebt und bündelt sich nicht und wird nicht zu eng.
- **Nutzungsdauer**. Das Material kann mehrmals angebracht und wieder abgenommen werden. Es kann sich mit der Zeit etwas aufrauen, was aber die Haltefestigkeit weiter verstärkt.
- **Klettverschluss**. Die Bandage lässt sich zur Kontrolle des Verbands und der Wunde schnell und bequem öffnen und schließen. Sie kann an einer beliebigen Stelle am Körperumfang verschlossen werden und gewährleistet dadurch einen optimalen Sitz.
- **EasyGrip-Streifen**. Zur Fixierung von bis zu vier Drainagebeuteln außen an der Abdominalbandage.
- **Ausschneidbare Öffnungen** ermöglichen die Verwendung auf Stomata, die für künstliche Darmausgänge, Drainagen und Magensonden geschaffen wurden.

## Bestellinformationen

Dale-Abdominalbandagen sind über Sanitätshäuser und Lieferanten für Krankenhäuser einzeln verpackt erhältlich.

Zur Bestimmung der richtigen Größe wird bei Frauen der Hüftumfang und bei Männern die Taille gemessen.

| | | |
|---|---|---|
| **525** | 2 Bahnen | 15 cm (6″) breit, passend für 72-127 cm (28-50″)***** |
| **410** | 3 Bahnen | 23 cm (9″) breit, passend für 76-114 cm (30-45″) |
| **411** | 3 Bahnen | 23 cm (9″) breit, passend für 117-157 cm (46-62″) |
| **418** | 3 Bahnen | 23 cm (9″) breit, passend für 152-191 cm (60-75″) |
| **810** | 4 Bahnen | 30 cm (12″) breit, passend für 76-114 cm (30-45″) |
| **811** | 4 Bahnen | 30 cm (12″) breit, passend für 117-157 cm (46-62″) |
| **818** | 4 Bahnen | 30 cm (12″) breit, passend für 152-191 cm (60-75″) |
| **820** | 4 Bahnen | 30 cm (12″) breit, passend für 183-239 cm (72-94″) |
| **920** | 5 Bahnen | 38 cm (15″) breit, passend für 183-239 cm (72-94″) |

*****kann auch als Rippenband verwendet werden

Für den Gebrauch an einem einzigen Patienten.

Dale®
Medical Products

**Dale Medical Products, Inc.**
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

Dale ist eine eingetragene Marke von Dale Medical Products, Inc. in den USA, der EU und Großbritannien.
EasyGrip ist eine Handelsmarke von Dale Medical Products Inc.
Patent www.dalemed.com/patents
©2024 Dale Medical Products, Inc.
942155 REV G



**Mit EasyGrip™ Streifen**

# Dale®
# Abdominalbandage




*mit Exklusivem Stretchmaterial*


**German**

# Anlegen der Dale-Abdominalbandage


Die Dale-Abdominalbandage ist in unterschiedlichen Größen erhältlich. Für große Patienten können zwei Bandagen verknüpft werden.

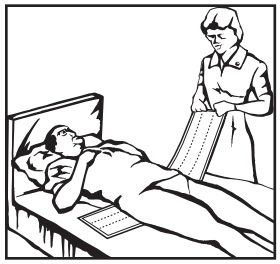


**1.** Bandage mit nach oben weisendem Klettverschlussmaterial und nach unten weisendem V unter den Patienten legen und ein Ende herausziehen. Ausreichende Dehnung ergibt den notwendigen Druck.

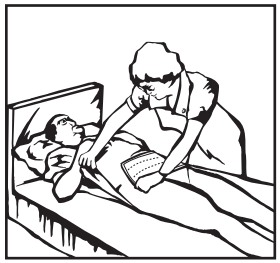

**2.** Bandage über den Bauch des Patienten ziehen und mit einer Hand halten. Die Bandage kann gerade oder auch diagonal positioniert werden, wenn zusätzlicher Druck auf den Bauch oder Unterleib erforderlich ist.

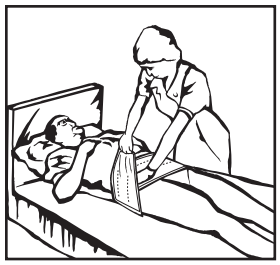

**3.** Das andere Ende in die gewünschte Richtung ziehen.

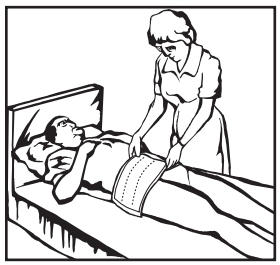



**4.** Bandage ziehen und Klettverschluss zusammendrücken.


Die Bandage muss ausreichend gedehnt werden. Die Atmung wird dabei nicht behindert. Im Gegenteil: Die Tiefenatmung wird durch das Ausdehnen und Zusammenziehen sogar erleichtert.

# Unterstützung von Drainagen, Magensonden und künstlichen Darmausgängen


Zur Verwendung von Schläuchen von Stomata, die für Drainagen, künstliche Darmausgänge und Magensonden geschaffen wurden, kann ein Loch in die Dale-Abdominalbandage geschnitten werden. Die Bandage wird dazu so auf den Patienten gelegt, dass nur eine Bandagenschicht über der Schlauchaustrittsstelle liegt. Die Stelle, an der das Loch angebracht werden soll, wird mit einem X markiert und ellipsenförmig eingeschnitten (siehe Abbildung). Durch Glattziehen des Gewebes wird das Loch rund und kann den Schlauch aufnehmen.  Der Durchmesser des Lochs entspricht der Länge des Einschnitts. Anweisungen zum Anlegen des EasyGrip-Streifens sind auf der Rückseite angegeben.

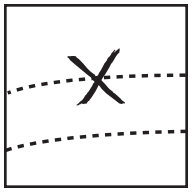

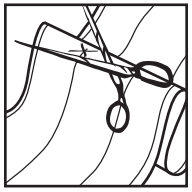

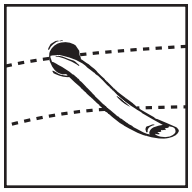


# Selbstanwendung

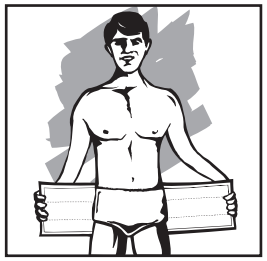

**1.** Obere Kante der Bandage mit nach unten weisendem V direkt unterhalb des Nabels positionieren und seitlich dehnen.




**2.** Bandage beim Wickeln um den Körper dehnen.

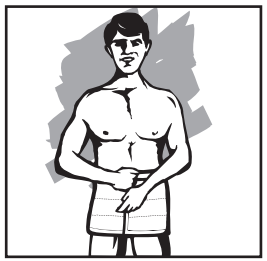

**3.** Klettverschluss zusammendrücken und Bandage sichern.

# †Anlegen des EasyGrip-Streifens

**1. EasyGrip-Streifen von der Bandage lösen**

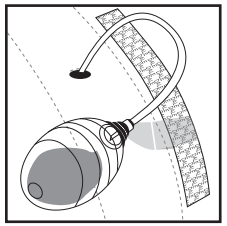

Für Drainagebeutel wird der EasyGrip-Streifen durch die Beutellasche gezogen und dann an der Bandage befestigt. Der EasyGrip-Streifen kann zugeschnitten werden, um zusätzliche Möglichkeiten zur Befestigung von Beuteln zu bieten.

† Bei der Drainage sind stets die besten Praktiken zu befolgen.

# Waschen und Pflege

In der Waschmaschine waschen*****


Oder von Hand waschen

Kein Bleichmittel benutzen

Zum Trocknen aufhängen

Mit einem milden Waschmittel in der Waschmaschine oder von Hand* waschen. Vor dem Waschen sicherstellen, dass alle Klettverschlüsse gut verschlossen sind, damit keine Flusen daran hängen bleiben, die das Klettband am Schließen hindern können. Zum Trocknen aufhängen.

***(bis 40-60 °C [104-140 °F])**

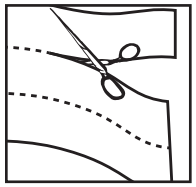

***** Wenn die Bandage zu breit ist, können Bahnen durch Schneiden zwischen den Bahnen entfernt werden.