Fascia Addominale Dale
in Materiale Elastico Esclusivo

La fascia addominale Dale sostiene i muscoli addominali, incoraggiando la mobilità e promuovendo l'irrobustimento muscolare.

La fascia è realizzata interamente con il materiale elastico esclusivo della Dale, che permette di usare la chiusura a strappo in qualsiasi punto, conseguendo una calzata più precisa e confortevole. La compressione distribuita in modo uniforme agevola la tosse e la respirazione profonda. I pazienti possono camminare più comodamente, riducendo la possibilità di complicazioni sedentarie secondarie quali l'atelettasia, la polmonite e la flebite.

Indicazioni per l'uso

La fascia addominale Dale fornisce sostegno e comfort dopo procedimenti quali:

- Parto cesareo
- Isterectomia
- Liposuzione
- Gastroplastica
- Plastica addominale
- Parto
- Stomia addominale / stomata

Caratteristiche principali

- **Non contiene lattice di gomma naturale.** Elimina ogni preoccupazione in merito all'eventuale ipersensibilità al lattice del paziente o del personale di cura.
- **Cuciture innovative.** Le cuciture continue assicurano il massimo comfort del paziente.
- **Compressione uniforme.** Il materiale elastico esclusivo della Dale distribuisce in modo uniforme la compressione sul corpo, senza spostarsi verso l'alto, formare grinze o stringere.
- **Durata utile.** Il materiale può essere aperto e chiuso innumerevoli volte. L'eventuale lanugine che può formarsi con l'uso finisce per migliorare la presa della chiusura.
- **Chiusura a strappo.** La fascia può essere aperta e chiusa rapidamente ai fini dell'ispezione della medicazione e della ferita. La chiusura può essere eseguita in qualsiasi punto della circonferenza per ottenere un preciso adattamento.
- **Striscia EasyGrip.** Trattiene in posizione fino a quattro bulbi di drenaggio all'esterno della fascia addominale.
- **È possibile praticare fori** in corrispondenza alle aperture prodotte in sede chirurgica a seguito della creazione di stomie o ai fini del passaggio di tubi di drenaggio e di sonde di alimentazione.

Informazioni sugli ordinativi

Le fasce addominali Dale sono disponibili presso i concessionari di prodotti sanitari/ ospedalieri, in confezione singola.

Per stabilire la taglia, misurare le donne sui fianchi e gli uomini in vita.

525	2 pannelli larghi 15 cm (6"). Adatta a una misura da 72-127 cm (28-50")*
410	3 pannelli larghi 23 cm (9"). Adatta a una misura da 76-114 cm (30-45")
411	3 pannelli larghi 23 cm (9"). Adatta a una misura da 117-157 cm (46-62")
418	3 pannelli larghi 23 cm (9"). Adatta a una misura da 152-191 cm (60-75")
810	4 pannelli larghi 30 cm (12"). Adatta a una misura da 76-114 cm (30-45")
811	4 pannelli larghi 30 cm (12"). Adatta a una misura da 117-157 cm (46-62")
818	4 pannelli larghi 30 cm (12"). Adatta a una misura da 152-191 cm (60-75")
820	4 pannelli larghi 30 cm (12"). Adatta a una misura da 183-239 cm (72-94")
920	5 pannelli larghi 38 cm (15"). Adatta a una misura da 183-239 cm (72-94")

*può essere utilizzato anche come cintura per le costole

Per uso monopaziente

Dale®
Medical Products

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

Dale è un marchio registrato di Dale Medical Products, Inc. negli USA, nell'UE e nel Regno Unito.
EasyGrip è un marchio depositato di Dale Medical Products, Inc.
Brevetto www.dalemed.com/patents
©2024 Dale Medical Products, Inc.
942155 REV G



Con Striscia EasyGrip™

Dale®
Fascia Addominale




con Materiale Elastico Esclusivo


Italian

Applicazione della Fascia Addominale Dale


Le fasce addominali Dale sono disponibili in una gamma di taglie. È possibile unirne due per adattarle a pazienti corpulenti.

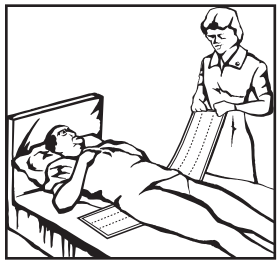


1. Disporre la fascia sotto il paziente, con la superficie a strappo orientata verso l'alto e la punta a V orientata verso il basso. Tirarne una estremità. Una buona tensione assicura la necessaria compressione.

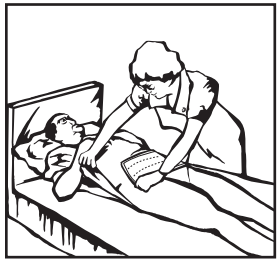

2. Tendere la fascia sullo stomaco del paziente e trattenerla con una mano. La fascia può essere disposta diritta o diagonalmente per esercitare ulteriore pressione sulla parte superiore o inferiore dell'addome.

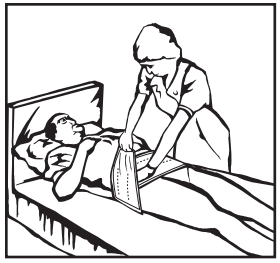

3. Tendere l'altra estremità, angolandola nel modo desiderato.

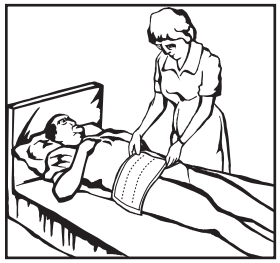



4. Esercitare una salda pressione sulla fascia per chiuderla mentre è tesa.


Accertarsi di tendere adeguatamente la fascia, tenendo presente che una buona aderenza non limita la respirazione. Al contrario, la tensione e la compressione facilitano la respirazione profonda.

Sostegno dei Tubi di Drenaggio, delle Sonde di Alimentazione e delle Stomie


È possibile praticare un foro nella fascia addominale Dale per farvi passare tubi di drenaggio e sonde di alimentazione e far posto alle stomie create in sede chirurgica. Disporre la fascia sul paziente, coprendo con un solo strato il sito del drenaggio o della sonda. Contrassegnare con una X il tessuto in corrispondenza al foro da praticare, piegare il tessuto ed eseguire un taglio ellittico (vedere l'illustrazione). Quando si tende il tessuto, il taglio ellittico diventa un foro circolare attraverso il quale si può far passare il tubo o la sonda. Il diametro del foro corrisponde alla lunghezza del taglio. Per applicare le strisce EasyGrip, vedere il retro di copertina.

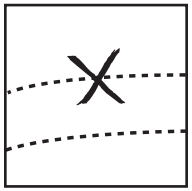

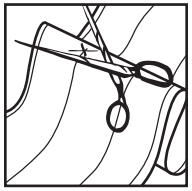

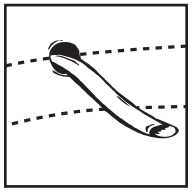


Autoapplicazione

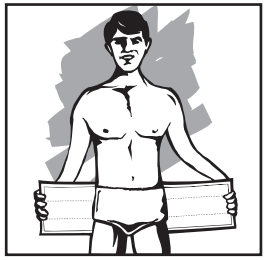

1. Disporre l'orlo superiore della fascia appena sotto l'ombelico, con la punta a V orientata verso il basso. Tirare lateralmente la fascia.




2. Avvolgersela attorno.

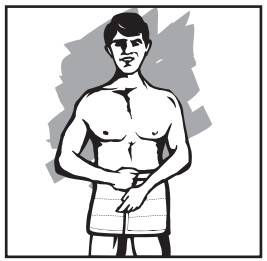

3. Premere saldamente la fascia per chiuderla in posizione.

†Applicazione della Striscia EasyGrip

1. Sollevare la striscia EasyGrip dalla fascia

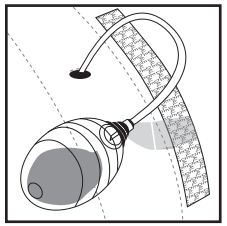

Per usare bulbi di drenaggio, far scorrere la striscia EasyGrip attraverso la linguetta del bulbo e riattaccarla sulla fascia. Le strisce EasyGrip possono essere tagliate per ampliare la gamma di opzioni di fissaggio dei bulbi.

† Attenersi sempre alla migliore prassi consigliata per i dispositivi di drenaggio.

Lavaggio e Cura

Lavare in lavatrice*****


o a mano

Non usare candeggina

Asciugare all'aria

Lavare in lavatrice o a mano* con detergente neutro. Prima di lavare la fascia, accertarsi che le superfici a strappo siano ben chiuse, in modo da evitare l'accumularsi di filacce che potrebbero interferire con le fibre e inibirne le proprietà interbloccanti. Lasciar asciugare all'aria.

***(fino a 40-60 °C/104-140 °F)**

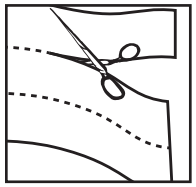

* Se la fascia è troppo larga, è possibile rimuovere pannelli, praticando un taglio tra un pannello e l'altro