Dale 복부 바인더
독점 스트레치 소재 사용

Dale 복대는 움직임을 촉진하고 근육 재발달을 증진하면서 복부 근육을 지지합니다.

그 복대는 전적으로 Dale의 독점적인 신축성 직물로 제조되었으며, 이 직물 덕분에 아무 지점에서 찍찍이 방식으로 채워 고정시킬 수 있어 더 정밀하고, 더 편안한 맞춤새가 이루어집니다. 고르게 분산된 압착으로 기침 및 깊은 호흡이 촉진됩니다. 환자는 더 편안하게 걸을 수 있어, 무기폐, 폐렴, 및 정맥염과 같은 줄곧 앉아 있는 습성의 합병증 가능성이 감소됩니다.

사용할 수 있는 적응증

Dale 복대는 다음과 같은 시술 후 지지력과 편안함을 제공합니다:

- 제왕절개술
- 지방흡인술
- 복부성형술
- 복부 장루술/창냄술
- 자궁절제술
- 위성형술
- 출산

주요 특징

- **천연 고무 라텍스로 제조되지 않음**. 라텍스에 대한 환자 또는 간병인의 과민증에 대한 우려를 해소합니다.
- **혁신적인 접합 봉합**. 틈이 없는 봉합으로 환자에게 더 큰 편안함을 제공합니다.
- **고르게 분산된 압착**. Dale의 독점적인 신축성 직물은 치킴, 말림 또는 수축이 없이 몸통을 빙 둘러 압착을 고르게 분산시킵니다.
- **제품 수명**. 직물은 수많이 교합되고 분리될 수 있습니다. 약간 보송보송한 보풀이 나타날 수 있지만 실제로는 이것이 파지력을 향상시키는 것입니다.
- **찍찍이 방식으로 채워 고정시킴**. 복대는 드레싱 및 상처 검사를 하기 위해 빨리 그리고 손쉽게 풀고 채워 고정시킵니다. 복대 둘레의 아무 지점에서 부착할 수 있어 정밀한 맞춤새가 이루어집니다.
- **EasyGrip 스트립**. 복대 외부에 구비되어 있는 4개의 배액구를 지탱합니다.
- 장루 수술로 생긴 개구, 배액 및 영양관을 수용하도록 **구멍을 절개할 수 있습니다.**.

주문 정보

Dale 복대는 병원/의료용품 딜러로부터, 박스당 1개 포장 방식으로 구입할 수 있습니다.

크기를 찾으시려면, 여성은 엉덩이, 남성은 허리를 재십시오.

525	2 패널	호 폭이 6”(15 cm)널이 늘어나 28~50”(72~127 cm)에 맞춤*
410	3 패널	호 폭이 9”(23 cm)널이 늘어나 30~45”(76~114 cm)에 맞춤
411	3 패널	호 폭이 9” (23 cm)널이 늘어나 46~62” (117~157 cm)에 맞춤
418	3 패널	호 폭이 9” (23 cm)널이 늘어나 60~75” (152~191 cm)에 맞춤
810	4 패널	호 폭이 12” (30 cm)널이 늘어나 30~45” (76~114 cm)에 맞춤
811	4 패널	호 폭이 12” (30 cm)널이 늘어나 46~62” (117~157 cm)에 맞춤
818	4 패널	호 폭이 12” (30 cm)널이 늘어나 60~75” (152~191 cm)에 맞춤
820	4 패널	호 폭이 12” (30 cm)널이 늘어나 72~94” (182~239 cm)에 맞춤
920	5 패널	호 폭이 15” (38 cm)널이 늘어나 72~94” (182~239 cm)에 맞춤

*리브 벨트로도 사용 가능

1인 환자용.

Dale®
Medical Products

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

Dale은 미국, EU 및 영국에서 Dale Medical Products, Inc.의 등록 상표입니다.
EasyGrip은 Dale Medical Products Inc.의 상표입니다.
특허 www.dalemed.com/patents
©2024 Dale Medical Products, Inc.
942155 REV G



EasyGrip™ 스트립 구비


Dale®
복부 바인더




독점적인 신축성 원단을 가지고

Dale 복대를 적용하기


Dale 복대는 다양한 크기로 나와 있습니다. 2개의 복대를 덩치가 큰 환자에 맞추기 위해 접합할 수 있습니다.

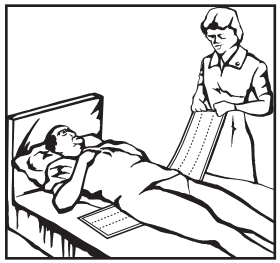


1. 복대를 후크 직물을 위로 향하게 하고 V 지점을 아래로 향하게 한 상태에서 환자 아래에 두고 한쪽 끝을 당겨서 늘립니다. 적절한 신장이 필요한 압착을 제공합니다.

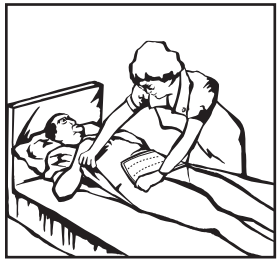

2. 복대를 환자의 배 위로 당겨서 늘리고 한 손으로 잡습니다. 복대는 똑바로, 또는 상복부 또는 하복부에 추가 압력이 필요하면 비스듬히 둘 수 있습니다.

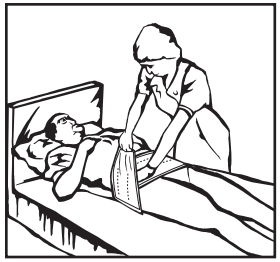

3. 다른 한쪽을 원하는 각도로 당겨서 늘립니다.

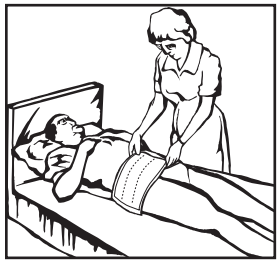



4. 그 직물을 채워 고정시키기 위해 아래로 당겨 늘리면서 후크를 단단히 눌러 채워 고정시킵니다.


반드시 복대를 충분히 당겨 늘리십시오. 단단하게 채워진 맞춤새는 호흡을 방해하지 않다는 것을 잊지 마십시오. 실제로는 신장과 압축이 깊은 호흡을 용이하게 합니다.

배액, 영양관 및 장루를 위한 지지


Dale 복대에서 배액, 영양관, 그리고 장루 수술로 생긴 개구를 수용하도록 구멍을 절개할 수 있습니다. 영양관 부위에 단 하나의 겹이 있도록 복대를 환자에 대어 두십시오. 그 직물에서 구멍을 내야 할 곳에 X표를 표시하고, 직물을 구기고 그 직물에서 타원형 절개를 합니다(도해 참조). 그 직물을 당겨 늘리면, 그 타원형 절개부가 원형 구멍이 되어 영양관을 수용합니다. 구멍의 직경은 절개 길이와 같습니다. EasyGrip 스트립 적용 사례를 알아 보려면 뒤 표지를 참조하십시오.

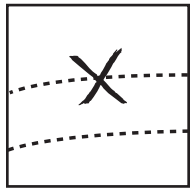

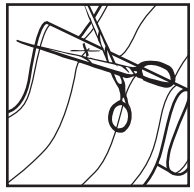

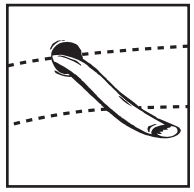


자체 적용

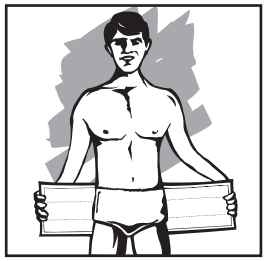

1. 윗단면이 배꼽 바로 아래에 있고 V 지점이 아래를 향한 상태로 하여 복대를 위치하게 합니다. 복대를 옆으로 당겨 늘립니다.




2. 복대를 몸에 두르면서 당겨 늘립니다.

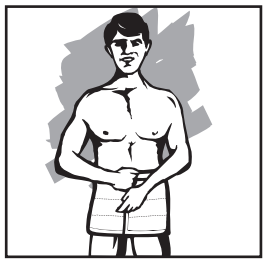

3. 눌러서 채워 단단히 고정시킵니다.

†EasyGrip 스트립 적용하기

1. EasyGrip 스트립을 들어 올려 복대에서 분리하기

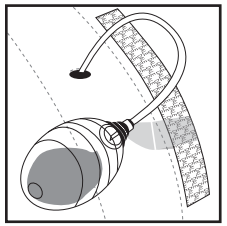

배액구를 사용하기 위해, EasyGrip 스트립을 배액구 탭에 꿰어 통과시키고, 다시 복대에 부착합니다. EasyGrip 스트립은 배액구를 단단히 고정시키기 위한 더 많은 옵션을 감안하도록 절단할 수 있습니다.

† 항상 배액 기구의 모범 사례 표준을 따릅니다.

세탁 및 관리



기계 세탁*



또는 손 세탁




표백하지 마십시오



빨랫줄 건조

순한 세제를 사용하는 기계 또는 손 세탁* 세탁하기 전에, 보풀이 뭉치지 않도록 찍찍이 표면이 단단히 결속되어 있는지 확인하십시오. 보풀이 뭉치면 섬유가 훼손될 수 있고 채워서 고정시키는 찍찍이 특성이 약화될 수 있습니다. 빨랫줄에 널어 건조시킵니다.

***(최대 40~60°C/104~140°F)**

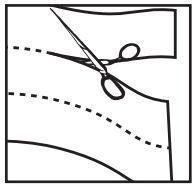

***** 복대가 너무 넓으면, 패널들 사이를 절단하여 패널들을 분리할 수 있습니다.