Dale Magebandasje
med Eksklusivt Stretchstoff

Dale magebandasje støtter opp magemusklene og gir samtidig økt mobilitet og gjenutvikling av muskler.

Hele bandasjen er laget av Dales eksklusive stretchstoff og kan lukkes med borrelås på et hvilket som helst punkt, slik at passformen blir mer presis og komfortabel.Jevn trykkfordeling gjør det lettere å hoste og trekke pusten dypt.Det blir mer behagelig for pasienter å gå, noe som reduserer risikoen for komplikasjoner som følge av stillesitting, f.eks. atelektase, lungebetennelse og flebitt.

Indikasjoner for Bruk

Dale magebandasje gir støtte og komfort etter prosedyrer som:

- Keisersnitt
- Fettsuging
- Bukplastikk
- Abdominal(t) stomi
- Hysterektomi
- Gastroplastikk
- Fødsel

Viktige Egenskaper

- **Ikke produsert med naturgummilateks**. Eliminerer problemer med hypersensitivitet for lateks hos pasienten eller omsorgspersonen.
- **Nyskapende sammenføyningssøm**. Jevn søm uten åpninger gir økt pasientkomfort.
- **Jevn trykkfordeling**. Dales eksklusive stretchstoff fordeler trykket jevnt rundt kroppen uten å gli opp, rulle ned eller føles trang.
- **Produktets varighet**. Stoffet kan lukkes og åpnes mange ganger. Det kan bli litt ullent, men dette øker faktisk festeevnen.
- **Borrelåslukning**. Bandasjen åpnes og lukkes raskt og enkelt for inspeksjon av sårforbindingen og såret. Kan lukkes hvor som helst langs bandasjens omkrets for presis passform.
- **EasyGrip-strimmel**. Holder opptil fire dreneringsflasker på plass utenpå magebandasjen.
- **Det kan skjæres hull** til åpninger som er laget ved stomioperasjon og til drenerings- og mageslanger.

Bestillingsinformasjon

Dale magebandasjer er tilgjengelige hos leverandører av sykehusutstyr/ medisinsk utstyr og er pakket som én per eske.

Finn riktig størrelse ved å måle kvinner rundt hoftene og menn rundt livet.

525	2 paneler	bredde 15 cm (6 tommer), utvider seg til 72–127 cm (28–50 tommer)*
410	3 paneler	bredde 23 cm (9 tommer), utvider seg til 76–114 cm (30–45 tommer)
411	3 paneler	bredde 23 m (9 tommer), utvider seg til 117–157 cm (46–62 tommer)
418	3 paneler	bredde 23 cm (9 tommer), utvider seg til 152–191 cm (60–75 tommer)
810	4 paneler	bredde 30 cm (12 tommer), utvider seg til 76–114 cm (30–45 tommer)
811	4 paneler	bredde 30 cm (12 tommer), utvider seg til 117–157 cm (46–62 tommer)
818	4 paneler	bredde 30 cm (12 tommer), utvider seg til 152–191 cm (60–75 tommer)
820	4 paneler	bredde 30 cm (12 tommer), utvider seg til 183–239 cm (72–94 tommer)
920	5 paneler	bredde 38 cm (15 tommer), utvider seg til 183–239 cm (72–94 tommer)

*kan også brukes som ribbebelte

For bruk på én pasient.

Dale®
Medical Products

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

Dale er et registrert varemerke for Dale Medical Products, Inc. i USA, EU og Storbritannia.
EasyGrip er et varemerke som tilhører Dale Medical Products, Inc.
Patent www.dalemed.com/patents
©2024 Dale Medical Products, Inc.
942155 REV G



Med EasyGrip™-Strimmel


Dale®
Magebandasje




med Eksklusivt Stretchstoff

Sette på Dale Magebandasje


Dale magebandasjer er tilgjengelige i flere størrelser. To bandasjer kan settes sammen for å passe til en stor pasient.

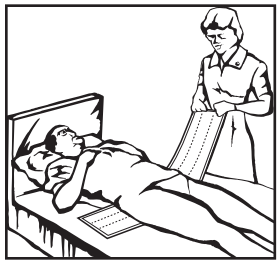


1. Legg bandasjen under pasienten slik at stoffet med kroker vender opp og V-punktet vender ned. Strekk deretter ut den ene enden. God strekk gir nødvendig kompresjon.

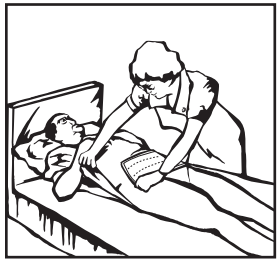

2. Strekk bandasjen over pasientens mage og hold med den ene hånden. Bandasjen kan plasseres rett eller i vinkel ved behov for mer trykk øverst eller nederst på magen.

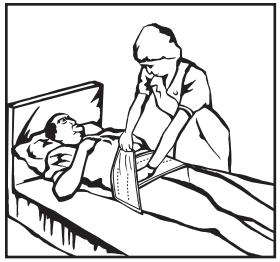

3. Strekk den andre enden over i ønsket vinkel.

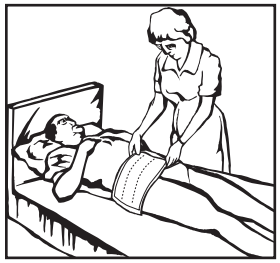



4. Trykk godt på stoffet med kroker, mens du strekker stoffet ned for å lukke det.


Sørg for å strekke bandasjen nok. Husk at tett passform ikke hindrer pusting – faktisk vil strekk og kompresjon gjøre det lettere å trekke pusten dypt.

Støtte for Drenerings- og Mageslanger og Stomi


Det kan skjæres hull i Dale magebandasje for å gi plass til drenerings- og mageslanger og åpninger som er laget ved stomioperasjon. Plasser bandasjen på pasienten slik at slangestedet bare dekkes av ett lag stoff. Tegn en X på stoffet der hullet skal lages, brett stoffet og klipp et elliptisk hull i stoffet (se illustrasjon). Når stoffet strekkes, blir det elliptiske hullet rundt, slik at slangen får plass. Hullets diameter tilsvarer utklippets lengde.Se påsettingsanvisninger for EasyGrip-strimmelen på baksiden.

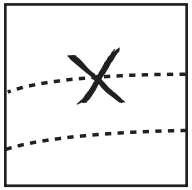

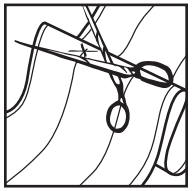

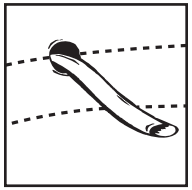


Sette på bandasjen selv

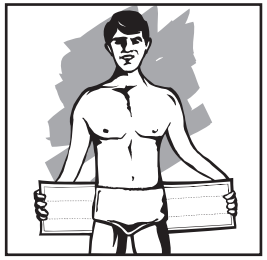

1. Posisjoner bandasjen slik at den øvre kanten sitter like nedenfor navlen og V-punktet vender ned. Strekk bandasjen ut til sidene.




2. Strekk bandasjen mens du vikler den rundt.

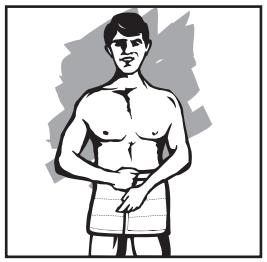

3. Trykk for å lukke og feste bandasjen.

†Sette på EasyGrip-strimmelen

1. Løft EasyGrip-strimmelen opp fra bandasjen

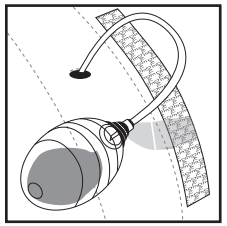

Ved bruk av dreneringsflaske skal EasyGrip-strimmelen tres gjennom klaffen på dreneringsflasken og festes til bandasjen igjen. EasyGrip-strimmelen kan klippes til, slik at det blir enklere å feste flasker.

† Følg alltid standardmetodene for dreneringsutstyr.

Vask og stell

Maskinvaskes*


Eller håndvaskes

Unngå blekemidler

Lufttørkes

Maskin- eller håndvaskes* med mildt vaskemiddel. Før vask skal du påse at borrelåsflatene er godt festet for å hindre lo, som kan sette seg i fibrene og redusere festeegenskapene. Henges til tørk.

***(opptil 40–60 °C / 104–140 °F)**

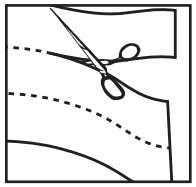

* Hvis bandasjen er for vid, kan du fjerne paneler ved å klippe mellom dem.