Brzuszny Pas Uciskowy Dale

z Rozciągliwego Materiału o Ekskluzywnych Właściwościach

Brzuszny pas uciskowy Dale podtrzymuje mięśnie brzuszne, ułatwiając jednocześnie ich mobilność i sprzyjając wzmocnieniu tkanki mięśniowej.

Pas jest w całości wykonany z rozciągliwego materiału Dale o ekskluzywnych właściwościach, umożliwiającego zapięcie na rzep w dowolnym miejscu w celu zapewnienia dokładnego i wygodnego dopasowania. Równomiernie rozłożony ucisk sprawia, że pas nie utrudnia kaszlu ani głębokiego oddychania. Pacjenci mogą poruszać się z większym komfortem, redukując w ten sposób możliwość powstania powikłań związanych z pozycją siedzącą, takich jak niedodma, zapalenie płuc i zapalenie żył.

Wskazania Dotyczące Użycia

Brzuszny pas uciskowy Dale zapewnia podtrzymanie mięśni brzucha i komfort po zabiegach takich jak:

- Cesarskie cięcie
- Liposukcja
- Abdominoplastyka
- Stomia brzuszna
- Histerektomia
- Plastyka żołądka
- Poród

Główne Cechy

- **Nie zawiera lateksu naturalnego.** Eliminacja obaw związanych z nadwrażliwością pacjenta lub opiekuna na lateks.
- **Innowacyjny szew łączący.** Szew ciągły zapewnia większy komfort pacjenta.
- **Równomiernie rozłożony ucisk.** Rozciągliwy materiał Dale zapewnia równomierne rozłożenie ucisku wokół ciała, bez przesuwania się, zwijania lub ograniczania swobody.
- **Cykl życia wyrobu.** Materiał można zapinać i rozpinać wiele razy. Może pojawić się zmechacenie, jednak zjawisko to w rzeczywistości przyczyni się do zwiększenia sił przytrzymujących.
- **Zamknięcie na rzep.** Pas można szybko i łatwo zapiąć i odpiąć, co ułatwia sprawdzenie opatrunku i rany. Można go zapiąć w dowolnym miejscu na obwodzie, co umożliwia precyzyjne jego dopasowanie.
- **Pasek zaczepowy EasyGrip.** Umożliwia umieszczenie na zewnątrz pasa uciskowego czterech kolbek drenażowych.
- **Możliwość wycięcia otworów** w celu pielęgnacji otworów utworzonych podczas zabiegu wyłonienia stomii, drenażu i rurek gastrostomijnych.

Informacje Dotyczące Składania Zamówień

Brzuszne pasy uciskowe Dale można zakupić u sprzedawców sprzętu szpitalnego/medycznego. Opakowanie zawiera jeden pas.

W celu określenia rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu bioder u kobiet i pasa u mężczyzn.

525	2-panelowy rozciągnięcie 15 cm (6"), odpowiedni dla 72-127 cm (28-50")*
410	3-panelowy rozciągnięcie 23 cm (9"), odpowiedni dla 76-114 cm (30-45")
411	3-panelowy rozciągnięcie 23 cm (9"), odpowiedni dla 117-157 cm (46-62")
418	3-panelowy rozciągnięcie 23 cm (9"), odpowiedni dla 152-191 cm (60-75")
810	4-panelowy rozciągnięcie 30 cm (12"), odpowiedni dla 76-114 cm (30-45")
811	4-panelowy rozciągnięcie 30 cm (12"), odpowiedni dla 117-157 cm (46-62")
818	4-panelowy rozciągnięcie 30 cm (12"), odpowiedni dla 152-191 cm (60-75")
820	4-panelowy rozciągnięcie 30 cm (12"), odpowiedni dla 183-239 cm (72-94")
920	5-panelowy rozciągnięcie 38 cm (15"), odpowiedni dla 183-239 cm (72-94")

*może być również używany jako pas żebrowy

Wyrób jest przeznaczony do użycia u jednego pacjenta.

Dale® Medical Products

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

Dale jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Dale Medical Products, Inc. w USA, UE i Wielkiej Brytanii.
EasyGrip jest znakiem towarowym Dale Medical Products Inc.
Patent www.dalemed.com/patents
©2024 Dale Medical Products, Inc.
942155 REV G



Z Paskiem EasyGrip™

Dale®
Brzuszny pas Uciskowy




z Rozciągliwego Materiału o Ekskluzywnych Właściwościach


Polish

Zakładanie Brzusznego Pasa Uciskowego Dale


Brzuszne pasy uciskowe Dale dostępne są w szerokim asortymencie rozmiarów. Istnieje możliwość połączenia dwóch pasów w celu użycia wyrobu u pacjentów o dużej masie ciała.

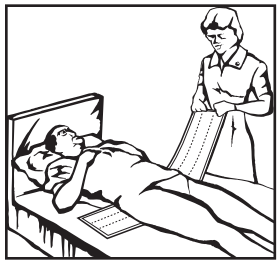


1. Umieścić pas pod pacjentem tak, aby strona z haczykami skierowana była ku górze, a punkt V ku dołowi; naciągnąć jeden koniec. Właściwe naciągnięcie zapewni niezbędny ucisk.

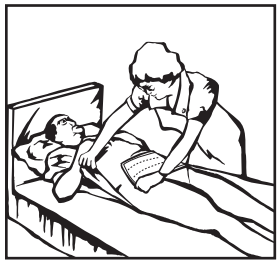

2. Naciągnąć pas nad brzuchem pacjenta i przytrzymać jedną ręką. Pas można umieścić prosto lub pod kątem, jeżeli wymagany jest dodatkowy ucisk w górnej lub dolnej części brzucha.

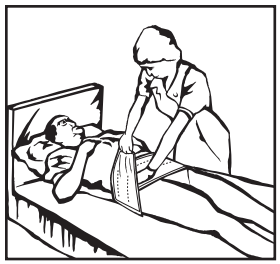

3. Naciągnąć drugi koniec pod pożądanym kątem.

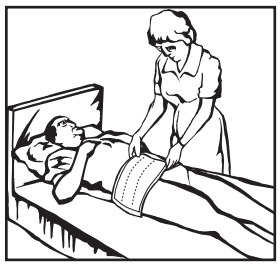



4. Przycisnąć mocno, naciągając materiał w celu zamknięcia.


Należy pamiętać o odpowiednim naciągnięciu pasa. Ścisłe dopasowanie nie spowoduje ograniczenia możliwości oddychania; naciągnięcie i ucisk w rzeczywistości ułatwiają głębokie oddychanie.

Postępowanie w Przypadku Drenażu, Rurek Gastrostomijnych i Stomii


W brzusznym pasie uciskowym Dale można wyciąć otwór na dreny do drenażu, rurkę gastrostomijną oraz na otwory utworzone podczas zabiegu wyłonienia stomii. Pas należy umieścić na pacjencie tak, aby w miejscu drenu znajdowała się tylko jedna jego warstwa. Zaznaczyć na tkaninie X w miejscu, gdzie ma być wykonany otwór, zagiąć tkaninę i wyciąć eliptyczny otwór (patrz ilustracja). Po naciągnięciu tkaniny eliptyczny otwór przybierze kształt koła, co umożliwi przeprowadzenie drenu. Średnica otworu będzie równa długości przecięcia. Na tylnej okładce podano instrukcję dotyczącą paska EasyGrip.

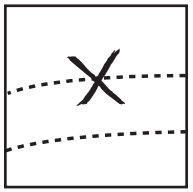

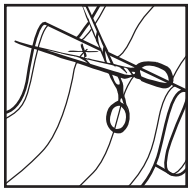

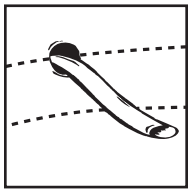


Samodzielne Zakładanie Pasa Uciskowego

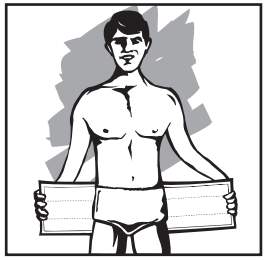

1. Umieścić pas tak, aby górna krawędź znalazła się tuż poniżej pępka, a punkt V był skierowany ku dołowi. Naciągnąć pas po bokach.




2. Naciągać pas uciskowy podczas owijania go wokół ciała.

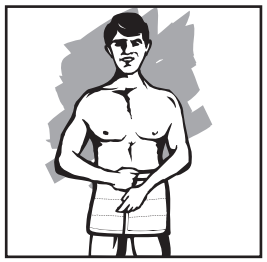

3. Przycisnąć w celu zamknięcia.

†Mocowanie paska EasyGrip

1. Odczepić pasek EasyGrip od pasa uciskowego

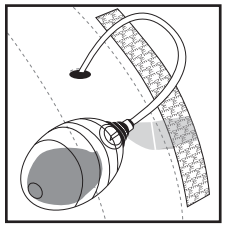

W przypadku korzystania z kolbki drenażowej przeprowadzić pasek EasyGrip przez wypustkę kolbki; zamocować do pasa uciskowego. Pasek EasyGrip można przyciąć w celu zapewnienia dodatkowych opcji mocowania kolbek drenażowych.

† W przypadku urządzeń do drenażu należy zawsze stosować najlepsze praktyki postępowania.

Pranie i dbałość o wyrób

Prać w pralce*


Lub ręcznie

Nie używać wybielaczy

Rozwiesić w celu wysuszenia

Prać w pralce lub ręcznie* używając łagodnego środka detergentowego. Przed praniem należy upewnić się, że powierzchnie z haczykami i pętlami są spięte, aby zapobiec gromadzeniu się kłaczków, ponieważ mogłoby to osłabić właściwości wiążące włókien. Powiesić w celu wysuszenia.

***(do 40-60°C/104-140°F)**

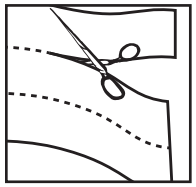

* Jeżeli pas uciskowy jest zbyt szeroki, można usunąć panele poprzez przecięcie wyrobu pomiędzy panelami.