Cinta Abdominal Dale
com Exclusivo Material Elástico

A Cinta Abdominal Dale sustenta os músculos abdominais, encorajando ainda a mobilidade e promovendo o redesenvolvimento muscular.

A cinta é feita inteiramente do Exclusivo Material Elástico da Dale, que permite o fechamento em gancho e loop em qualquer ponto, para que se obtenha um ajuste mais preciso e confortável. A compressão uniformemente distribuída promove a tosse e a respiração profunda. Os doentes podem andar com mais conforto, o que reduz a possibilidade de complicações por sedentarismo, como atelectasia, pneumonia e flebite.

Aplicações

A Cinta Abdominal Dale proporciona sustentação e conforto após procedimentos como:

- Cesárea
- Histerectomia
- Lipoaspiração
- Gastroplastia
- Abdominoplastia
- Parto
- Ostomia / Estoma abdominal

Principais características

- **Este produto não é fabricado com látex de borracha natural.** Elimina as preocupações a respeito da hipersensibilidade ao látex por parte do doente ou da pessoa que fornece tratamento.
- **Inovadores pontos de junção.** Os pontos sem vãos dão mais conforto ao doente.
- **Compressão uniformemente distribuída.** O Exclusivo Material Elástico da Dale distribui a compressão de maneira uniforme ao redor do corpo sem subir, enrolar ou apertar.
- **Vida útil do produto.** O material pode ser colocado e tirado um número indefinido de vezes. Pode ser que surja um pouco de embaçamento, mas isto na verdade melhora o poder de fixação.
- **Fechamento em gancho e loop.** A cinta abre e fecha rápida e facilmente para a inspeção de curativos e incisões. Pode ser fechada em qualquer ponto da circunferência da cinta, proporcionando um ajuste preciso.
- **Banda EasyGrip.** Comporta até quatro bulbos de drenagem na parte externa da cinta abdominal.
- **Podem-se fazer orifícios** para acomodar incisões criadas por cirurgia de ostomia, drenos e tubos de alimentação.

Informações para pedidos

As Cintas Abdominais Dale podem ser encontradas em revendedores de materiais médicos/hospitalares, em embalagens que contêm uma peça.

Para determinar o tamanho, nas mulheres meça o quadril e nos homens a cintura.

525	2 painéis	6 pol. (15 cm) de largura estica para servir em 28-50 pol. (72-127 cm)*
410	3 painéis	9 pol. (23 cm) de largura estica para servir em 30-45 pol. (76-114cm)
411	3 painéis	9 pol. (23 cm) de largura estica para servir em 46-62 pol. (117-157cm)
418	3 painéis	9 pol. (23 cm) de largura estica para servir em 60-75 pol. (152-191cm)
810	4 painéis	12 pol. (30 cm) de largura estica para servir em 30-45 pol. (76-114cm)
811	4 painéis	12 pol. (30 cm) de largura estica para servir em 46-62 pol. (117-157cm)
818	4 painéis	12 pol. (30 cm) de largura estica para servir em 60-75 pol. (152-191cm)
820	4 painéis	12 pol. (30 cm) de largura estica para servir em 72-94 pol. (183-239cm)
920	5 painéis	15 pol. (38 cm) de largura estica para servir em 72-94 pol. (183-239cm)

*também pode ser utilizado como cinto de nervuras

Utilização num único doente.

Dale® Medical Products

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

Dale é uma marca registada da Dale Medical Products, Inc. nos EUA, UE e Reino Unido.
EasyGrip é marca registada da Dale Medical Products, Inc.
Patente www.dalemed.com/patents
©2024 Dale Medical Products, Inc.
942155 REV G



Com a Banda EasyGrip™


Dale® Cinta Abdominal




com Exclusivo Material Elástico

Como Aplicar a Cinta Abdominal Dale


As Cintas Abdominais Dale estão disponíveis em diversos tamanhos. É possível unir duas cintas para atender a um doente de grande porte.

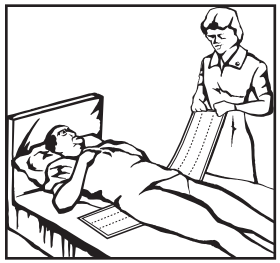


1. Coloque a cinta sob o doente, com o material de gancho voltado para cima e a ponta em V voltada para baixo, e estique uma das extremidades. A distensão adequada proporciona a compressão necessária.

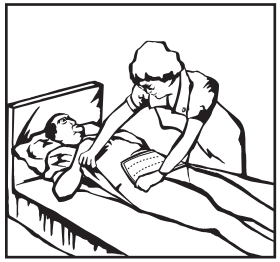

2. Puxe a cinta sobre a barriga do doente e segure com uma das mãos. A cinta pode ser colocada reta ou num ângulo, se for necessária mais pressão seja no segmento superior ou no inferior do abdómen.

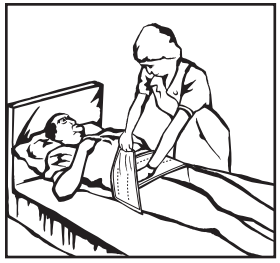

3. Puxe a outra extremidade por cima, no ângulo desejado.

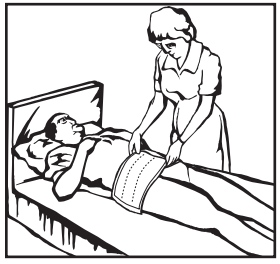



4. Prima o gancho para que feche com firmeza e, ao mesmo tempo, puxe para baixo para fechar o material.


Não deixe de esticar a cinta adequadamente. Lembre-se de que um ajuste firme não restringirá a respiração; na verdade, o facto de esticar e comprimir facilita a respiração profunda.

Apoio para Drenagem, Tubos de Alimentação e Ostomia


Pode-se fazer um orifício na Cinta Abdominal Dale para a acomodação de tubos, como tubos de drenagem e alimentação, além de incisões criadas por cirurgias de ostomia. Coloque a cinta no doente de forma que, no local do tubo, a espessura seja de apenas uma camada. Marque o tecido com um "X" no ponto onde deve ser feito o orifício, faça um vinco no tecido e um corte elíptico no material (veja a ilustração). Quando se estica o tecido, o corte elíptico resultará num orifício redondo que acomodará o tubo. O diâmetro do orifício será equivalente ao comprimento do corte. Veja na capa traseira as Aplicações da Banda EasyGrip.

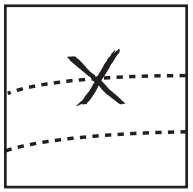

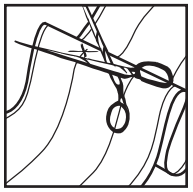

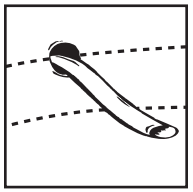


Auto-Aplicação

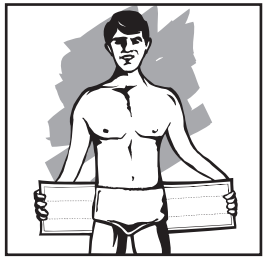

1. Posicione a cinta com o bordo superior logo em baixo do umbigo e com a extremidade em V voltada para baixo. Estique a cinta para fora, lateralmente.




2. À medida que a passa ao redor do corpo, estique-a.

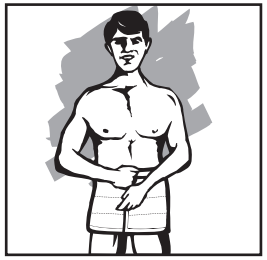

3. Para fixar, prima até que feche.

†Como aplicar a Banda EasyGrip

1. Levante a Banda EasyGrip até que solte da Cinta

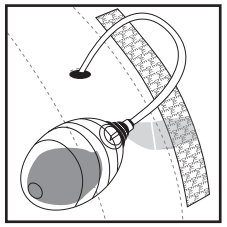

Para a utilização dum bulbo de drenagem, passe a Banda EasyGrip através da guia do bulbo de drenagem; prenda à cinta novamente. Pode-se cortar a Banda EasyGrip para que se tenham mais opções de fixação dos bulbos.

† Siga sempre os standards de melhores práticas para dispositivos de drenagem.

Como lavar e cuidar da cinta



Lave na máquina*****



Ou à mão




Não utilize branqueador



Seque no varal

Lave na máquina ou à mão* com um detergente suave. Antes de lavar, certifique-se de que as superfícies de gancho e loop estejam firmemente presas a fim de evitar o acúmulo de fiapos, que podem interferir com as fibras e enfraquecer suas propriedades de fixação. Pendure para secar.

***(até 40-60 °C/104-140 °F)**

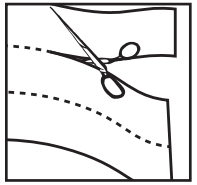

* Se a cinta for larga demais, podem-se remover painéis cortando entre eles.