Faja Abdominal Dale
con Material Elástico Exclusivo

La faja abdominal Dale proporciona soporte a los músculos abdominales al tiempo que facilita el movimiento y promueve el nuevo desarrollo muscular.

La faja está hecha completamente de un material elástico exclusivo de Dale que permite el cierre de gancho y bucle en cualquier punto para un ajuste más preciso y cómodo. Ofrece una compresión distribuida uniformemente para facilitar la tos y la respiración profunda. Los pacientes pueden caminar con más comodidad, por lo que se reduce la probabilidad de complicaciones de estados sedentarios, como atelectasia, neumonía y flebitis.

Indicaciones de Uso

La faja abdominal Dale proporciona soporte y confort para el periodo postoperatorio de procedimientos como:

- Cesárea
- Histerectomía
- Liposucción
- Gastroplastia
- Abdominoplastia
- Parto
- Estoma abdominal

Características Principales

- **Fabricado sin látex de goma natural.** Se evitan los problemas de hipersensibilidad al látex de los pacientes o sus cuidadores.
- **Innovadoras puntadas de unión.** Las costuras sin espacios le ofrecen mayor comodidad al paciente.
- **Compresión uniforme.** El material elástico exclusivo de Dale distribuye la compresión de manera uniforme alrededor del cuerpo sin subirse ni enrollarse, y sin constreñir el cuerpo.
- **Vida útil.** El material puede ajustarse y soltarse varias veces. Puede que se forme cierta pelusa, pero esto mejorará el agarre.
- **Cierres de gancho y bucle.** Permite abrir y cerrar la faja con rapidez y facilidad, para inspeccionar el vendaje o la incisión. Puede sujetarse en cualquier punto de la circunferencia de la faja para proporcionar un ajuste preciso.
- **Banda EasyGrip.** Puede sujetar hasta cuatro perillas de drenaje en su lugar sobre el exterior de la faja abdominal.
- **Se puede hacer agujeros** para adaptarla a las aberturas creadas por el estoma y los tubos de drenaje y alimentación.

Información para Hacer Pedidos

Las fajas abdominales Dale están a la venta por distribuidores de suministros hospitalarios y médicos. Se empaquetan 1 por caja.

El tamaño se determina con la medición de la circunferencia de la cadera en las mujeres, o de la cintura en los hombres.

525	2 paneles	de 6 pulg. de ancho c/u (15 cm), se estira de 28 a 50 pulg. (72-127 cm)*****
410	3 paneles	de 9 pulg. de ancho c/u (23 cm), se estira de 30 a 45 pulg. (76-114 cm)
411	3 paneles	de 9 pulg. de ancho c/u (23 cm), se estira de 46 a 62 pulg. (117-157 cm)
418	3 paneles	de 9 pulg. de ancho c/u (23 cm), se estira de 60 a 75 pulg. (152-191 cm)
810	4 paneles	de 12 pulg. de ancho c/u (30 cm), se estira de 30 a 45 pulg. (76-114 cm)
811	4 paneles	de 12 pulg. de ancho c/u (30 cm), se estira de 46 a 62 pulg. (117-157 cm)
818	4 paneles	de 12 pulg. de ancho c/u (30 cm), se estira de 60 a 75 pulg. (152-191 cm)
820	4 paneles	de 12 pulg. de ancho c/u (30 cm), se estira de 72 a 94 pulg. (183-239 cm)
920	5 paneles	de 15 pulg. de ancho c/u (38 cm), se estira de 72 a 94 pulg. (183-239 cm)

*****también puede utilizarse como cinturón acanalado

Para uso en un solo paciente.

Dale® Medical Products

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

Dale es una marca registrada de Dale Medical Products, Inc. en EE.UU., la UE y el Reino Unido.
EasyGrip es una marca registrada de Dale Medical Products, Inc.
Patente www.dalemed.com/patents
©2024 Dale Medical Products, Inc.
942155 REV G



Con Banda EasyGrip™

Dale® Fajas Abdominales




con Material Elástico Exclusivo


Spanish

Colocación de la Faja Abdominal Dale


Las fajas abdominales Dale están disponibles en una variedad de tamaños. Para pacientes muy grandes se pueden unir dos fajas.

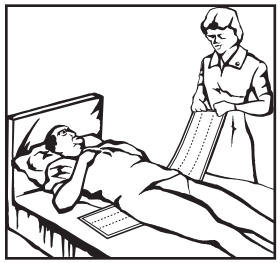


1. Coloque la faja debajo del paciente con el material de gancho hacia arriba y el vértice de la V hacia abajo, y estire un extremo hacia fuera. Un estiramiento adecuado proporcionará la compresión necesaria.

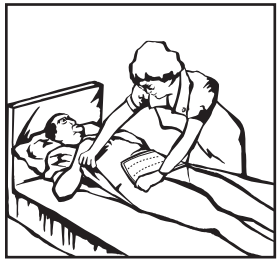

2. Estire la banda sobre el abdomen del paciente sujetándola con una mano. La faja se puede poner recta o inclinada si se necesita presión adicional en la parte superior o inferior del abdomen.

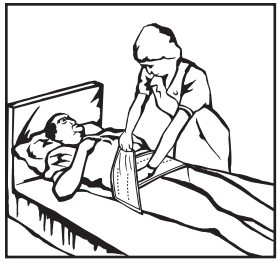

3. Estire el otro extremo al ángulo deseado.

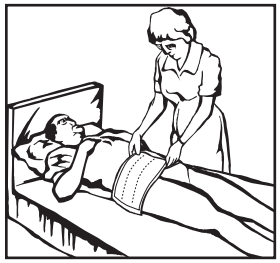


4. Presione firmemente el material de gancho mientras estira el material de la faja para cerrarla.


Asegúrese de estirar la faja adecuadamente. Recuerde: un ajuste firme no dificulta la respiración; al contrario: el estiramiento y la compresión facilitan la respiración profunda.

Soporte para Drenaje, Tubos de Alimentación y Estomas


Se puede hacer un agujero en la faja abdominal Dale para pasar tubos de drenaje y alimentación y acceder a estomas quirúrgicos. Coloque la faja en el paciente de manera que quede sólo una capa sobre la zona de los tubos. Marque la tela con una X donde va a hacer el agujero, doble la tela y haga un corte elíptico en el material (vea la figura). Cuando la tela se estire, el corte elíptico se convertirá en un agujero redondo para hacer pasar el tubo. El diámetro del agujero es igual al largo del corte. Consulte la contraportada para ver cómo aplicar la banda EasyGrip.

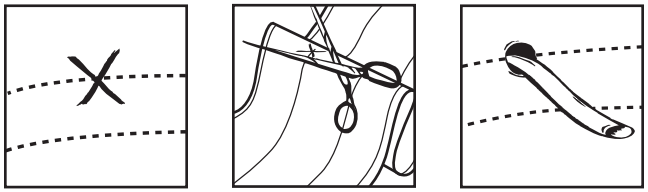


Autoaplicación

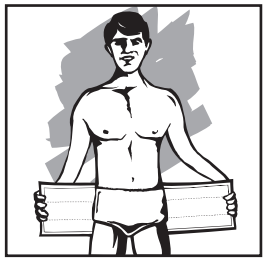

1. Coloque la faja con el borde superior justo debajo del ombligo y el vértice de la V apuntando hacia abajo. Estire la faja hacia los lados.

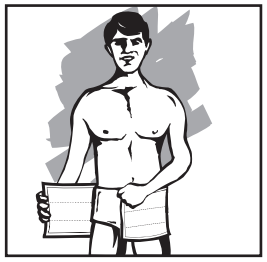


2. Estire la faja mientras se la enrolla alrededor del cuerpo.

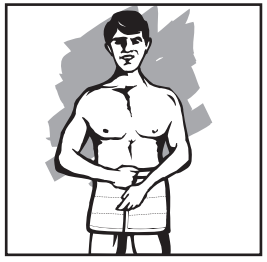

3. Haga presión para cerrarla y fijarla.

†Aplicación de la Banda EasyGrip

1. Separe la banda EasyGrip de la faja

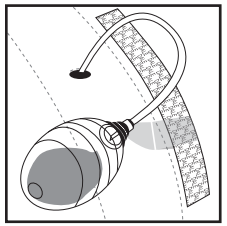

Para usar perillas de drenaje, haga pasar la banda EasyGrip por la lengüeta de la perilla de drenaje y fíjela de nuevo a la faja. La banda EasyGrip se puede cortar para permitir más opciones al fijar las perillas.

† Siga siempre las mejores prácticas para dispositivos de drenaje.

Limpieza y Cuidado



Lavar a máquina*****



O lavar a mano




No usar lejía



Secar colgada en tendedero

Lave a máquina o a mano* con detergente suave. Antes de lavar la faja, asegúrese de que las superficies de gancho y bucle estén bien abrochadas para impedir que acumulen pelusas, que pueden interferir con las fibras y disminuir su capacidad de sujeción. Cuelgue la faja y déjela secar.

***(hasta 40-60°C/104-140°F)**

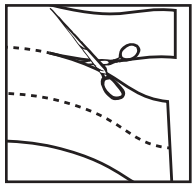

***** Si la faja es demasiado ancha, se puede cortar entre los paneles para retirarlos.