Dale Maggördel
med Exklusivt Stretchmaterial

Dale maggördel ger stöd för bukmusklerna och uppmuntrar samtidigt rörlighet och främjar musklernas återuppbyggnad.

Gördeln är helt och hållet tillverkad av Dales exklusiva stretchmaterial, som kan förslutas med kardborreförslutning på önskad plats för en noggrann och bekväm tillpassning. En jämnt fördelad kompression underlättar hostning och djupandning. Patienten kan gå omkring med större komfort, vilket minskar risken för komplikationer förknippade med stillasittande/liggande, som atelektaser, pneumoni och flebit.

Indikationer

Dale maggördel ger stöd och komfort efter följande typer av ingrepp:

- Kejsarsnitt
- Fettsugning
- Bukplastik
- Anläggning av stomi
- Hysterektomi
- Gastroplastik
- Förlossning

Viktiga Funktioner och Egenskaper

- **Ej tillverkad med naturgummilatex.** Undanröjer farhågor om överkänslighet mot latex hos patient eller vårdpersonal.
- **Innovativ söm.** Söm utan mellanrum ger ökad patientkomfort.
- **Jämnt fördelad kompression.** Dales exklusiva stretchmaterial fördelar kompressionen jämnt runt kroppen utan glidning, rullning eller åtstramning.
- **Produktens livslängd.** Materialet kan tas på och av många gånger. Materialet kan efterhand se lite luddigt ut, men detta gör faktiskt att gördeln sitter kvar ännu bättre.
- **Kardborreförslutning.** Gördeln kan öppnas och stängas snabbt och lätt för inspektion av bandage och sår. Kan fästas på valfri plats på gördeln för exakt tillpassning.
- **EasyGrip-remsa.** Håller upp till fyra dränagepåsar på plats utanpå maggördeln.
- **Hål kan klippas till** för att passa till öppningar som skapats vid stomianläggning eller inläggning av dränagerör eller matningssonder.

Beställningsinformation

Dale maggördlar finns tillgängliga från leverantörer av sjukhus- och medicinsk utrustning och är individuellt förpackade, en st. per kartong.

Finn rätt storlek genom att mäta höftomfånget hos kvinnor och midjeomfånget hos män.

525	2 våder	6 tum (15 cm) bred, sträckbar, passar till 28–50 tum (72-127cm)*
410	3 våder	9 tum (23 cm) bred, sträckbar, passar till 30–45 tum (76-114cm)
411	3 våder	9 tum (23 cm) bred, sträckbar, passar till 46-62 tum (117-157cm)
418	3 våder	9 tum (23 cm) bred, sträckbar, passar till 60-75 tum(152-191cm)
810	4 våder	12 tum (30 cm) bred, sträckbar, passar till 30–45 tum (76-114cm)
811	4 våder	12 tum (30 cm) bred, sträckbar, passar till 46-62 tum (117-157cm)
818	4 våder	12 tum (30 cm) bred, sträckbar, passar till 60-75 tum (152-191cm)
820	4 våder	12 tum (30 cm) bred, sträckbar, passar till 72–94 tum (183-239cm)
920	5 våder	15 tum (38 cm) bred, sträckbar, passar till 72–94 tum (183-239cm)

*kan även användas som ribbband

För användning till en enstaka patient.

Dale® Medical Products

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

Dale är ett registrerat varumärke som tillhör Dale Medical Products, Inc. i USA, EU och Storbritannien.
EasyGrip är ett varumärke som tillhör Dale Medical Products, Inc.
Patent www.dalemed.com/patents
©2024 Dale Medical Products, Inc.
942155 REV G



Med Easygrip™-Remsa

Dale®
Maggördel




med Exklusivt Stretchmaterial


Swedish

Applicering av Dale Maggördel


Dale maggördlar finns tillgängliga i en rad olika storlekar. Två gördlar kan kombineras för att passa till en stor patient.

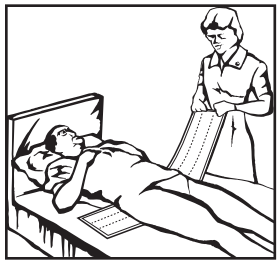


1. Placera gördeln under patienten med kardborrematerialet uppåtvänt och den avsmalnande delen nedåtvänd och sträck ut ena änden. Genom att sträcka materialet ordentligt åstadkommer man den nödvändiga kompressionen.

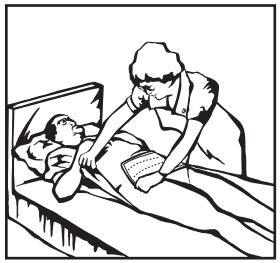

2. Sträck gördeln över patientens mage och håll i den med ena handen. Gördeln kan placeras rakt eller i vinkel om ytterligare tryck krävs på den övre eller nedre delen av buken.

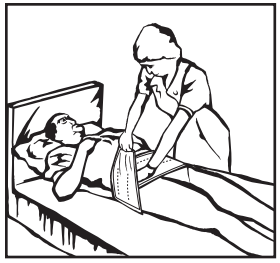

3. Sträck över den andra änden i önskad vinkel.

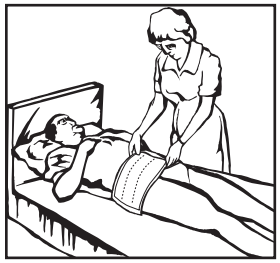



4. Pressa ihop kardborreförslutningen samtidigt som du sträcker materialet, för att försluta det.


Var noga med att sträcka gördeln tillräckligt. Kom ihåg att en stadig passning inte begränsar andningen; sträckningen och kompressionen underlättar faktiskt djupandning.

Stöd för Dränage, Matningssonder och Stomi


Man kan göra hål i Dale-maggördeln för slangar, som t.ex. dränageslangar och matningssonder, samt för öppningar som skapats vid stomianläggning. Placera gördeln på patienten så att det endast är ett enda lager över platsen för slangen. Markera med ett X på materialet där hålet ska göras, vecka materialet och utför en elliptisk utskärning i materialet (se illustrationen). När materialet sträcks blir den elliptiska utskärningen ett runt hål som passar till slangen. Hålets diameter blir lika med utskärningens längd. Se baksidan för information om applicering av EasyGrip-remsan.

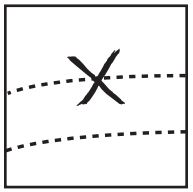

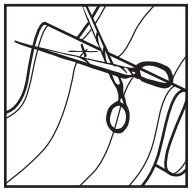

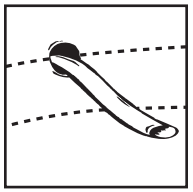


Applicering Utförd av Patienten Själv

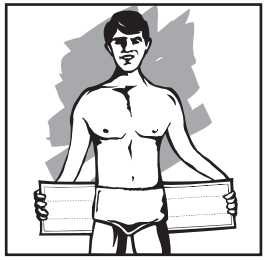

1. Positionera gördeln med den övre kanten strax nedanför naveln och V-spetsen pekande nedåt. Sträck ut gördeln i sidled.




2. Sträck gördeln medan du virar den runt dig.

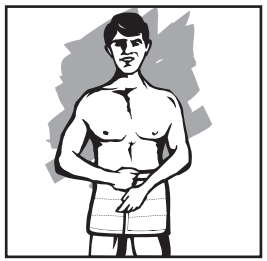

3. Tryck fast kardborreförslutningen för att fästa gördeln.

†Applicering av EasyGrip-remsan

1. Lyft upp EasyGrip-remsan från gördeln

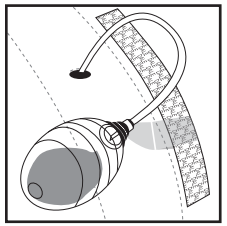

Vid användning av dränagepåse, trä EasyGrip-remsan genom dränagepåsefliken och sätt sedan fast den igen på gördeln. EasyGrip-remsan kan klippas till för att möjliggöra alternativa fastsättningar av dränagepåsar.

† Följ alltid vedertagen vårdstandard vad gäller dränageenheter.

Tvätt och Skötsel



Maskintvätt*****



Eller handtvätt




Använd ej blekmedel



Dropptorkas

Tvättas i maskin eller för hand* med ett milt tvättmedel. Före tvätten, se till att kardborreförslutningens ytor är ordentligt hoppressade mot varandra för att förhindra att ludd fastnar, vilket kan försämra fibrerna och förslutningens styrka. Dropptorkas.

***(upp till 40–60 °C/104–140 °F)**

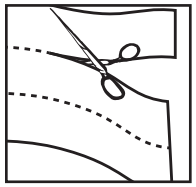

***** Om gördeln är för bred kan våder tas bort genom att man klipper mellan våderna.