Dale สายคาดรัดหน้าท้อง
พร้อมวัสดุยืดโดยเฉพาะ

สายคาดรัดหน้าท้อง Dale ช่วยพยุงกล้ามเนื้อหน้าท้องขณะเดียวกันก็ช่วยสนับสนุนการเคลื่อนไหวและส่งเสริมการพัฒนาขึ้นใหม่ของกล้ามเนื้อ

สายคาดรัดหน้าท้องโดยเฉพาะของ Dale ทำจากวัสดุยืดทั้งหมด ซึ่งช่วยให้ปิดตะขอและห่วงได้ทุกจุดเพื่อความพอดีและสวมใส่สบายมากยิ่งขึ้น การบีบอัดที่กระจายอย่างสม่ำเสมอช่วยการไอและการหายใจลึก ๆ ได้ง่ายขึ้น ผู้ป่วยสามารถเดินเหินได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นไปได้จากการนั่งนาน ๆ เช่น การยุบแฟบของปอด (atelectasis), โรคปอดบวม (pneumonia) และหลอดเลือดดำอักเสบ (phlebitis)

ข้อบ่งชี้ในการใช้

สายคาดรัดหน้าท้อง Dale ให้การสนับสนุนและความสะดวกในการดำเนินการต่าง ๆ เช่น:

- การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง
- การดูดไขมัน
- การผ่าตัดตกแต่งบริเวณหน้าท้อง
- การผ่าตัดทำรู/เปิดลำไส้ใหญ่เพื่อเอาของเสียออกจากร่างกาย
- การตัดมดลูก
- ศัลยกรรมตกแต่งกระเพาะอาหาร
- การคลอดบุตร

ลักษณะที่สำคัญ

- **ไม่ได้ทำมาจากลาเท็กซ์น้ำยางธรรมชาติ** ตัดความกังวลเกี่ยวกับผู้ป่วยหรือผู้ที่ดูแลคนป่วยที่มีอาการภูมิแพ้ต่อยางลาเท็กซ์
- **รอยเย็บร่วมแบบนวัตกรรม** รอยเย็บที่ไม่มีช่องว่างช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายตัวมากยิ่งขึ้น
- **การบีบอัดกระจายอย่างเสมอกัน** วัสดุยืดโดยเฉพาะของ Dale ให้การบีบอัดรอบ ๆ ตัว อย่างสม่ำเสมอกันโดยไม่มีการรูดขึ้นรูดลง การม้วนหรือการหดตัว
- **อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์** วัสดุสามารถใช้งานหรือถอดออกได้หลายครั้ง ลักษณะที่เป็นขุยอาจเกิดขึ้นได้ แต่อุปกรณ์นี้จะช่วยในการเกาะยึดให้ดีขึ้น
- **การปิดตะขอและห่วง** สายคาดรัดหน้าท้องนี้สามารถเปิดและปิดเพื่อตรวจสอบผ้าปิดแผลและบาดแผลได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว สามารถติดได้ทุกจุดบนรอบสายคาดรัดหน้าท้องเพื่อให้กระชับพอดี
- **สายแถบ EasyGrip (ง่ายต่อการจับ)** ใช้ยึดกระเปาะระบายให้อยู่กับที่บนด้านนอกของสายคาดรัดหน้าท้องได้ถึงสี่ถุง
- **สามารถเจาะให้เป็นช่องได้**เพื่อให้พอดีกับการเปิดช่องเทียมในการทำศัลยกรรมช่องท้อง, ใส่ท่อระบายและท่อให้อาหาร

ข้อมูลการสั่งซื้อ

สายคาดรัดหน้าท้อง Dale มีบริการจำหน่ายจากโรงพยาบาล/ตัวแทนจำหน่ายทางการแพทย์, บรรจุหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อหนึ่งกล่อง

เพื่อทราบขนาด ให้วัดสะโพกผู้หญิง, เอวผู้ชาย

525	2 แผง	6 นิ้ว (15 ซม) กว้าง ยืดให้พอดีกับ 28-50 นิ้ว (72-127 ซม)*
410	3 แผง	9 นิ้ว (23 ซม) กว้าง ยืดให้พอดีกับ 30-45 นิ้ว (76-114 ซม)
411	3 แผง	9 นิ้ว (23 ซม) กว้าง ยืดให้พอดีกับ 46-62 นิ้ว (117-157 ซม)
418	3 แผง	9 นิ้ว (23 ซม) กว้าง ยืดให้พอดีกับ 60-75 นิ้ว (152-191 ซม)
810	4 แผง	12 นิ้ว (30 ซม) กว้าง ยืดให้พอดีกับ 30-45 นิ้ว (76-114 ซม)
811	4 แผง	12 นิ้ว (30 ซม) กว้าง ยืดให้พอดีกับ 46-62 นิ้ว (117-157 ซม)
818	4 แผง	12 นิ้ว (30 ซม) กว้าง ยืดให้พอดีกับ 60-75 นิ้ว (152-191 ซม)
820	4 แผง	12 นิ้ว (30 ซม) กว้าง ยืดให้พอดีกับ 72-94 นิ้ว (183-239 ซม)
920	5 แผง	15 นิ้ว (38 ซม) กว้าง ยืดให้พอดีกับ 72-94 นิ้ว (183-239 ซม)

*สามารถใช้เป็นเข็มขัดซี่โครงได้

ใช้กับผู้ป่วยคนเดียว

Dale® Medical Products

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

Dale เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Dale Medical Products, Inc. ในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร
EasyGrip เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dale Medical Products Inc.
สิทธิบัตร www.dalemed.com/patents
©2024 Dale Medical Products, Inc.

942155 REV G



พร้อมแถบสาย EasyGrip™ (ง่ายต่อการจับ)


Dale®
สายคาดรัดหน้าท้อง




พร้อมวัสดุยืดโดยเฉพาะ

การใช้สายคาดรัดหน้าท้อง Dale


สายคาดรัดหน้าท้อง Dale มีจำหน่ายหลายขนาด สามารถนำสายคาดรัดหน้าท้องสองอันมาใช้ร่วมกันได้เพื่อให้ได้ขนาดพอดีกับผู้ป่วยขนาดใหญ่

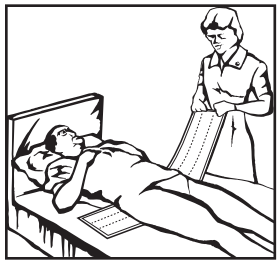


1. วางสายคาดไว้ใต้ตัวผู้ป่วยโดยให้วัสดุที่มีตะขอหงายขึ้นและจุดตรงตัว V คว่ำลงและยึดปลายด้านหนึ่งออก การยึดที่เหมาะสมจะให้แรงบีบอัดที่จำเป็น

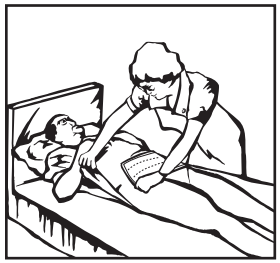

2. ยึดสายคาดไว้เหนือท้องของผู้ป่วยแล้วจับไว้ด้วยมือเดียว หากต้องการแรงบีบอัดเพิ่มขึ้นที่ช่องท้องด้านบนหรือด้านล่าง จะต้องวางสายคาดรัดหน้าท้องให้ตรงหรือวางไว้ที่มุมด้านหนึ่ง

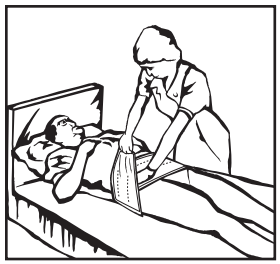

3. ยึดปลายอีกด้านหนึ่งไปยังมุมที่ต้องการ

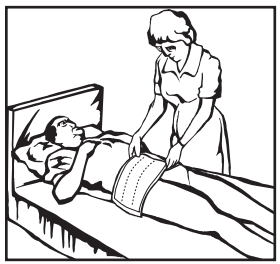



4. กดปิดตะขอให้แน่นขณะที่ยึดสายคาดลงเพื่อปิดวัสดุ


ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ยึดสายคาดรัดหน้าท้องออกอย่างเพียงพอ โปรดจำไว้ว่าความพอดีที่ปลอดภัยจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการหายใจ ที่จริงแล้วการยึดและแรงบีบอัดจะช่วยให้หายใจเข้าลึก ๆ ได้ง่ายขึ้น

ช่วยในการระบายของเหลวออก การให้อาหารทางสายและรูเปิดเทียม


สามารถเจาะรูในสายคาดรัดหน้าท้อง Dale เพื่อให้พอดีกับท่อต่าง ๆ เช่น ท่อระบายของเหลวออก ท่อให้อาหารทางสายยางและการเปิดช่องรูเทียมสำหรับการทำศัลยกรรมช่องท้อง วางสายคาดรัดหน้าท้องไว้บนตัวผู้ป่วยเพื่อให้มีความหนาเพียงจุดเดียวเหนือบริเวณสายยาง ทำเครื่องหมาย X บนผ้าตรงที่จะเจาะรู ทำรอยบนผ้าและทำการตัดวัสดุ (ดูภาพประกอบ) เมื่อผ้าถูกยึดออก การตัดเป็นรูปวงรีจะกลายเป็นรูกลมเพื่อให้เข้าได้พอดีกับสายยาง เส้นผ่าศูนย์กลางของรูจะมีขนาดเท่ากับความยาวของการตัด ดูการใช้แถบสาย EasyGrip (ง่ายต่อการจับ) ที่ปกหลัง

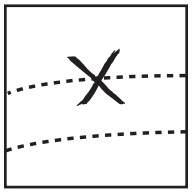

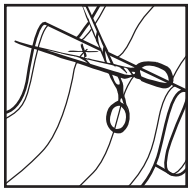

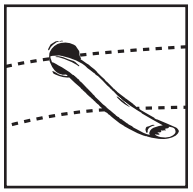


การใส่ด้วยตนเอง

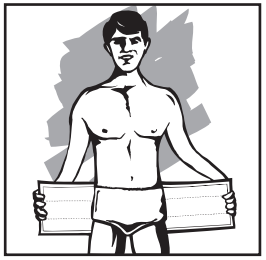

1. จัดวางตำแหน่งสายคาดรัดหน้าท้องโดยให้ขอบด้านบนอยู่ต่ำกว่าสะดือและตรงจุด V คว่ำลง ยึดสายคาดรัดหน้าท้องออกไปทางด้านข้าง




2. ยึดสายคาดรัดหน้าท้องขณะที่พันไปรอบตัว

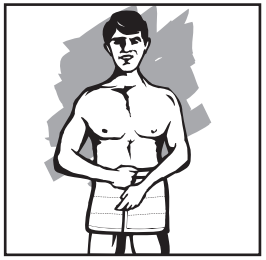

3. กดปิดให้แน่นเพื่อความปลอดภัย

†การใช้แถบสาย EasyGrip (ง่ายต่อการจับ)

1. ยกแถบสาย EasyGrip (ง่ายต่อการจับ) ออกจากสายคาดรัดหน้าท้อง

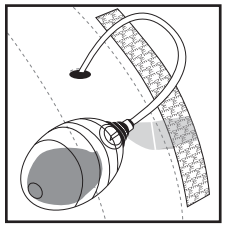

สำหรับการใช้กระเปาะระบาย ให้ผูกแถบสาย EasyGrip (ง่ายต่อการจับ) เข้ากับแถบกระเปาะระบาย นำไปติดกับสายคาดรัดหน้าท้องอีกครั้ง แถบสาย EasyGrip (ง่ายต่อการจับ) สามารถตัดออกเพื่อให้มีตัวเลือกเพิ่มขึ้นในการยึดกระเปาะ

† ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีที่สุดเสมอสำหรับอุปกรณ์ระบายของเหลว

การซักทำความสะอาดและการดูแลรักษา

ซัก* ด้วยเครื่องซักผ้า


หรือ ซักด้วยมือ

ห้ามใช้สารฟอกขาว

นำไปตากให้แห้ง

ซัก* ด้วยเครื่องหรือซักด้วยมือโดยใช้ผงซักฟอกขนาดอ่อน ก่อนซัก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ยึดพื้นผิวของตะขอและห่วงอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการสะสมของเศษฝุ่นผ้า ซึ่งสามารถรบกวนเส้นใยและทำให้คุณสมบัติการล็อกของเส้นใยอ่อนลง นำไปแขวนตากให้แห้ง

***(อุณหภูมิสูงถึง 40-60°C/104-140°F)**

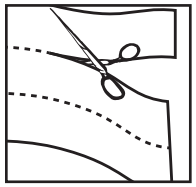

***** หากสายคาดรัดหน้าท้องกว้างเกินไป อาจเอาแผงออกโดยการตัดระหว่างแผง