Özel Esneme Materyali olan Dale Abdominal Korse

Dale Abdominal Korse abdominal kasları desteklerken hareketliliğe ve kasların yeniden gelişmesine yardımcı olur.

Korse tamamen Dale'ın Özel Esneme Materyalinden yapılmıştır ve daha hassas ve daha rahat bir uyum için her noktada cırt cırt yoluyla kapanmaya izin verir. Eşit dağılmış kompresyon öksürmeyi ve derin solunumu destekler. Hastalar daha rahat yürüyebilir ve böylece atelektazi, pnömoni ve flebit gibi hareketsizliğe bağlı komplikasyonların olasılığı azalır.

Uygulama Talimatı

Dale Abdominal Korse aşağıdakiler gibi işlemler sonrasında destek ve rahatlık sağlar:

- Sezaryen
- Liposuction
- Abdominoplasti
- Abdominal ostomi / stoma
- Histerektomi
- Gastroplasti
- Doğum

Temel Özellikler

- **Doğal kauçuk lateksle üretilmemiştir.** Hasta veya bakıcının lateks aşırı duyarlılığı endişelerini ortadan kaldırır
- **Yenilikçi birleştirici dikiş.** Açıklık bırakmayan dikiş daha fazla hasta rahatlığı sağlar.
- **Eşit dağılmış kompresyon.** Dale'in Özel Esneme Materyali üst üste binme, halat haline gelme veya sıkıştırma olmadan kompresyonu daha düzgün şekilde dağıtır.
- **Ürün ömrü.** Materyal defalarca birleştirilip ayrılabilir. Bir miktar tüylenme olabilir ama bu aslında tutma gücünü daha da arttırır.
- **Kanca ve halka kapCırt cırt kapama.** Korse pansumanı ve yarayı incelemek için hızlıca ve kolayca açılır ve kapanır. Tam uyum için çevresinin herhangi bir kısmında tutturulabilir.
- **EasyGrip Strip.** Abdominal korse dışında dört adede kadar drenaj haznesi tutar.
- Ostomi ameliyatı, drenaj ve besleme tüpleri ile oluşturulan açıklıklara uygun **delikler açılabilir**.

Siparis Bilgisi

Dale Abdominal Korseler hastane/tıbbi malzeme satıcılarından, her pakette bir tane olmak üzere temin edilebilir.

Büyüklüğü bulmak için kadınlarda kalçayı, erkeklerde beli ölçün.

525	2 panel	6 inç (15 cm) genişliğinde esneyip suna uyar: 28-50 inç (72-127cm)*
410	3 panel	9 inç (23 cm) genişliğinde esneyip suna uyar: 30-45 inç (76-114cm)
411	3 panel	9 inç (23 cm) genişliğinde esneyip suna uyar: 46-62 inç (117-157cm)
418	3 panel	9 inç (23 cm) genişliğinde esneyip suna uyar: 60-75 inç (152-191cm)
810	4 panel	12 inç (30 cm) genişliğinde esneyip suna uyar: 30-45 inç (76-114cm)
811	4 panel	12 inç (30 cm) genişliğinde esneyip suna uyar: 46-62 inç (117-157cm)
818	4 panel	12inç (30 cm) genişliğinde esneyip suna uyar: 60-75 inç (152-191cm)
820	4 panel	12 inç (30 cm) genişliğinde esneyip suna uyar: 72-94 inç (183-239cm)
920	5 panel	15 inç (38 cm) genişliğinde esneyip suna uyar: 72-94 inç (183-239cm)

*kaburga kemeri olarak da kullanılabilir

Tek hastada kullanılmak üzeredir.

Dale®
Medical Products

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

Dale, Dale Medical Products, Inc. şirketinin ABD, AB ve İngiltere'de tescilli ticari markasıdır.
EasyGrip Dale Medical Products, Inc. şirketinin ticari markasıdır.
Patent www.dalemed.com/patents
©2024 Dale Medical Products, Inc.
942155 REV G

EasyGrip™ Stripli




Dale® Abdominal Korse




Özel Esneme Materyalli

Dale Abdominal Korse Uygulama Talimatı


Dale Abdominal Korseler çeşitli büyüklüklerde mevcuttur. Çok iri bir hasta için iki korse birleştirilebilir.

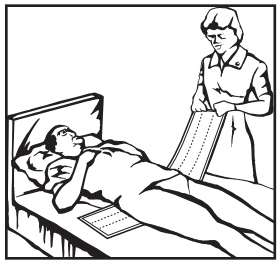


1. Korseyi, kanca materyali yukarı bakacak şekilde ve V noktası aşağı bakacak şekilde hastanın altına yerleştirin ve bir ucunu dışarı esnetin. Uygun esneme gereken kompresyonu sağlar.

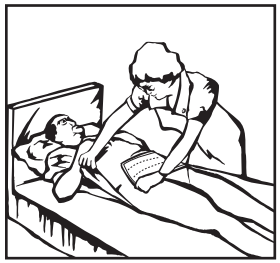

2. Korseyi hastanın midesi üzerinden esnetin ve bir elle tutun. Korse düz olarak veya üst veya alt karın bölgesi üzerine ek basınç gerekiyorsa açılı yerleştirilebilir.

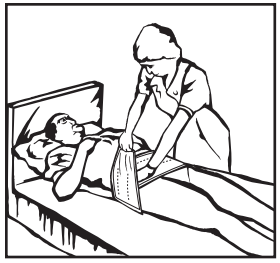

3. Diğer ucu istenen açıda esnetip getirin.

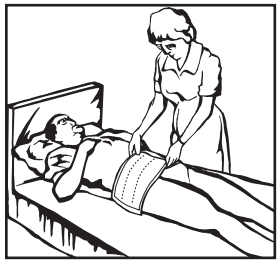



4. Malzemeyi kapatmak için gererken kancayı sıkıca bastırın.


Korseyi yeterince esnettiğinizden emin olun. Unutmayın ki sıkı bir uyum nefes almayı kısıtlamayacaktır; esneme ve kompresyon aslında derin solunumu kolaylaştırır.

Drenaj, Besleme Tüpleri ve Ostomi Desteği


Dale Abdominal Korsede drenaj, besleme amaçlı olanlar gibi tüpleri ve ostomi ameliyatı ile oluşturulan açıklıkları yerleştirmek için bir delik kesilebilir. Korseyi hastaya yerleştirip tüp bölgesi üzerinde tek bir tabaka olduğundan emin olun. Deliğin olması gereken yerde materyal üzerine bir X çizin, materyali buruşturun ve elips seklinde bir kesi yapın (bakiniz sekil). Materyal esneyince elips seklinde kesi tüpün geçebileceği yuvarlak bir delik haline gelir. Deliğin çapı kesinin uzunluğuna eşit olacaktır. EasyGrip Strip Uygulamaları için arka kapağa bakın.

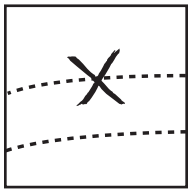

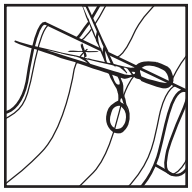

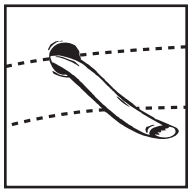


Kendi Kendine Uygulama

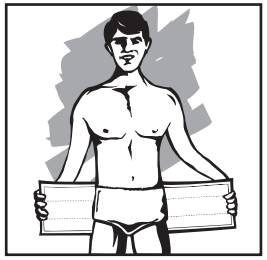

1. Korseyi üst kenarı göbeğin hemen altına ve V noktası aşağı bakacak şekilde yerleştirin. Korseyi yanlara doğru uzatın.




2. Sararken korseyi gerin.

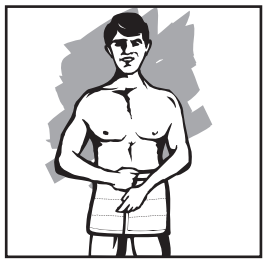

3. Sıkıca kapatmak için bastırın.

†EasyGrip Strip Uygulama

1. EasyGrip Stripi Korseden kaldırın

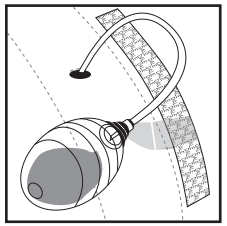

Drenaj haznesi kullanımı için EasyGrip™ Stripi drenaj haznesi çıkıntısı içinden geçirin; tekrar korseye takın. EasyGrip Strip, hazneleri sabitlemek için daha fazla seçeneğe izin vermek için kesilebilir.

† Drenaj cihazları için en iyi uygulama standartlarını daima izleyin.

Yıkama ve Bakım

Makinede yıkayın*


Veya elle yıkayın

Çamaşır suyu kullanmayın

Asarak kurutun

Hafif bir deterjanla, makineyle veya elle yıkayın.* Yıkamadan önce cırt cırt yüzeylerin, cırt cırt lifleriyle etkileşime girip kilitlenme özelliklerini zayıflatabilecek lif birikmesini önleyecek şekilde sağlamca kapatıldığından emin olun. Asarak kurutun.

***(en yüksek 40-60°C/104-140°F)**

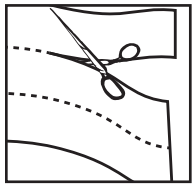

***** Korse çok geniş ise, panellerin arası kesilerek paneller çıkarılabilir.