Dale® ACE* Connector® se Staršími Přípojkami

REF 475

(*Access Control for Enteral - *Ovladač přístupu pro enterální použití)
Pracuje s otevřenými nebo uzavřenými enterálními systémy

ACE Connector je indikován pro ovládání toku tekutin do lékařských trubiček a z nich, přičemž se stará o dodávku enterální formy, injekční proplachování a tekuté léky, bez toho, že by narušoval linku dodávky tekutin, po dobu až 30 dní. Tento uzavřený systém chrání zdravotnické pracovníky před náhodným vystavením žaludečním šťávám pacienta.


Pokyny pro Používání

1 ***Napájecí procedura***

ACE Connector **nahrazuje enterální napájecí adaptéry PEG pro g-trubičky.**

a. Připojte konektor katétru na napájecí trubičku.
b. Vložte napájecí sadu či hrot stříkačky s bolusem do bílého flexibilního adaptéru.
c. Otočte rukojetí do pozice ON (ZAP) pro dodávání napájecí formy.
d. Otočte rukojetí do pozice OFF (VYP), jakmile je napájení ukončeno, a vyjměte napájecí sadu z bílého flexibilního adaptéru.


Je-li ***ACE Connector*** používán pro plnění NG, připojte konec konektoru katétru přímo do trubičky NG. Postupujte dle bodů b až d uvedených výše.

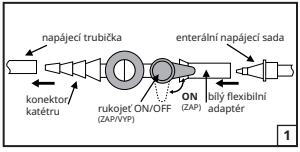

2 ***50-60ml irigační stříkačka s hrotem katétru / výplach a postup podávání tekutých léků***

Z bezpečnostních důvodů přijme *ACE Connector* pouze proplachovací stříkačky pro hrot katétru a nepřijme sady nebo stříkačky pro hrot typu luer.


a. Otočte rukojeť do pozice OFF (VYP).
b. Přidržte ***Ace Connector*** a pevně ***zatlačte za současného otočení*** 50-60ml hrot stříkačky pro zavedení katétru do samotěsnícího portu pro stříkačku, dokud není zajištěno těsné spojení.
c. Naplňte tekutinu nebo lék do konektoru ***ACE Connector***.
d. Vyjměte stříkačku. Port „Auto-Seal" stříkačky se automaticky uzavře.
e. Propláchněte port stříkačky Auto-Seal teplou vodou.

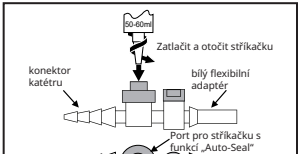

3 ***Drenážní a odsávací procedura***

ACE Connector **nahrazuje konektory 5-in-1 používané s typy Salem, Levin a žaludečními trubičkami.**

a. Vyjměte jakýkoliv konektor 5-in-1 z pacientovy trubičky.
b. Připojte konec konektoru katétru na pacientovu trubičku.
c. Odstraňte bílý flexibilní adaptér a připojte odsávací trubičku přímo na ***ACE Connector***.
d. Otočte rukojeť do pozice ON (ZAP) pro odsávání nebo odtok.
e. Otočte rukojeť do pozice OFF (VYP) a vyjměte odsávací trubičku, pokud je to třeba.

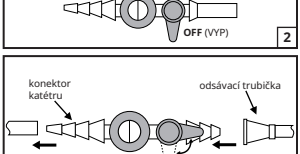

K použití pouze u jednoho pacienta / Uchovejte v suchu a chladu
Federální zákony (v USA) omezují prodej tohoto zařízení na lékaře nebo na předpis lékaře.

- Pro zmobilnění pacienta otočte rukojeť do pozice OFF (VYP) a rozpojte napájecí sadu nebo odsávací trubičku. Pacient se potom může pohybovat, jak je potřeba. Napájení a odtok může potom pokračovat dle potřeby při opakování výše uvedeného postupu.
- Změňte podle potřeby. Nedoporučuje se k použití po dobu delší než 30 dnů.
- V případě, že přístroj nefunguje dle návodu nebo dle očekávání, proplách**ně**te ***ACE Connector*** důkladně dle návodu a zkontrolujte nastavení enterálního podání. Pokud problém přetrvává, vyměňte jej za nový ***ACE Connector*** a proveďte nastavení enterálního podání tak, jak je to třeba, podle nemocničního protokolu „provádění enterálního podávání".
- ***ACE Connector*** poskytuje primárně metodu podání pro enterální způsob podání u pacienta. Při podávání léků postupujte dle protokolu nemocnice nebo zdravotnického zařízení, týkajícího se provádění enterálního podávání.

Zdravotnické výrobky Dale jsou dostupné u vašeho dodavatele nemocničního/zdravotnického materiálu.
Patent www.dalemed.com/patents

Informace k objednávce

475 Dale ACE Connector
Baleno jednotlivě.
Prodáváno v krabicích po 50 kusech

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

PHT NON-DEHP DEHP

Vyrobeno bez použití latexu z přírodní pryže

Vyrobeno v Číně

Dale & ACE Connector jsou registrované ochranné známky společnosti Dale Medical Products, Inc. v USA, EU a Velké Británii.
©2024 Dale Medical Products, Inc.

Dale Medical Products