Dale® ACE* Connector® med Ældre Tilslutninger

REF 475

(*Access Controller for Enteral/styremekanisme til enteral adgang)

Fungerer med åbne eller lukkede enteralsystemer

ACE Connector er indiceret til styring af væskeflow ind og ud af medicinske slanger ved indgivelse af enteral ernæring, skylning med sprøjte og flydende medicin uden at ødelægge slangerne til væskeadministration i op til 30 dage. Dette lukkede system beskytter sundhedsmedarbejderen mod utilsigtet eksponering for patientens gastriske væsker.


Brugsanvisning

1 ***Ernæringstilførsel***

ACE Connector **erstatter PEG g-sonde til enteral ernæringstilførsel.**

a. Sæt enden af kateterkonnektoren ind i ernæringssonden.
b. Sæt ernæringssættets eller bolus-sprøjtens spids ind i den hvide, fleksible adapter.
c. Drej håndtaget over på ON for at tilføre ernæring.
d. Drej håndtaget over på OFF, når ernæringstilførslen er færdig, og tag ernæringssættet ud af den hvide, fleksible adapter.


Når ***ACE Connector*** bruges til nasogastrisk (NG) ernæring, sættes forbindelsesdelen på kateteret direkte ind i NG-sonden. Følg anvisningerne b-d ovenfor.

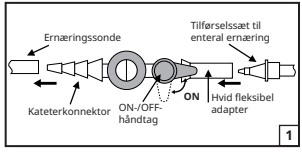

2 ***50-60 ml kateterspids Irrigationssprøjte/afføringssprøjte og procedure for levering af flydende medicin***

Som en sikkerhedsforanstaltning passer *ACE Connector* kun til sprøjter med kateterspids til udskylning og kan ikke forbindes med administrationssæt eller sprøjter med Luer-spids.


a. Drej håndtaget over på OFF.
b. Hold fast i ***Ace Connector***, samtidig med at 50-60ml kateterspidsens sprøjte ***trykkes*** ind i sprøjteporten med automatisk lukning ***og drejes***, indtil den sidder fast.
c. Dosér væske eller medicin ind i ***ACE Connector***.
d. Tag sprøjten ud. Sprøjteporten med auto-forsegling lukker automatisk.
e. Skyl med varmt vand gennem sprøjteporten med auto-forsegling.

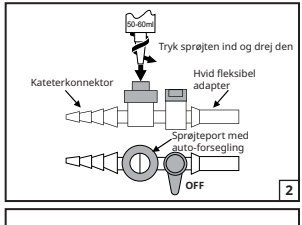

3 ***Dræn og sug***

ACE Connector **erstatter 5 i 1-konnektorer, der bruges med Salem-, Levin- og gastrosonder.**

a. Tag eventuelt 5 i 1-konnektor ud af patientens sonde.
b. Sæt enden af kateterkonnektoren ind i patientens sonde.
c. Tag den hvide, fleksible adapter af og sæt sugeslangen direkte til i ***ACE Connector***.
d. Drej håndtaget over på ON for at suge eller dræne.
e. Drej håndtaget over på OFF og tag sugeslangen ud efter behov.

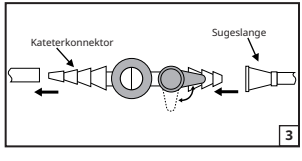

Til brug til en enkelt patient / Opbevares køligt og tørt

Ifølge amerikansk lovgivning (USA) må dette produkt kun sælges af en læge eller på en læges ordination.

- Patienten frigøres ved at dreje håndtaget over på OFF og tage tilførselssættet eller sugeslangen ud. Patienten kan derefter bevæge sig frit. Tilførsel og tømning kan genoptages efter behov ved at gentage ovenstående procedurer.
- Udskiftes efter behov. Anvendelse i mere end 30 dage anbefales ikke.
- Hvis udstyret ikke fungerer som angivet i brugsanvisningen eller som forventet, skal ***ACE Connector*** skylles ifølge brugsanvisningen, og opsætningen af det enterale tilførselssæt skal kontrolleres. Hvis problemet vedvarer, skal ***ACE Connector*** og det enterale tilførselssæt udskiftes efter behov i henhold til hospitalets protokol for behandling med enteral ernæring.
- ***ACE Connector*** udgør primært en tilførselsmetode til enteral ernæring til patienter. Medicin skal indgives i henhold til hospitalets protokol for behandling med enteral ernæring.

Dale medicinske produkter fås hos hospitalets foretrukne leverandør af hospitalsudstyr og medicinsk udstyr.

Patent www.dalemed.com/patents

Bestilling

475 Dale ACE Connector
Individuelt pakket.
Sælges i æsker med 50 stk.

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

PHT NON-DEHP DEHP

Fremstillet uden naturgummilatex

Fremstillet i Kina

Dale & ACE Connector er registrerede varemærker tilhørende Dale Medical Products, Inc. i USA, EU og Storbritannien.
©2024 Dale Medical Products, Inc.

Dale Medical Products