Dale® ACE* Connector® ja Legacy-liitännät

REF 475

(*Access Controller for Enteral [enteraalisen käytön hallinta])

Toimii avoimien tai suljettujen enteraalisten järjestelmien kanssa.

ACE Connector -liitin on tarkoitettu lääketieteellisten letkujen tulo- ja poistovirtauksen säätöön enteraaliruokinnan, ruiskuhuuhtelun ja nesteläätkityksen yhteydessä ilman, että nesteiden syöttöletkuja tarvitsee katkaista, jopa 30 päivän ajan. Tämä suljettu järjestelmä suojelee terveydenhuollon ammattilaista vahingossa tapahtuvalta altistumiselta potilaan mahanesteille.


KÄYTTÖOHJEET

1 *Syöttäminen*

ACE Connector **korvaa enteraaliseen ruokintaan käytettävät PEG-/G-letkujen sovittimet.**

a. Liitä katetrin liitinpää ruokintaletkuun.
b. Työnnä ruokintaletkun tai bolusruiskun kärki valkoiseen joustavaan sovittimeen.
c. Käännä kahva AUKI-asentoon, kun haluat käynnistää ruokinnan.
d. Käännä kahva POIS-asentoon, kun potilas on ruokittu, ja irrota ruokintaletku valkoisesta joustavasta sovittimesta.


Kun ***Ace Connector*** -liitintä käytetään NG-letkujen kanssa ruokintaan, liitä katetrin liitinpää suoraan NG-letkuun. Seuraa yllä mainittuja kohtia b–d.

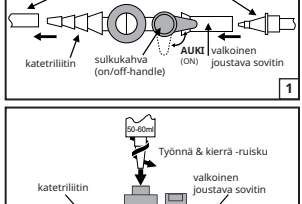

2 *50-60 ml:n Katetrikärkinen huuhteluruisku / lavaatio ja nestemäisen lääkkeen antaminen*

Turvaominaisuutena *ACE Connector* -liittimen kärkeen sopivat vain katetrikärkiset huuhteluruiskut. Siihen eivät sovi luer-kärkiset annosteluletkut tai ruiskut.


a. Käännä kahva POIS-asentoon.
b. Kun pitelet ***Ace Connector*** -liitintä, ***työnnä ja kierrä*** 50-60 ml:n katetrin kärjen ruisku lujasti itsetiivistyvään ruiskun venttiiliaukkoon, kunnes liitos on tiivis.
c. Annostele neste tai lääke ***ACE Connector*** -liittimeen.
d. Irrota ruisku. Automaattisen tiivisteen ruiskuportti sulkeutuu automaattisesti.
e. Huuhtele lämpimällä vedellä automaattisen tiivisteen ruiskuportin kautta.

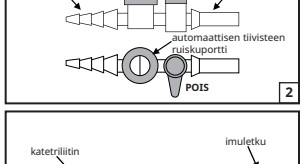

3 *Dreenaus ja imu*

ACE Connector **korvaa "5-in-1"-tyyppiset liittimet, joita käytetään Salem-, Levin- ja mahaletkujen kanssa.**

a. Irrota potilasletkusta siinä mahdollisesti oleva "5-in-1"-liitin.
b. Liitä katetrin liitinpää potilasletkuun.
c. Irrota valkoinen joustava sovitin ja kiinnitä imuletku suoraan ***ACE Connector*** -liittimeen.
d. Käännä kahva AUKI-asentoon, kun haluat käynnistää imun tai valutuksen.
e. Käännä kahva POIS-asentoon ja irrota haluttaessa imuletku.

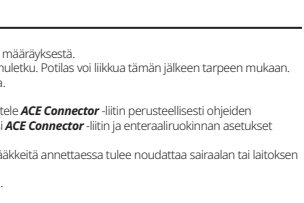

Potilaskohtainen / säilytettävä viileässä ja kuivassa paikassa

Yhdysvaltain lain mukaan tämän välineen saa myydä ainoastaan lääkäri tai lääkärin määräyksestä.

- Jos potilaan tarvitsee liikkua, käännä kahva POIS-asentoon ja irrota ruokinta- tai imuletku. Potilas voi liikkua tämän jälkeen tarpeen mukaan. Ruokinta tai dreenaus voi tarvittaessa jatkua tämän jälkeen edellä kuvatulla tavalla.
- Vaihda tarpeen mukaan. Ei suositella yli 30 päivää kestävään käyttöön.
- Siinä tapauksessa, että laite ei toimi ohjeen mukaisesti tai odotetulla tavalla, huuhtele ***ACE Connector*** -liitin perusteellisesti ohjeiden mukaan ja tarkista enteraaliruokinnan asetukset. Jos ongelma toistuu, vaihda uusi ***ACE Connector*** -liitin ja enteraaliruokinnan asetukset noudattamalla sairaalan "enteraaliruokinnan hallinnan" protokollaa.
- ***ACE Connector*** tarjoaa ensisijaisesti menetelmän potilaan enteraaliruokintaan. Lääkkeitä annettaessa tulee noudattaa sairaalan tai laitoksen enteraaliruokinnan hallinnan protokollaa.

Dale lääketieteellisiä tuotteita on saatavana sairaala- ja lääkintätarvikkeiden myyjiltä.

Patentti www.dalemed.com/patents

Tilaustiedot

475 Dale ACE Connector
Yksittäispakattu.
Myydään 50 kappaleen laatikoissa.

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

PHT NON-DEHP DEHP

Ei ole valmistettu luonnonkumilateksista

Valmistettu Kiinassa

Dale ja ACE Connector ovat Dale Medical Products, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa, EU:ssa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
©2024 Dale Medical Products, Inc.

Dale Medical Products