Dale® ACE* Connector® hagyományos csatlakozókkal

REF 475

(*Access Controller for Enteral -enterális hozáférésvezérlő)

Nyitott vagy zárt enterális rendszerekkel működik

Az ***ACE Connector*** csatlakozó használata javallott, legfeljebb 30 napos használatra, orvosi vezetékekbe be-, illetve belőlük kiáramló folyadékáramok vezérlésére és enterális készítmények, fecskendőöblítő folyadék, illetve folyékony gyógyszerek egyidejű adagolására a folyadékszállító vezetékek megtörése nélkül. Ez a zárt rendszer védi az egészségügyi dolgozót a páciens gyomorfolyadékaival való véletlen érintkezés ellen.


Használati Utasítások

1 *Táplálási eljárás*

Az ***ACE Connector*** csatlakozó a perkután endoszkopikus gasztrotómiás(PEG) gyomorcső enterális táplálóadaptereit helyettesíti.

a. A katétercsatlakozó végét kapcsolja rá a tápcsőre.
b. Helyezze be a táplálókészletet vagy a bóluszos fecskendő hegyét a hajlékony fehér adapterbe.
c. A fogantyút fordítsa BE helyzetbe a tápformula adagolásához.
d. Amikor a táplálás befejeződött, fordítsa a fogantyút KI állásra, majd a táplálókészletet vegye ki a hajlékony fehér adapterből.


Amikor az ***Ace Connector*** eszköz nasogasztrikus tápláláshoz kerül felhasználásra, a katétercsatlakozó végét közvetlenül az NG-csőbe csatlakoztassa. Ezután kövesse a fenti b-d. lépéseket.

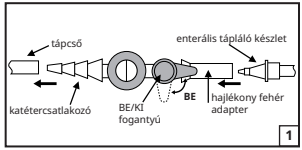

2 *50-60 ml-es katétercsúcs-öblítő fecskendő/nyílás és folyékony gyógyszeradagolási eljárás*

Az ***ACE Connector*** csatlakozó biztonsági tulajdonsága, hogy csak katéteröblítő fecskendőket fogad, és nem fogad be Luer-hegyű adagoló készleteket vagy fecskendőket.


a. Fordítsa KI állásra a fogantyút.
b. Fogja meg szilárdan az ***Ace Connector*** eszközt, ***nyomja le*** az 50-60 ml-es katéteröblítő fecskendőt az automatikusan záródó fecskendőcsatlakozóba, és csavarja el, amíg rögzül.
c. Töltsön folyadékot vagy gyógyszert az ***ACE Connector*** csatlakozóba.
d. Távolítsa el a fecskendőt. Az önzáródó fecskendőcsatlakozás automatikusan bezárul.
e. Az önzáródó fecskendőcsatlakozáson keresztül öblítse át az eszközt meleg vízzel.

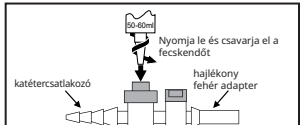

3 *Folyadékelvezetési és leszívási eljárás*

Az ***ACE Connector*** csatlakozó a Salem-, Levin- és gyomorcsövekhez alkalmazott 5 az 1-ben csatlakozókat helyettesíti.

a. A betegcsőből távolítson el minden 5 az 1-ben csatlakozót.
b. A katétercsatlakozó véget kapcsolja rá a betegcsőre.
c. Vegye ki a hajlékony fehér adaptert, majd egyenesen az ***ACE Connector*** csatlakozóba csatlakoztassa a szívócsövet.
d. A szívás vagy folyadékelvezetés megkezdéséhez a fogantyút fordítsa a BE állásra.
e. Fordítsa a fogantyút KI állásra, majd tetszés szerint vegye ki a szívócsövet.

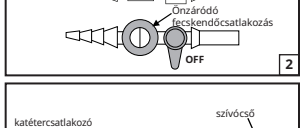

Kizárólag egyetlen beteg számára / Hűvös, száraz helyen tárolandó

Az amerikai szövetségi jobszabályok értelmében a termék kizárólag csak orvosok által, illetve orvosi rendelvényre forgalmazható.

- Annak érdekében, hogy a beteg mozoghasson, a fogantyút állítsa KI helyzetbe, és csatlakoztassa le a táplálókészletet vagy szívócsövet. Ekkor a beteg tetszés szerint járkálhat. A fenti eljárások megismétlésével szükség szerint lehet folytatni a táplálást és a folyadékelvezetést.
- Szükség szerint cserélje. 30 napot meghaladó használata nem javallott.
- Abban az esetben, ha az eszköz nem az utasításokban leírt módon, illetve nem az elvárt módon működik, akkor az utasításoknak megfelelően alaposan öblítse át az ***ACE Connector*** csatlakozót, és ellenőrizze az enterális behelyezőszerkezetet. Amennyiben a probléma nem szűnik meg, akkor szükség szerint új ***ACE Connector*** csatlakozóra és enterális behelyezőszerkezetre cserélje le az eszközt, eközben betartva a kórház „enterális táplálásszabályzati" protokollját.
- Az ***ACE Connector*** csatlakozó elsősorban betegek enterális táplálásához szükséges behelyező módszert nyújt. A gyógyszerek adagolásakor kövesse a kórház „enterális táplálásszabályzati" protokollját.

A Dale gyógyászati termékek elérhetők a kedvelt kórházi/gyógyászati eszköz-forgalmazójától.

Szabadalom www.dalemed.com/patents

Rendelési Információk

475 Dale ACE Connector
Egyenként csomagolva.
50 darabos dobozokban áruljuk.

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

PHT NON-DEHP DEHP

Nem tartalmaz természetes latexet

Kínában készült

A Dale és az ACE Connector a Dale Medical Products, Inc. bejegyzett védjegyei az USA-ban, az EU-ban és az Egyesült Királyságban.
©2024 Dale Medical Products, Inc.

Dale Medical Products