레거시 연결이 있는 Dale® ACE* 커넥터®

REF 475

(*Access Controller for Enteral [소화관용 액세스 컨트롤러])

개방 또는 폐쇄 장관계에서 사용

ACE Connector 는 최대 30일 동안 액 공급선을 절단하지 않고서도 소화관 포퍌러, 주사기 세척 및 물약 공급 등을 실시하면서 액의 흐름을 의학용 튜브 안팎으로 통제하기 위한 용도입니다. 본 폐쇄 시스템은 환자의 위액에 우발적으로 노출되지 않도록 의료진들을 보호합니다.


사용법

1 ***급양 절차***

ACE Connector **는 PEG g-튜브 소화관 급양 어댑터를 대체합니다.**

a. 카테터 커넥터 끝부분을 영양관에 연결하십시오.
b. 피딩 세트나 볼루스 주사기 끝부분을 백색 탄력성 어댑터에 삽입 하십시오.
c. 처방 영양을 공급하려면 핸들을 ON 위치로 돌리십시오.
d. 급양이 완료되면 핸들을 OFF 위치로 돌리고 급양 세트를 백색 탄력성 어댑터에서 제거하십시오.


Ace Connector 를 NG 급양에 사용할 때는 카테터 커넥터 끝부분을 직접 NG 튜브에 연결하십시오. 위의 b-d 항 절차를 따르십시오.

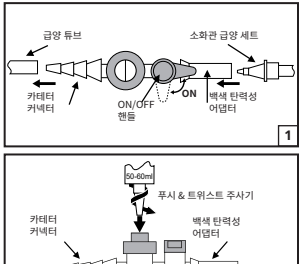

2 ***50-60ml 카테터 팁 관개 주사기/세척 및 액체 약물 전달 절차.***

ACE Connector **는 카테터 팁 세척 주사기만을 받아들이며 루어 팁 투여 세트나 주사기는 받아들이지 않습니다.**


a. 핸들을 OFF 위치로 돌리십시오.
b. ***Ace Connector*** 를 단단히 잡은 상태에서 50-60ml 카테터 팁 주사기를 누르고 꽉 조일 때까지 자체 밀봉 주사기 포트로 돌립니다.
c. 액이나 약을 ***ACE Connector*** 안으로 투여하십시오.
d. 주사기를 제거하십시오. 자동-밀봉 주사기 포트가 자동으로 닫힙니다.
e. 자동-밀봉 주사기 포트를 통해서 따뜻한 물로 씻어내십시오.

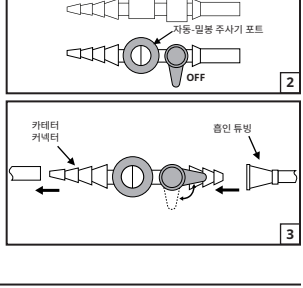

3 ***배액 및 흡인 절차***

ACE Connector **는 Salem, Levin 및 위관과 함께 사용하는 5-in-1 커넥터를 대체합니다.**

a. 환자 튜브에서 모든 5-in-1 커넥터를 제거하십시오.
b. 카테터 커넥터 끝부분을 환자 튜브에 연결하십시오.
c. 백색 탄력성 어댑터를 제거하고 흡인 튜빙을 ***ACE Connector*** 에 직접 연결하십시오.
d. 흡인이나 배액을 위해서는 핸들을 ON 위치로 돌리십시오.
e. 핸들을 OFF 위치로 돌리고 흡인 튜빙을 제거하십시오(원하는 경우).

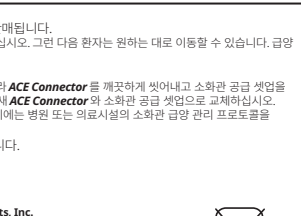

단일 환자용 / 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오

연방법(미국)에 따라 본 장치는 의사에 의해서만 또는 의사의 주문에 따라서만 판매됩니다.

- 환자를 이동하기 위해서는, 핸들을 OFF 위치로 돌리고 급양 세트나 흡인 튜빙을 차단하십시오. 그런 다음 환자는 원하는 대로 이동할 수 있습니다. 급양 및 배액은 위의 절차를 반복함으로써 필요한대로 재 개할 수 있습니다.
- 필요한대로 바꾸십시오. 30일 이상 사용은 권장하지 않습니다.
- 이 장치가 사용법대로 또는 예상했던 대로 기능을 수행하지 않는 경우에는 사용법에 따라 ***ACE Connector*** 를 깨끗하게 씻어내고 소화관 공급 셋업을 점검하십시오. 문제가 지속되면, 필요한 경우 병원 "소화관 급양 관리" 프로토콜에 따라 새 ***ACE Connector*** 와 소화관 공급 셋업으로 교체하십시오.
- ***ACE Connector*** 는 주로 환자 소화관 급양을 위한 공급 방법을 제공합니다. 약물 투여 시에는 병원 또는 의료시설의 소화관 급양 관리 프로토콜을 따르십시오.

Dale 의료 제품은 이용하시는 병원/의료용품 공급상으로부터 구입하실 수 있습니다.

특허 www.dalemed.com/patents

주문 정보

475 Dale ACE Connector
개별 포장.
50개입 상자로 판매.

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, 미국
전화: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

PHT NON-DEHP DEHP
천연 고무 라텍스로 제조되지 않음

중국산

Dale & ACE Connector는 미국, EU 및 영국에서 Dale Medical Products, Inc.의 등록 상표입니다.
©2024 Dale Medical Products, Inc.

Dale Medical Products