Dale® ACE* Connector® med Eldre Tilkoblinger

REF 475

(*Access Controller for Enteral/styremekanisme til enteral adgang)

Fungerer med åpne eller lukkede enterale systemer

ACE Connector er beregnet på å kontrollere væskestrøm inn og ut av medisinske slanger, samtidig som den skal sørge for tilførsel av enteral formel, sprøyteirrigasjon og flytende medisiner, uten å bryte væsketilførselsslangene, i opptil 30 dager. Dette lukkede systemet beskytter helsepersonell mot utilsiktet eksponering for pasientens magevæsker.


Bruksanvisning

1 ***Prosedyre for å gi intravenøs næring***

ACE Connector **erstatter PEG g-slangens mellomstykker for enteral sonde.**

a. Fest kateterkoblingsenden til magesonden.
b. Før ernæringssettet eller bolussprøytespissen inn i hvitt fleksibelt mellomstykke.
c. Vri hendelen til ON-stilling (PÅ) for å gi intravenøs næring.
d. Vri hendelen til OFF-stilling (AV) når prosedyren er fullført, og fjern ernæringssettet fra det hvite, fleksible mellomstykket.


Når ***ACE Connector*** skal brukes til NG-mating, skal kateterkoblingsenden kobles direkte til NG-slangen. Følg anvisningene under b-d ovenfor.

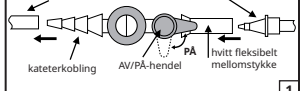

2 ***50-60 ml kateterspiss skyllesprøyte/skylling og flytende medisiner leveringsprosedyre.***

ACE Connector **vil, som en sikkerhetsforanstaltning, bare kunne kobles til irrigasjonssprøyter med kateterspiss, og kan ikke koples sammen med administrasjonssett eller sprøyter med Luer-spiss.**


a. Vri hendelen til OFF-stilling (AV).
b. Mens du holder fast ***Ace Connector***, ***trykker og vrir*** du sprøyten på 50-60ml kateterspissen inn i sprøyteporten med automatisk tetning inntil den sitter godt.
c. Tøm væske eller medisin i ***ACE Connector***.
d. Fjern sprøyten. Den automatisk forseglende sprøyteporten vil lukkes automatisk.
e. Skyll med varmt vann gjennom den automatisk forseglende sprøyteporten.

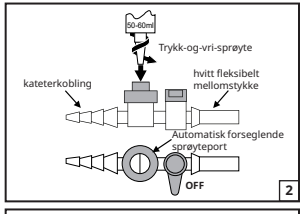

3 ***Drenerings- og sugeprosedyre***

ACE Connector **erstatter 5-i-1-koblinger som brukes med Salem, Levin og magesonder.**

a. Fjern eventuell 5-i-1-kobling fra pasientslangen.
b. Fest kateterkoblingsenden til pasientslangen.
c. Fjern det hvite fleksible mellomstykket, og fest sugeslangen direkte til ***ACE Connector***.
d. Vri hendelen til ON-stilling (PÅ) for å suge eller drenere.
e. Vri hendelen til OFF-stilling (AV) og koble fra sugeslangen, hvis ønskelig.

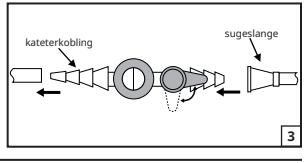

For bruk på én pasient / oppbevares kjølig og tørt

Føderale lover i USA begrenser salg av dette utstyret til leger, eller etter beordring fra lege.

- Når pasienten skal ambulere, vrir du hendelen til OFF-stilling og kobler fra ernæringssettet eller sugeslangen. Pasienten kan deretter ambuleres etter behov. Tilføring av intravenøs næring og drenering kan fortsette ved behov ved å gjenta prosedyrene ovenfor.
- Skift etter behov. Bruk i mer enn 30 dager anbefales ikke.
- Skyll ***ACE Connector*** grundig i henhold til instruksjonene, og kontroller enteralt ernæringssett dersom anordningens ytelse ikke tilsvarer instruksjonene eller ikke fungerer som forventet. Hvis problemet ikke kan løses, skal ***ACE Connector*** og enteralt ernæringssett byttes ut med et nytt, i henhold til sykehusets protokoll for "enteral ernæringsadministrasjon".
- ***ACE Connector*** sørger først og fremst for en leveringsmetode for enteral mating av pasient. Ved administrering av medisiner skal sykehusets eller institusjonens protokoll for enteral ernæringsadministrasjon følges.

Dales medisinske produkter er tilgjengelige fra din aktuelle leverandør av sykehusutstyr/medisinsk utstyr.

Patent www.dalemed.com/patents

Bestillingsinformasjon

475 Dale ACE Connector
Individuelt pakket.
Selges i esker à 50 stk.

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

PHT NON-DEHP DEHP

Ikke produsert med lateks av naturgummi

Produsert i Kina

Dale & ACE Connector er registrerte varemerker for Dale Medical Products, Inc. i USA, EU og Storbritannia.
©2024 Dale Medical Products, Inc.

Dale Medical Products