Dale® ACE* Connector® com Ligações Antigas

REF 475

(*Access Controller for Enteral, ou Controlador de Acesso para Alimentação Enteral)

Funciona com sistemas entéricos abertos ou fechados

O ***ACE Connector*** é indicado para o controlo do fluxo de fluidos para dentro e para fora de tubos médicos, sem deixar de proporcionar a distribuição de fórmula enteral, irrigação com seringa e medicamentos líquidos e sem quebrar as linhas de distribuição de fluidos, por até 30 dias. Este sistema fechado protege o trabalhador de cuidados de saúde da exposição acidental aos fluidos gástricos do doente.


Instruções Para a Utilização

1 ***Procedimento de alimentação***

O *ACE Connector* substitui os adaptadores para alimentação enteral por tubo g PEG.

a. Ligue a extremidade conectora do cateter ao tubo de alimentação.
b. Insira o conjunto de alimentação enteral ou a ponta da seringa para a administração em bólus no adaptador flexível branco.
c. Gire a pega para a posição LIGADO para fornecer fórmula dealimentação.
d. Gire a pega para a posição DESLIGADO quando a alimentação estiver encerrada e remova o conjunto de alimentação do adaptador flexível branco.


Quando o ***ACE Connector*** estiver a ser utilizado para a alimentação NG, ligue a extremidade do conector de cateter directamente ao tubo NG. Siga as instruções "b" a "d" anteriores.

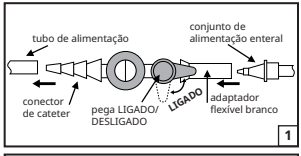

2 ***50-60ml de cateter de ponta de irrigação Seringa/Lavagem e Procedimento de Entrega de Medicamentos Líquidos***

Como procedimento de segurança, o *ACE Connector* só aceita seringas de irrigação da ponta do cateter e não aceita conjuntos ou seringas de administração com ponta Luer.


a. Gire a pega para a posição DESLIGADO.
b. Enquanto segura firmemente no ***Ace Connector***, ***Empurre e torça*** firmemente a seringa da ponta do cateter 50-60ml até à porta da seringa Auto-vedante até estar apertada.
c. Dispense o fluido ou medicamento no ***ACE Connector***.
d. Remova a seringa. A Porta de Seringa com Auto-vedação fechará automaticamente.
e. Carregue com água tépida, através da Porta de Seringa com Auto-vedação.

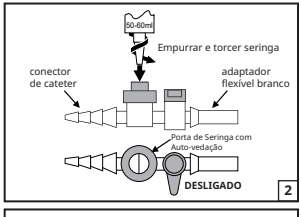

3 ***Procedimento de drenagem e sucção***

O *ACE Connector* substitui os conectores 5-em-1 utilizados com os tubos Salem, Levin e estomacais.

a. Remova todos os conectores 5-em-1 do tubo do paciente.
b. Ligue a extremidade conectora do cateter ao tubo do paciente.
c. Remova o adaptador flexível branco e ligue a tubulação de sucção directamente ao ***ACE Connector***.
d. Gire a pega para a posição LIGADO para efectuar a sucção ou drenagem.
e. Gire a pega para a posição DESLIGADO e remova a tubulação de sucção, se desejar.

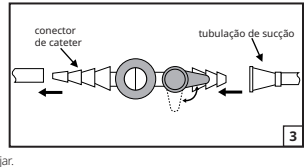

Para a utilização num único paciente / Armazene num local fresco e seco

As leis federais (EUA) limitam a venda deste dispositivo, de forma que deve ser efectuada por um médico ou de acordo com um pedido seu.

- Para dar mobilidade ao paciente, gire a pega para a posição DESLIGADO e desligue o conjunto de alimentação ou a tubulação de sucção. O paciente passa então a ter mobilidade, como desejado. Pode-se voltar a efectuar a alimentação e a drenagem, como necessário, ao se repetirem os procedimentos em cima.
- Substitua como necessário. Não se recomenda para a utilização por mais de 30 dias.
- Caso o desempenho do dispositivo não esteja de acordo com as instruções ou como esperado, carregue totalmente o ***ACE Connector***, de acordo com as instruções, e verifique o conjunto de distribuição enteral. Se o problema persistir, substitua por um ***ACE Connector*** e por um conjunto de distribuição enteral novos, como necessário, de acordo com o protocolo de "gestão de alimentação enteral" do hospital.
- Basicamente, o ***ACE Connector*** proporciona um método de distribuição para a alimentação enteral dos pacientes. Quando forem administrados medicamentos, siga o protocolo de gestão de alimentação enteral do hospital ou do estabelecimento.

Os produtos médicos Dale estão disponíveis para serem adquiridos do revendedor de materiais hospitalares/médicos da sua preferência.

Patente www.dalemed.com/patents

Informações Para Pedidos

475 Dale ACE Connector
Acondicionado em unidades individuais.
Vendido em caixas de 50.

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

PHT NON-DEHP DEHP

Não fabricado com borracha de látex natural

Feito em China

Dale e ACE Connector são marcas comerciais registadas da Dale Medical Products, Inc. nos EUA, UE e Reino Unido
©2024 Dale Medical Products, Inc.

Dale Medical Products
942183-ART_REV_N